

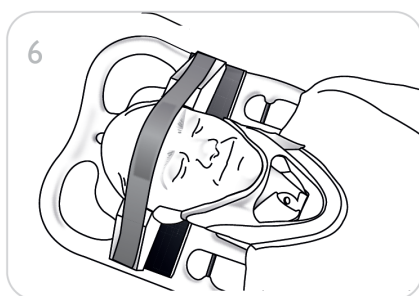
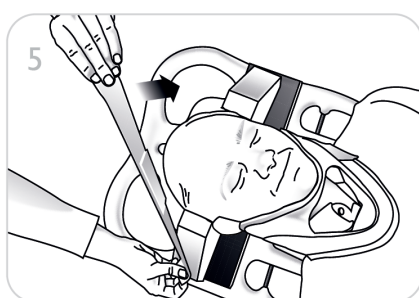
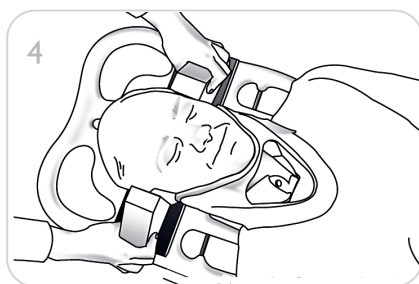
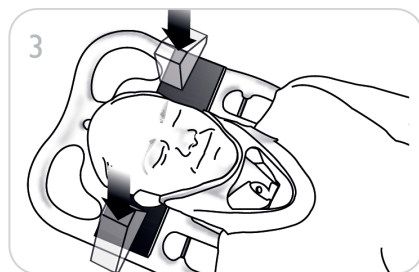


Sta-Blok Head Immobilizer

User Guide

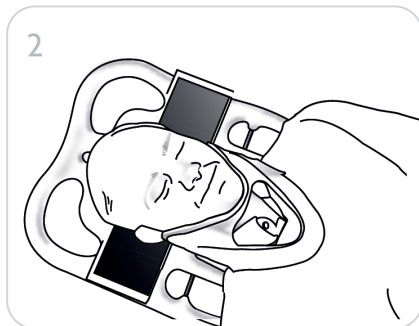

REF Cat. No. 700-00001 QTY: 30 pieces

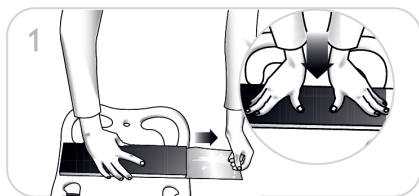

The Sta-Blok Head Immobilizer is to be used as a part of a total immobilization system in conjunction with other immobilization products and techniques to help reduce potential for movement of the patient's head and neck in cases where spinal fracture, dislocation and/or spinal cord injury is suspected.



Warnings

- In cases of suspected spinal cord injury, proper head immobilization is only one part of a total spinal immobilization process.
- Only qualified healthcare providers trained in the use of this and other immobilization products should use the Sta-Blok Head Immobilizer. Failure to use this product as directed, and under prescribed protocols from the local cognizant medical control authority, may result in patient injury and/or disability.



Cautions

- All healthcare provider personnel should read and fully understand these instructions prior to using the product.
- Store product in a cool, dry place.
- Do not store in excessive heat or in direct sunlight.



Note

These Directions are general guidelines and instructions for proper use of the Sta-Blok Head Immobilizer. They are not intended to be and should not be construed as teachings, recommendations or directions for clinical practice.

Components

Each sta-blok package contains the following

- Occipital Pad - Foam pad with blue loop (hook and loop) fastener top surface.
- Side Support Blocks - Triangular foam blocks with hook (hook and loop) fastener surfaces.
- Standard Strap - White loop (hook and loop) fastener strap.
- User Guide

Positioning the sta-blok occipital pad

1. Place the spineboard on a stable surface. Pull the liner from the Occipital Pad. Press Pad down firmly to secure it to the Spineboard.
2. Place the patient on the spineboard. Use an extrication collar if available.

Positioning side support blocks

3. Place a Side Support Block against either side of the head, just above the ears.
4. Press the Blocks firmly down onto the Occipital Pad.

Securing patient's head

5. Apply the Standard Strap with the foam centered on patient's forehead.
6. Attach each hook and loop end to the Side Support Blocks.

Ensuring a neutral position

For children under 8 years old or a patient with helmet, use spinal alignment padding if needed to obtain a neutral position for the spine.



Note

If circumstances prevent either the Standard Straps from being used, suitable lengths of conventional medical adhesive or other tape may be substituted.

| Technical Specifications | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Operating temperature | -15 °C to 38 °C (5 °F to 102 °F) |
| Storage temperature | 0 °C to 52 °C (32 °F to 125 °F) |
| Operating and storage humidity | 5-95% RH non-condensing. |
| Non-sterile | |
| Symbol Glossary | |
| | Single Patient Use. Do not re-use. |
| | Not made with natural rubber latex |
| | Lot number |

El inmovilizador de cabeza sta-blok puede utilizarse como parte de un sistema de inmovilización total junto con otros Productos y técnicas para inmovilizar para ayudar a reducir los movimientos de la cabeza y el cuello del paciente en casos en los que se sospeche de fractura de columna vertebral, dislocación y/o daños en la médula espinal.



Advertencias

- En los casos en que se sospeche de lesiones de la médula espinal, una inmovilización correcta de la cabeza es tan sólo. Una parte de todo el proceso de inmovilización de la columna vertebral.
- Solamente el personal sanitario debidamente formado deberá utilizar el inmovilizador de cabeza sta-blok y cualquier otro producto para inmovilizar. Si este producto no se utiliza del modo indicado y aplicando los protocolos. Establecidos por la autoridad médica local competente, podrían producirse lesiones y/o discapacidad del paciente.



Precauciones

- El personal sanitario debería leer y comprender en su totalidad estas instrucciones antes de utilizar el producto.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco.
- No almacene a temperaturas excesivas ni bajo la luz directa del sol.



Nota

Estas son las instrucciones y directrices generales de uso correcto del inmovilizador de cabeza sta-blok. No se proporcionan ni deben interpretarse como enseñanzas, recomendaciones o directrices para la práctica clínica.

Componentes

Cada caja sta-blok contiene lo siguiente

- Almohadilla occipital de espuma. Almohadilla con correa de seguridad azul (gancho y correa)
- Bloques laterales de sujeción. Bloques de espuma triangulares con gancho (gancho y correa)
- Correa estándar. Correa blanca (gancho y correa) de sujeción
- Guía del usuario

Colocación de la almohadilla occipital del sta-blok

1. Coloque la tabla de inmovilización sobre una superficie estable. Coloque la funda de la almohadilla occipital. Empuje la almohadilla con firmeza contra la tabla de inmovilización para asegurarla.
2. Coloque al paciente sobre la tabla de inmovilización. Utilizar un collarín ajustable si se dispone de uno.

Colocación de los bloques de sujeción laterales

3. Coloque cada bloque de sujeción lateral a un lado de la cabeza, justo por encima de las orejas.
4. Empuje con firmeza los bloques sobre la almohadilla occipital.

Asegurar la cabeza del paciente

5. Aplique la correa estándar con la almohadilla de espuma centrada sobre la frente del paciente
6. Fije los ganchos y los extremos de la correa a los bloques laterales de sujeción.

Asegurando una posición neutral

Para niños menores de 8 años o pacientes con casco, use apoyos para alineamiento cervical si es necesario para obtener una posición neutral de la columna.



Nota

Si las circunstancias impiden el uso de la correa estándar, deberá emplearse cinta adhesiva médica convencional o cualquier otro tipo de cinta adhesiva.

| Especificaciones técnicas | |
|---|--|
| Temperatura para uso | de -15 °C a 38 °C (de 5 °F a 102 °F) |
| Temperatura para almacenamiento | de 0 °C a 52 °C (de 32 °F a 125 °F) |
| Humedad funcionamiento y almacenamiento | HR 5-95% sin condensación |
| No estéril | |
| Glosario de símbolos | |
| | Uso en un solo paciente. No reutilizar |
| | No contiene caucho natural |
| | Numèro de LOTE |

© 2023 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Patented – U.S. Patent No. 6,170,486

Sta-Blok is a trademark of Laerdal Medical AS

Product: Sta-Blok Head Immobilizer with Standard Straps



Manufactured in Mexico for Laerdal Medical AS

P.O. Box 377

Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway

(+47) 51 51 17 00

5184 Rev H

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives