

# SimMan 3G Trauma

クイック セットアップ ガイド







本クイックセットアップガイドでは、SimMan 患者シミュレータの組み立て方法とセットアップ方法を解説しています。SimMan の使用方法については、LLEAP のヘルプファイルと SimMan の取扱説明書をご参照ください。

最新の取扱説明書およびソフトウェアは、[www.laerdal.com/downloads](http://www.laerdal.com/downloads) でダウンロードできます。


# 構成品

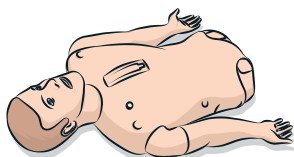


上半身

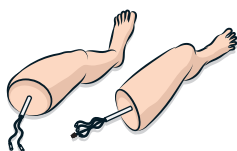

下肢

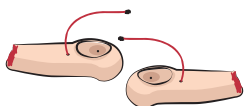


切断モジュール腕

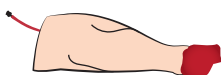


切断モジュール右脚スキン



切断モジュール左脚

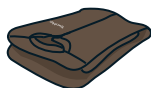

衣服

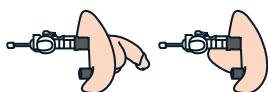

外性器 (男性 & 女性)



取扱説明書 & 重要な製品情報




除細動 ECG 固定具



ECG 電極



肺コンプライアンス O リング  
x 10

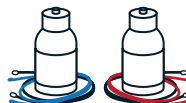

液体 & 血液再充填ボトル



外傷モジュールキット



チェストドレーンスリーブ  
x 6



疑似血液



潤滑スプレー



血圧計カフ



IV バッグ



頸部スキン  
x 6



脛骨パッド & 脛骨  
x 3



IM パッド




胸骨 IO パッド & 胸骨  
x 4



ベビーパウダー



クリップ

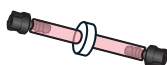

インラインフィルタ, 血液  
x 2




IM 下肢フォームパッド



気胸




輪状甲状靭帯テープ

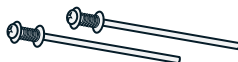

ハードウェアの取り付け



SimMan アームアダプタ

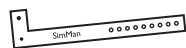

ID バンド



SpO2 プローブ



ツール




外部電源


# PC バッテリーの充電

---



患者モニタ

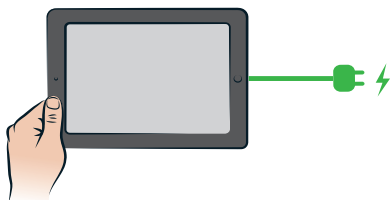




インストラクター PC

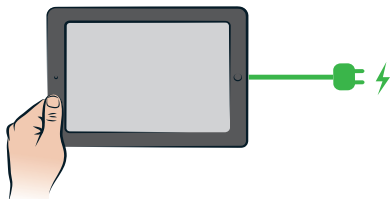

## 上半身スキンのジッパーを開く


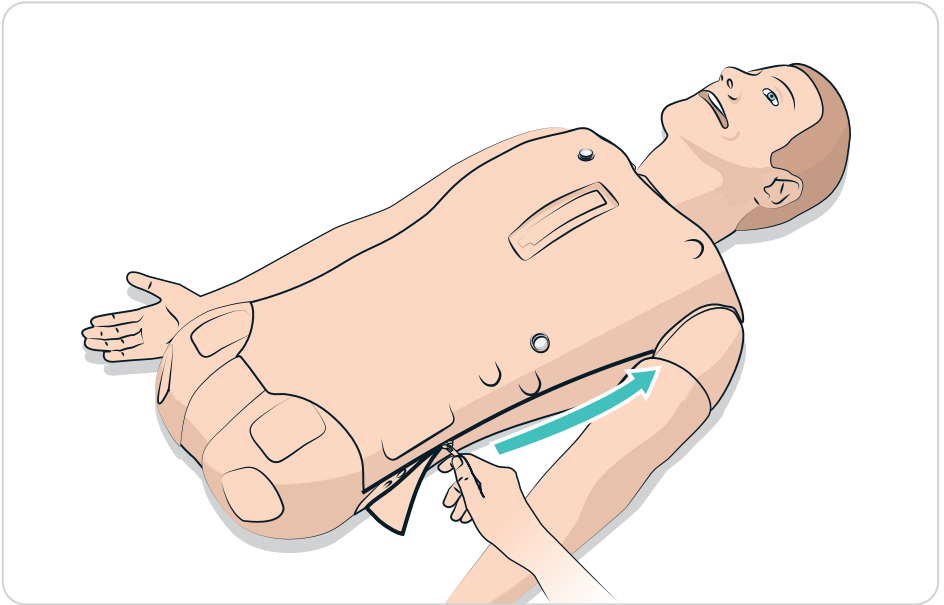
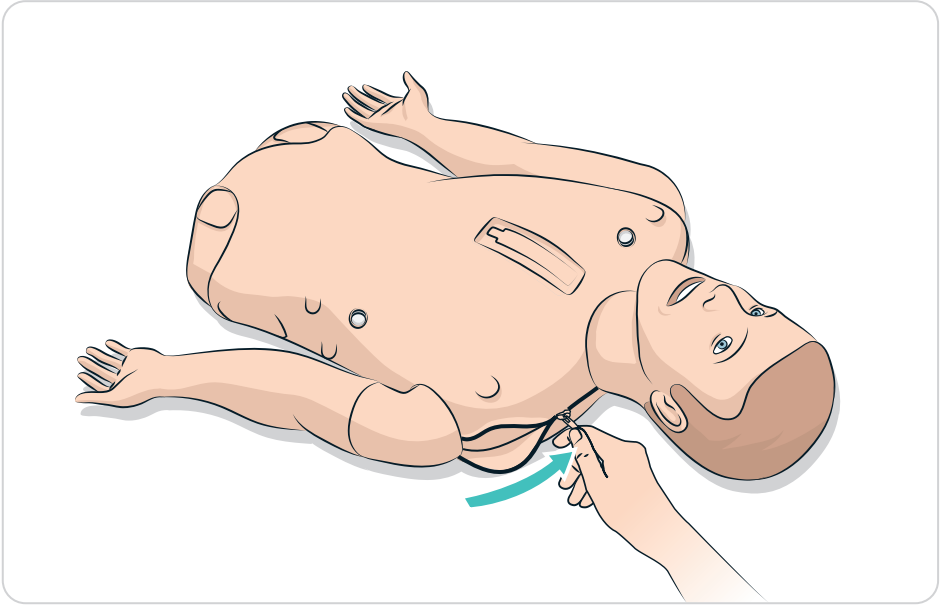


## バッテリーの接続

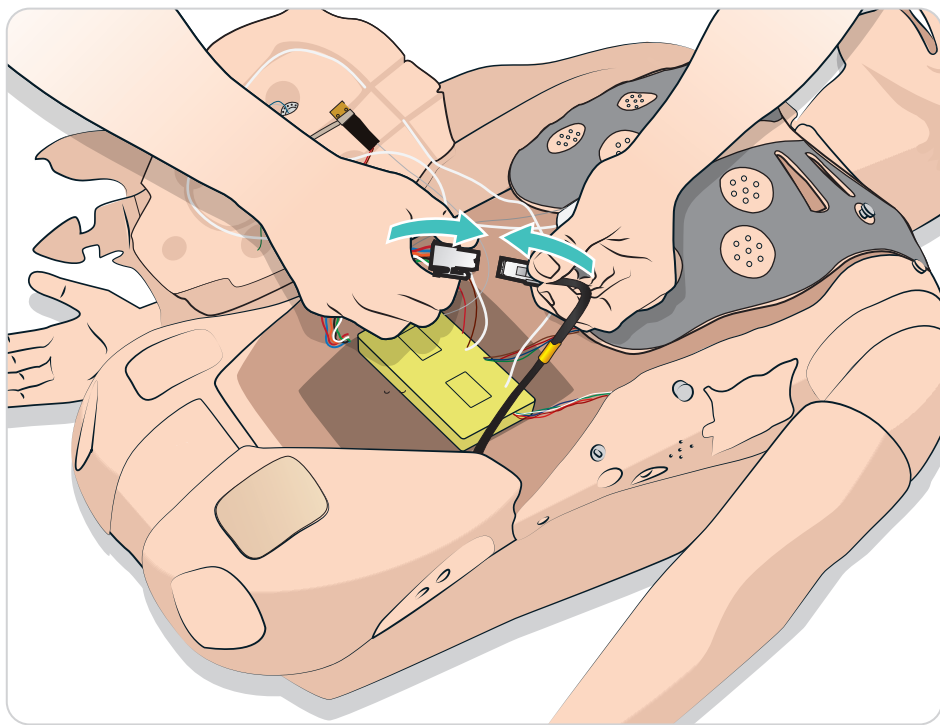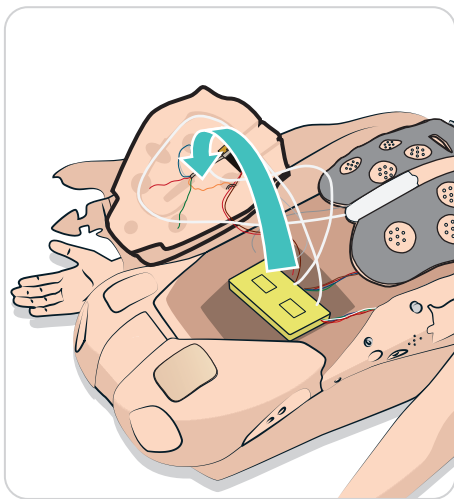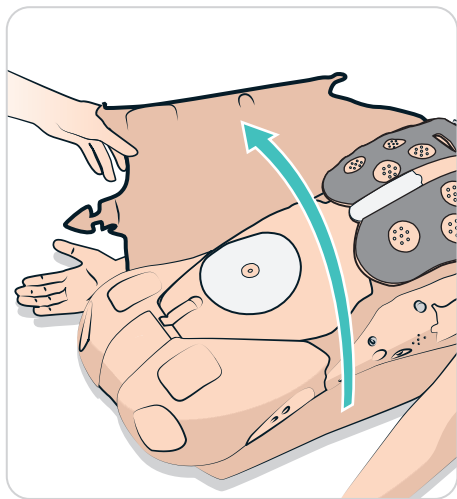







## バッテリーの充電

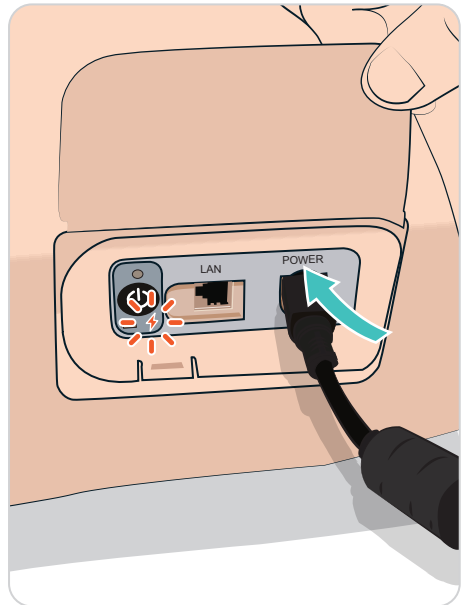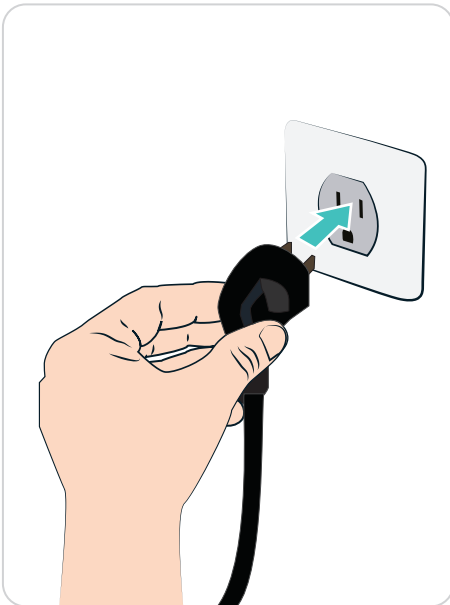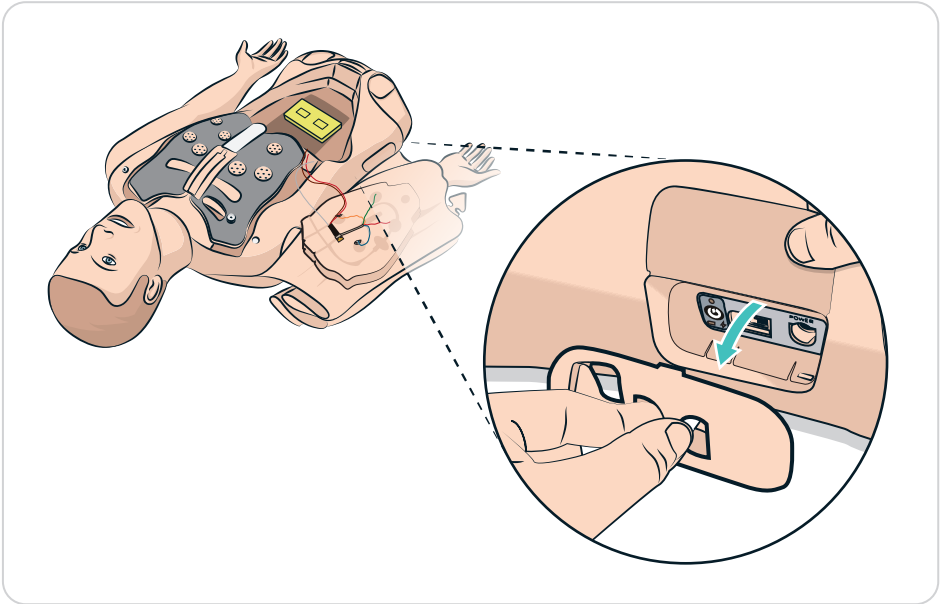

## 左脚の取り付け


---



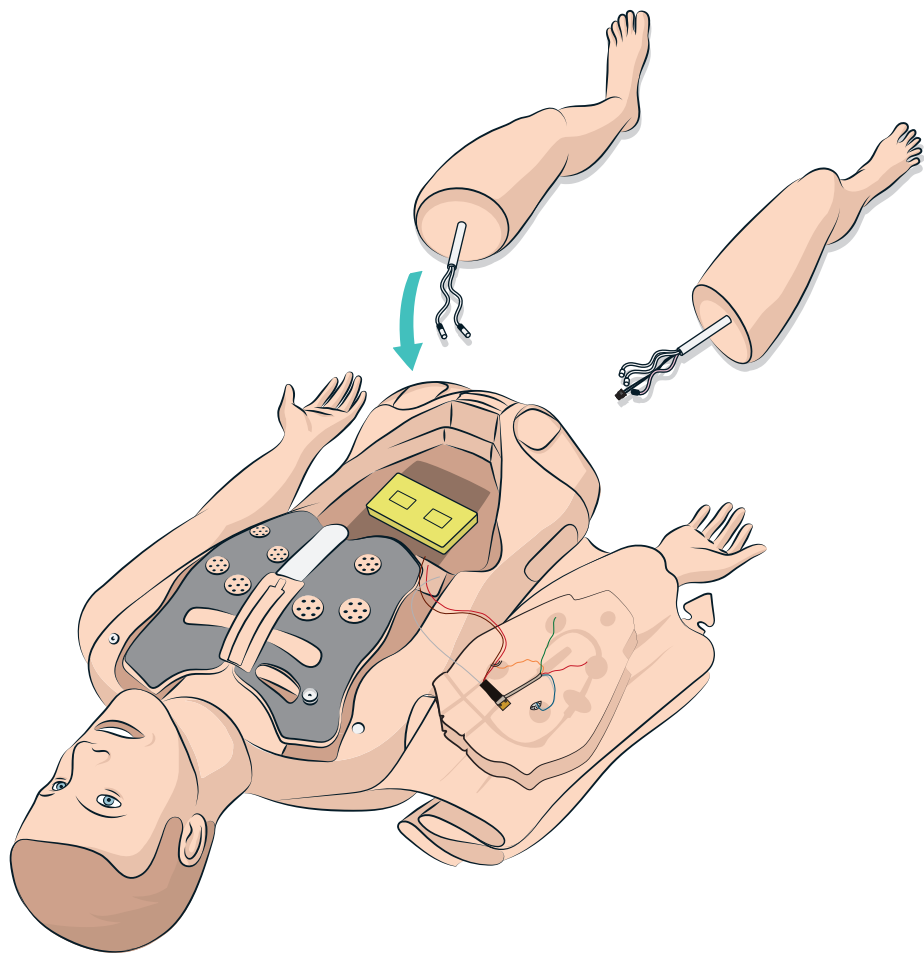


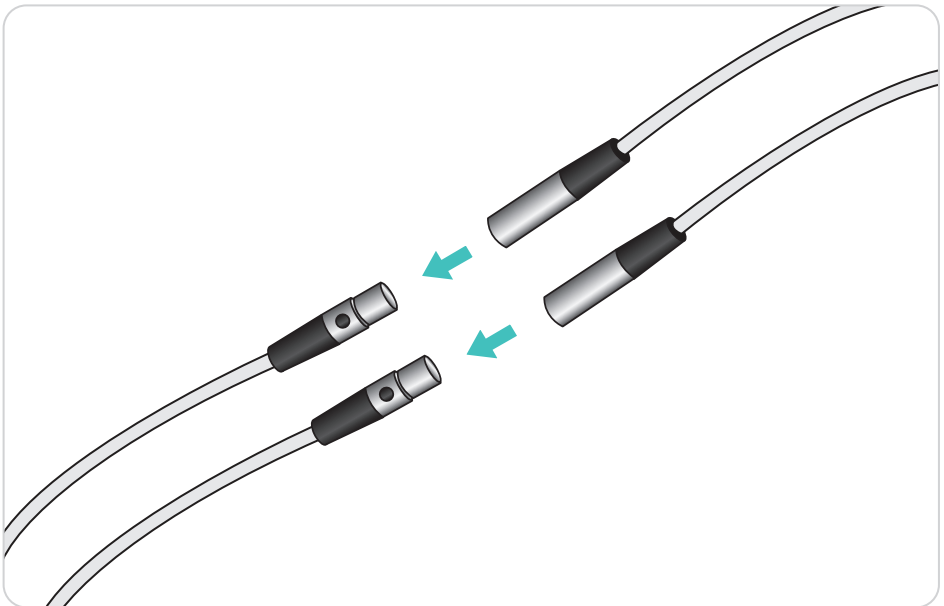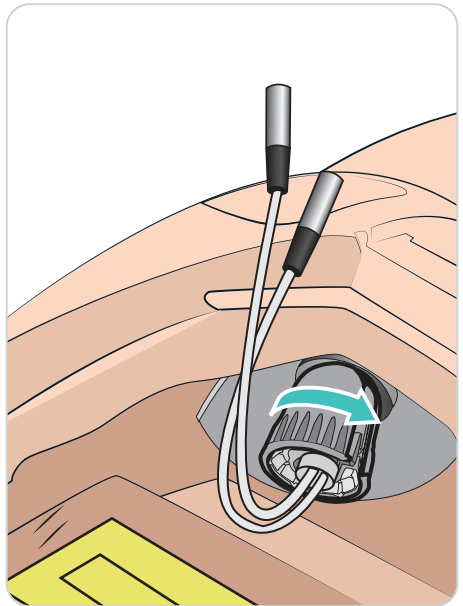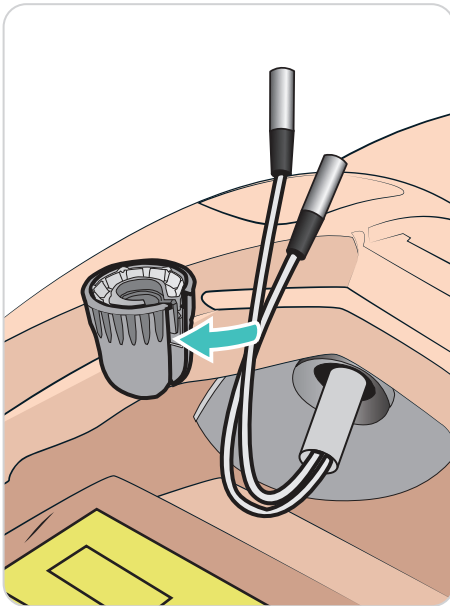

## 右脚の取り付け

---

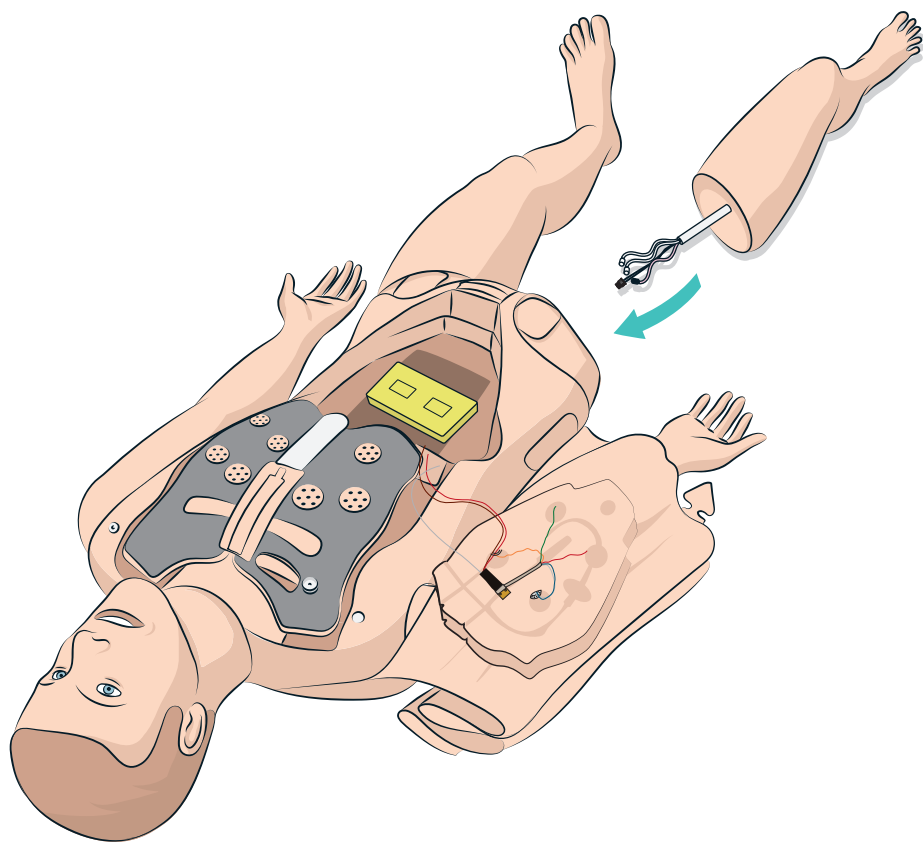

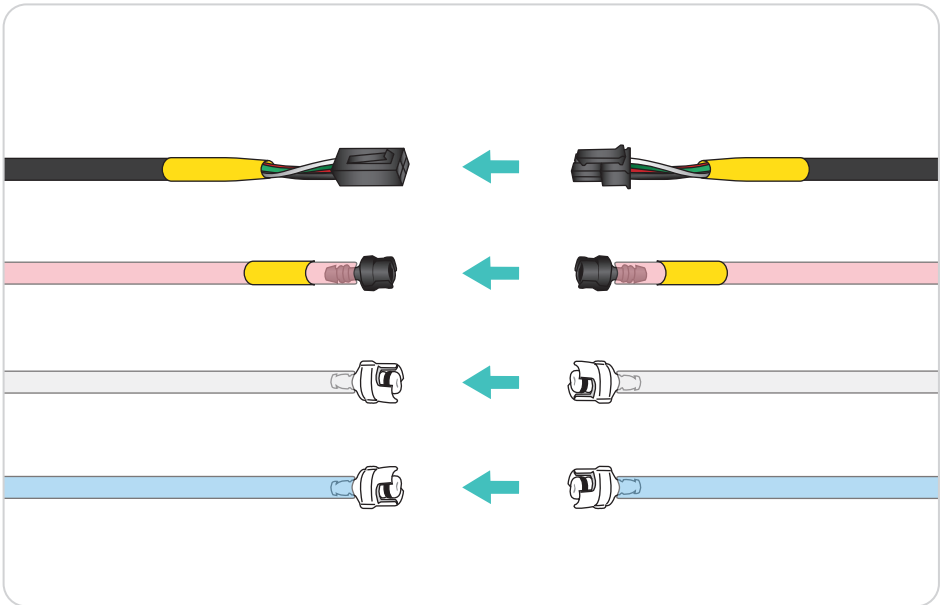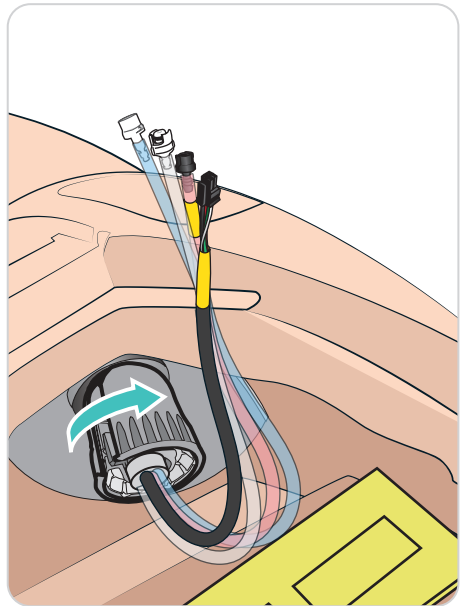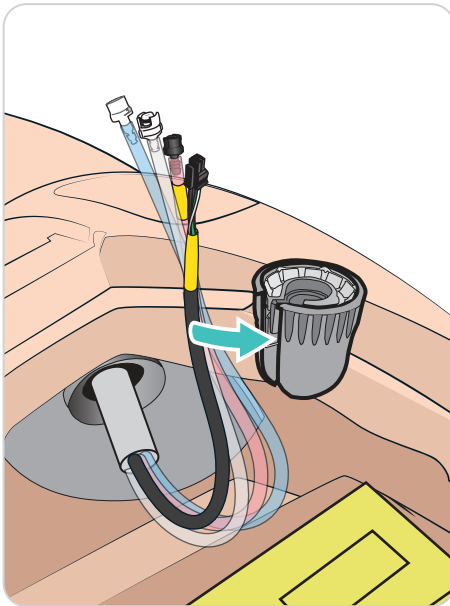


# 無線セットアップ


ヘッドセット




インストラクター PC

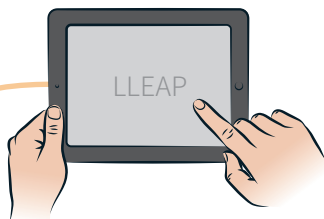


SpO2

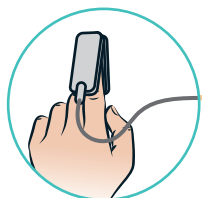

患者モニタ

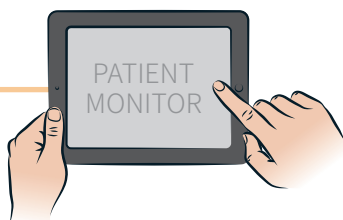

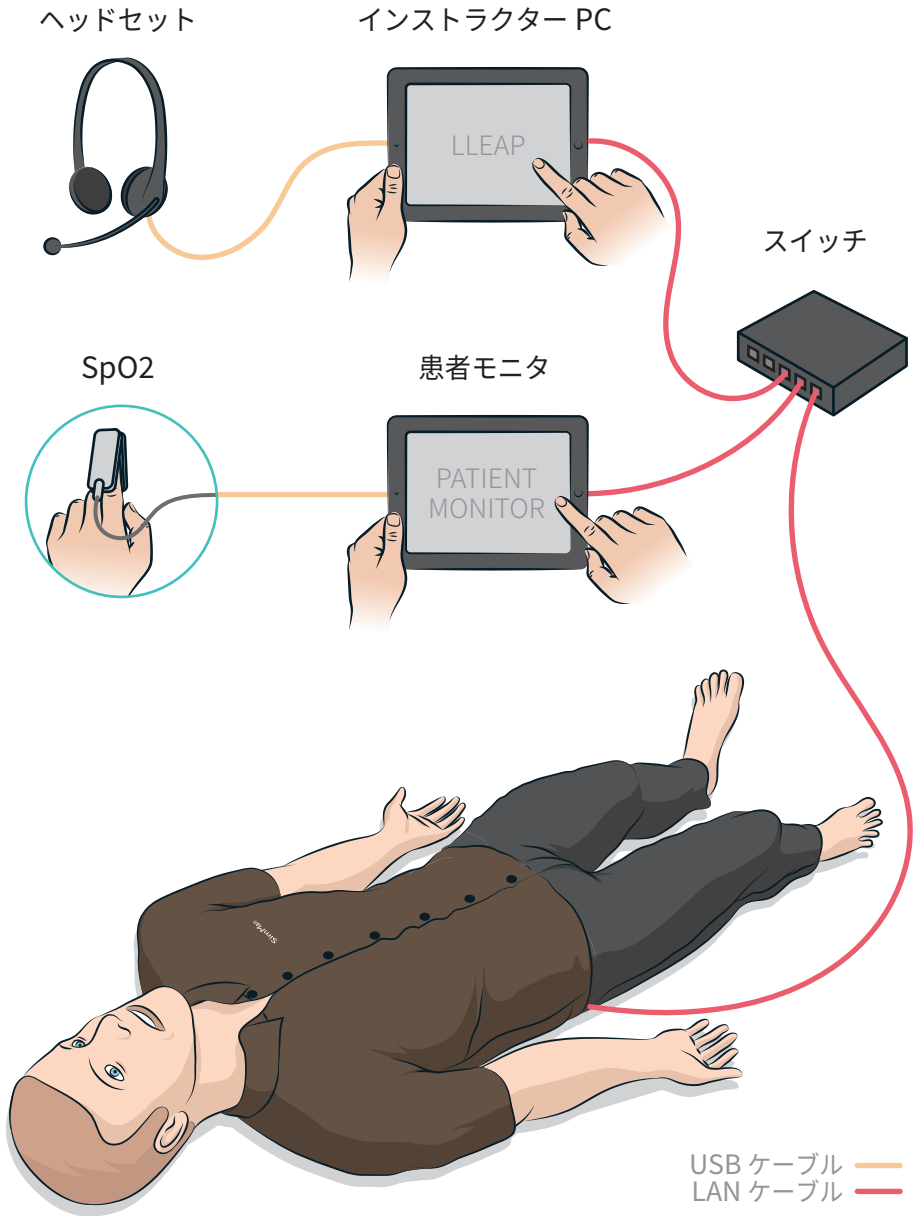

2023 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufacturer: Laerdal Medical AS  
PO. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger; Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

20-08135 Rev E

[www.laerdal.com/jp/](http://www.laerdal.com/jp/)



**Laerdal**  
helping save lives