


SimMan 3G Trauma


Guia de configuração rápida

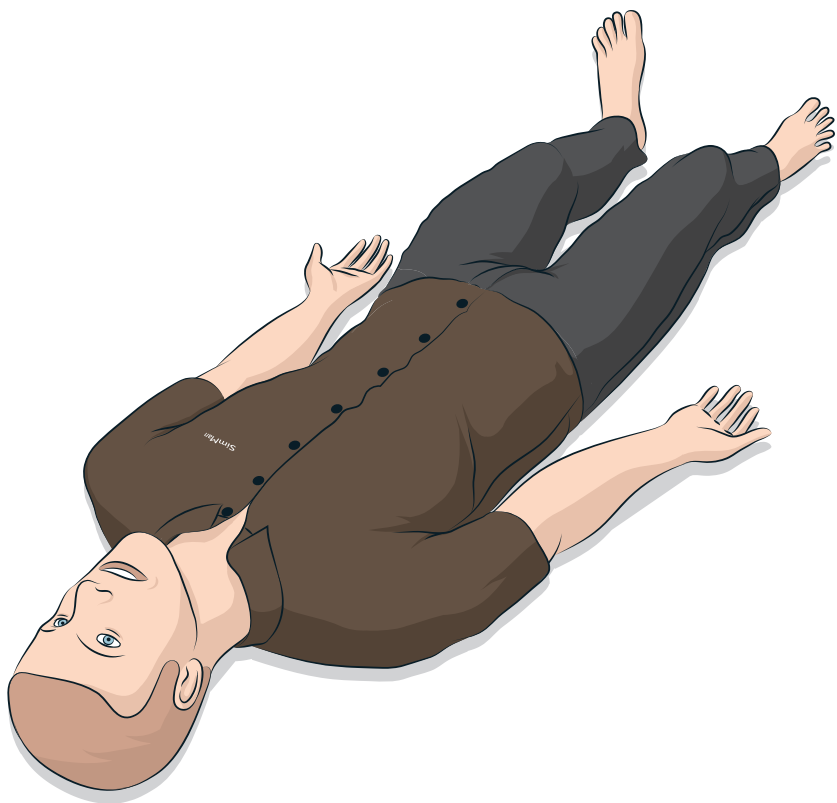


Este Guia de configuração rápida descreve como montar e configurar o simulador de paciente SimMan. Para obter informações sobre como usar o SimMan, consulte os arquivos de ajuda do LLEAP e o guia do usuário do SimMan.

Visite www.laerdal.com/download para fazer o download das versões mais recentes do software e do guia do usuário.


Itens incluídos e armazenagem

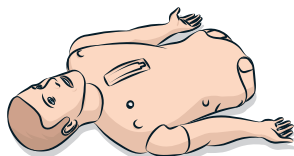

Torso

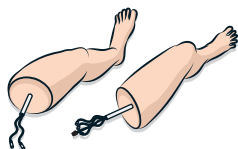

Pernas

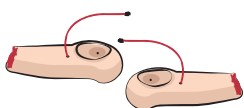


Braços amputados




Pele da perna direita amputada



Perna esquerda amputada

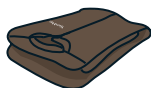

Roupas

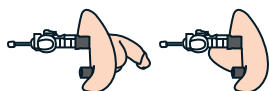

Genitália masculina e feminina



Guia do usuário & Informações importantes sobre o produto




Chave para plug do desf. de ECG



Eletrodo do adaptador de ECG



Anel de complacência pulmonar x 10

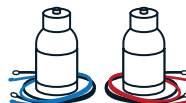

Frascos de reabastecimento de fluido e sangue



Kit de feridas



Pleura de drenagem torácica x 6

Itens inclusos e armazenagem



Hemoconcentrado



Talco



Pulseira de identificação



Lubrificante de vias aéreas




Grampo



Cabo de SpO₂



Manguito de pressão arterial

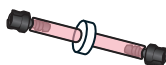

Linha de sangue com filtro
x 2



Ferramentas



Bolsa IV




Blocos de espuma da perna para IM



Fonte de alimentação externa



Pele do pescoço
x 3

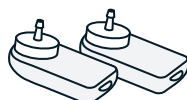

Pneumotórax




Osso e placas tibiais
x 3



Fita para Cricotireóideo



Placas IM

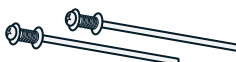

Instrumentos de montagem




Osso e placas esternais IO
x 4




Adaptador de braço do SimMan

CARREGAR BATERIAS DO PC



Monitor do paciente

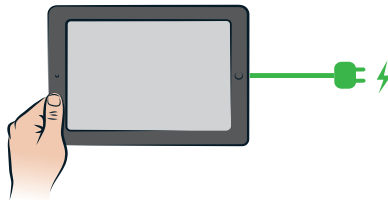




PC do instrutor

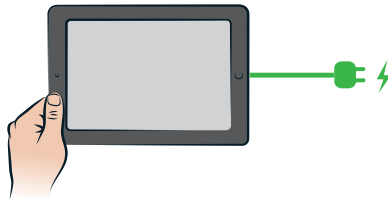




ABRIR O ZÍPER DA PELE DO TORSO

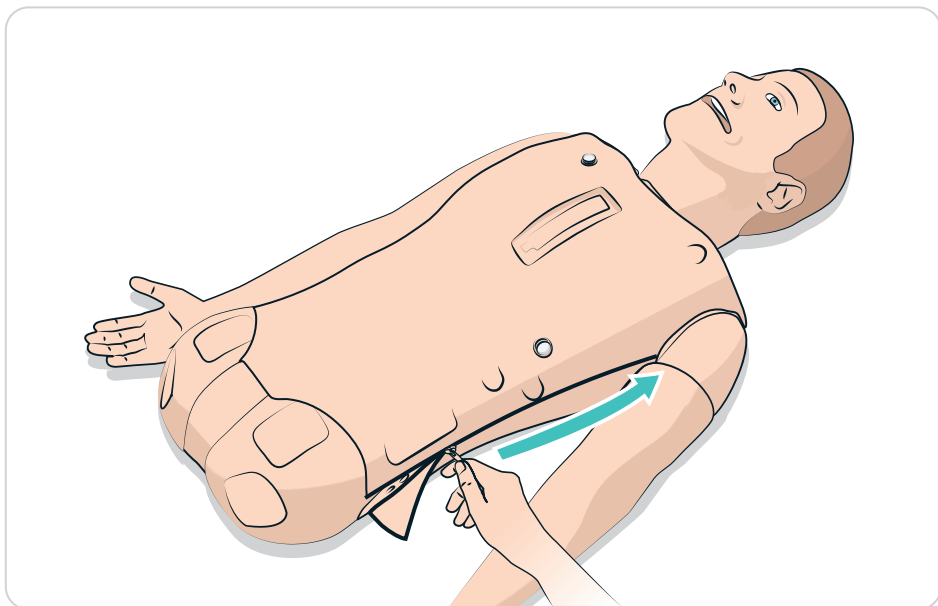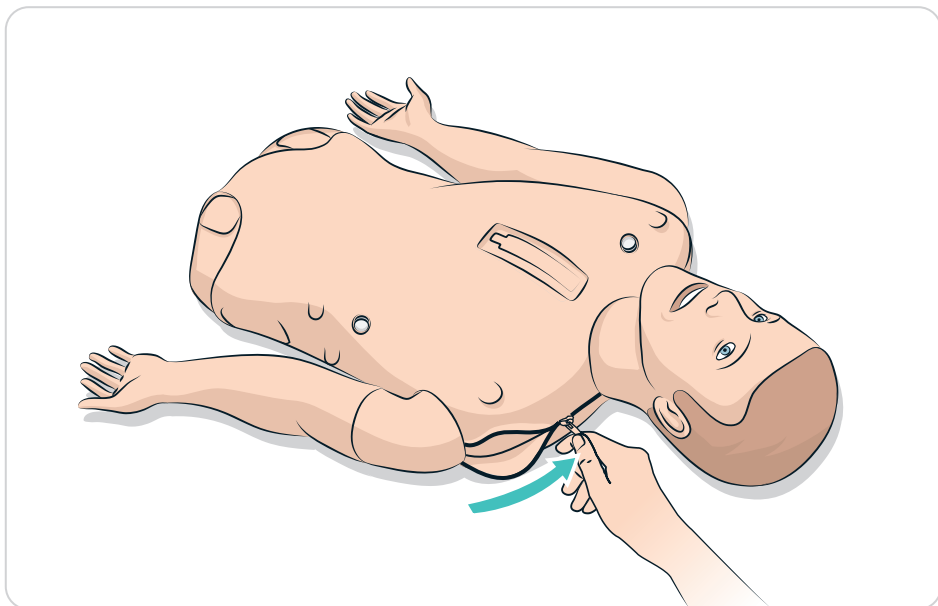


Conectar A Bateria

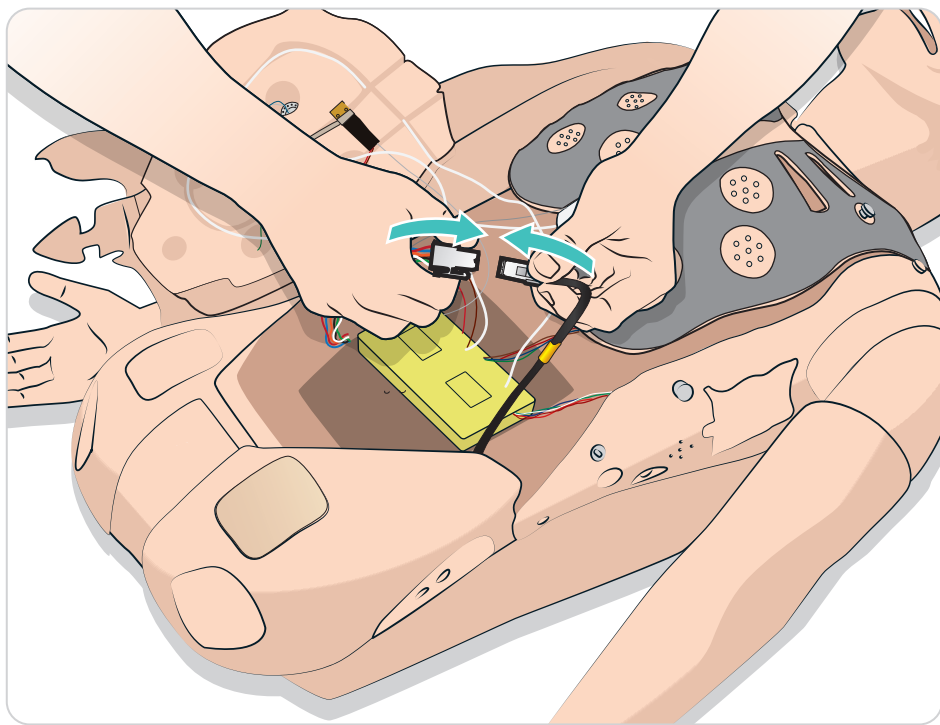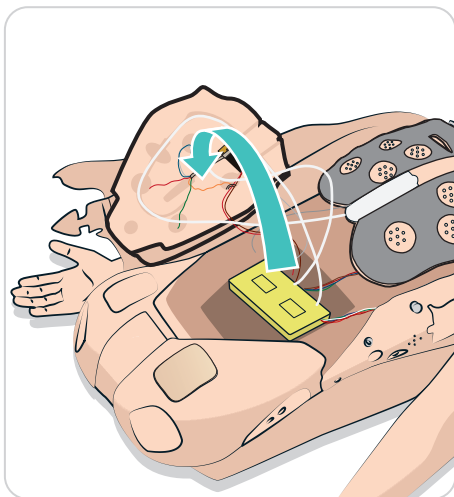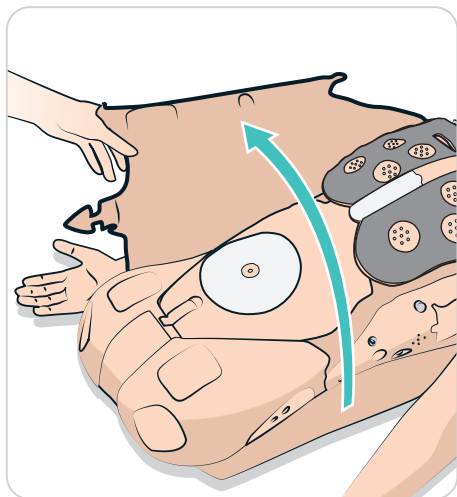




Carregar A Bateria

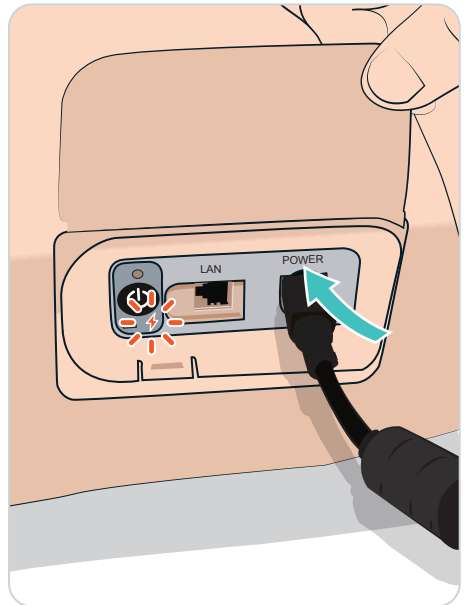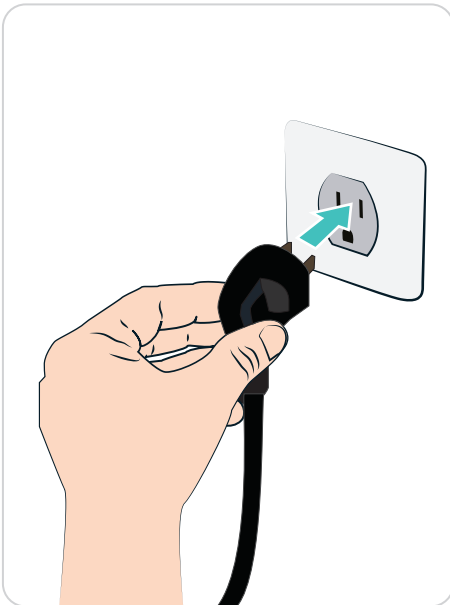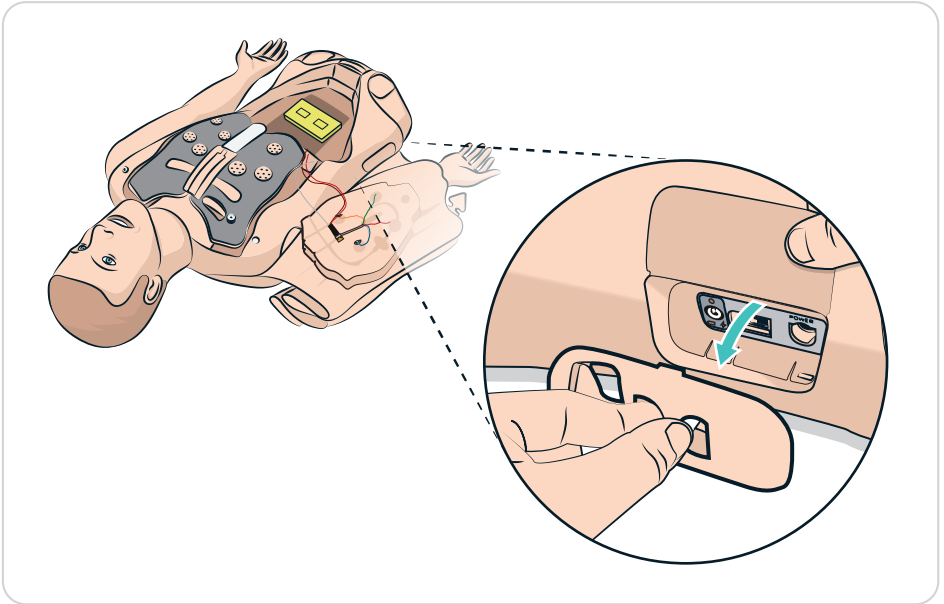


Acoplar A Perna Esquerda

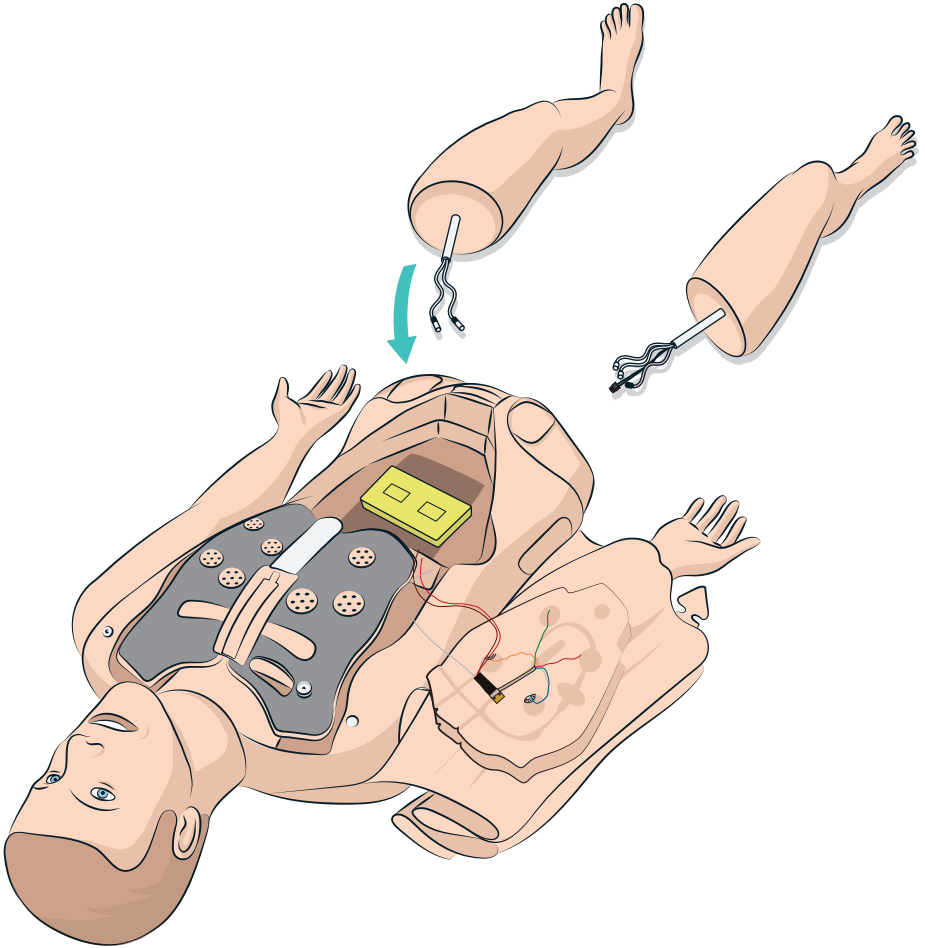




Acoplar A Perna Esquerda

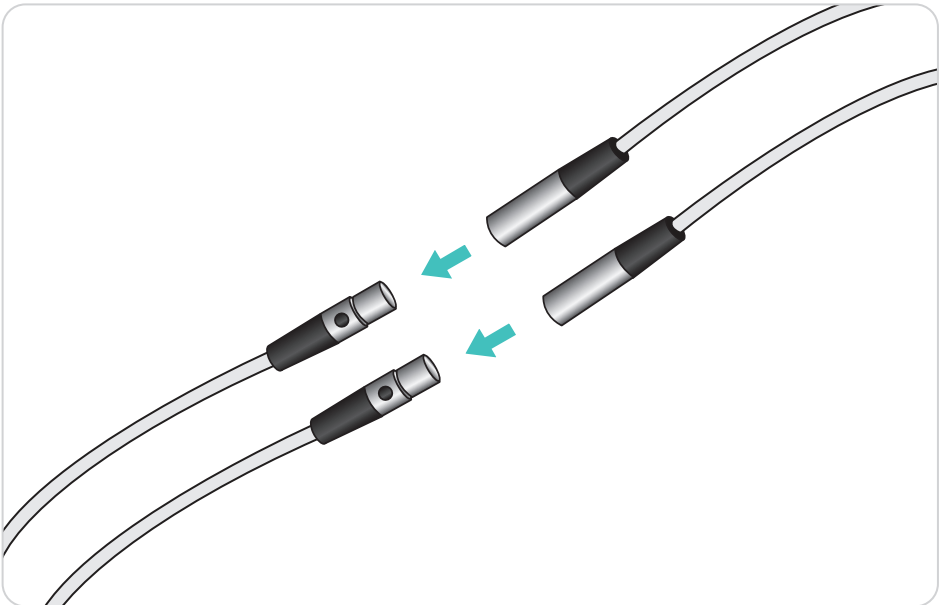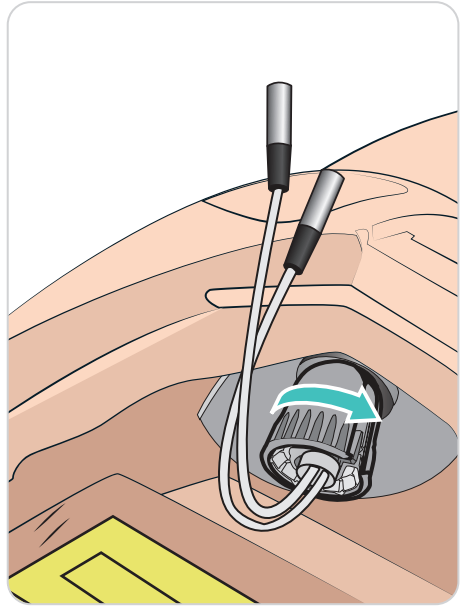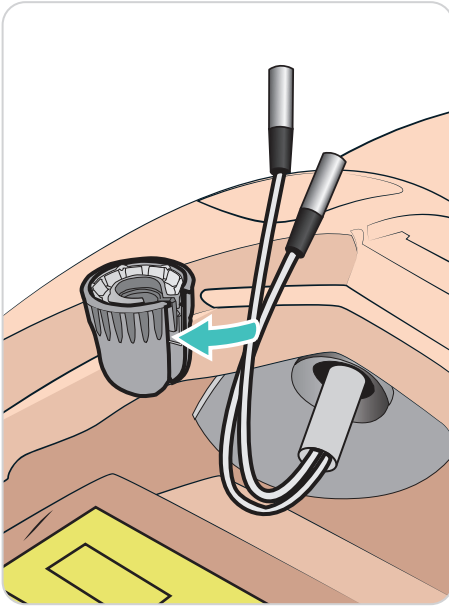

Acoplar A Perna Direita

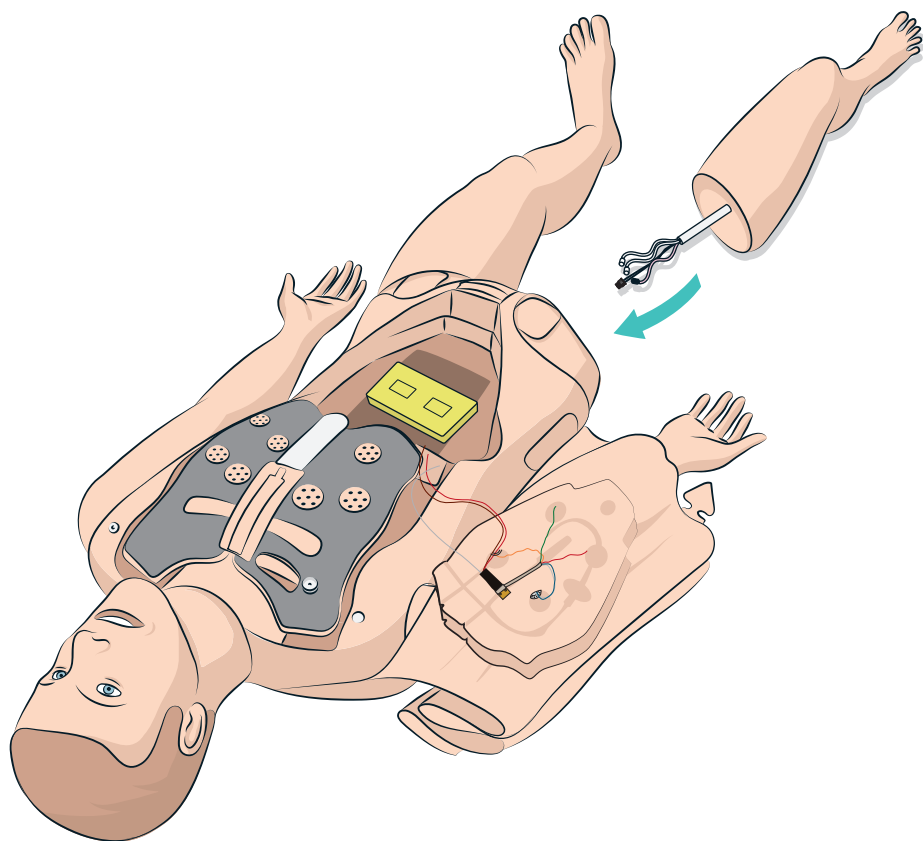

Acoplar A Perna Direita

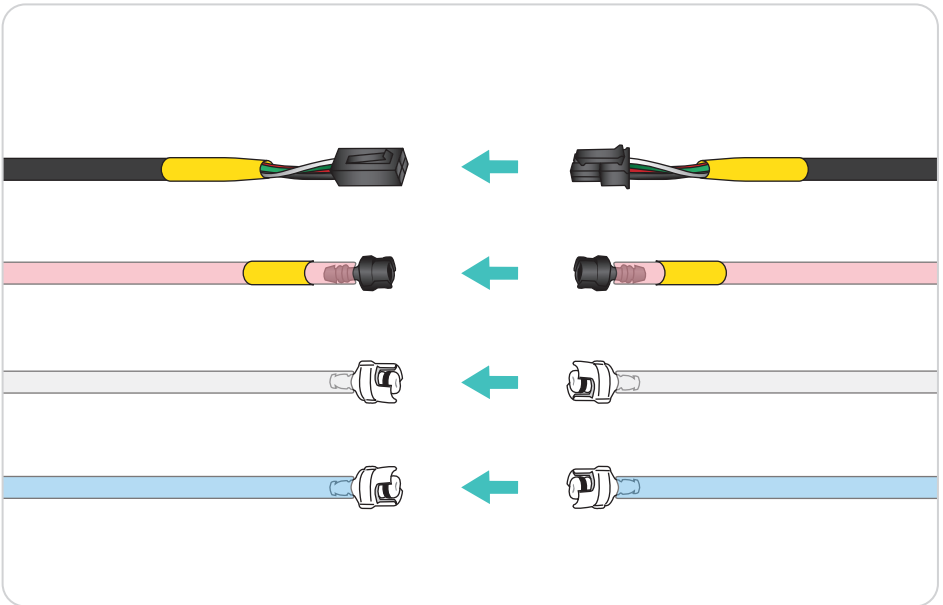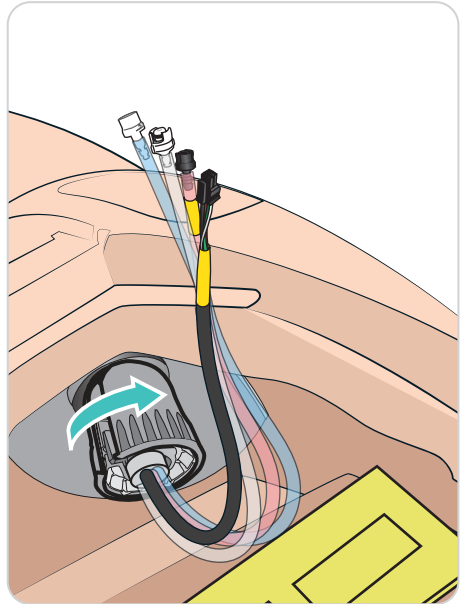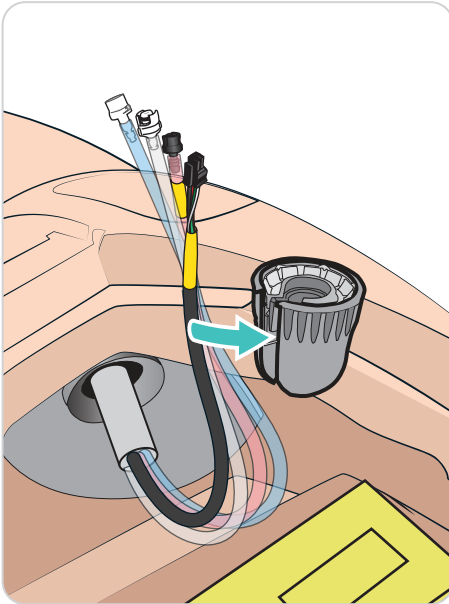


Configuração Sem Fio


Fone de ouvido




PC do instrutor

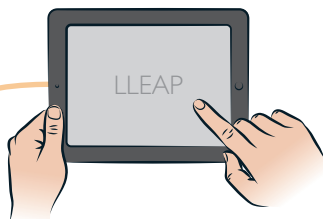

SpO₂

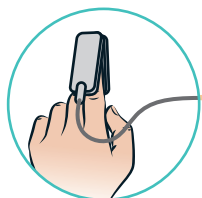


Monitor do paciente

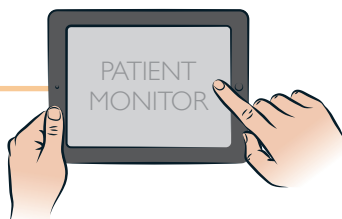

Cabo USB 

Configuração Com Fio

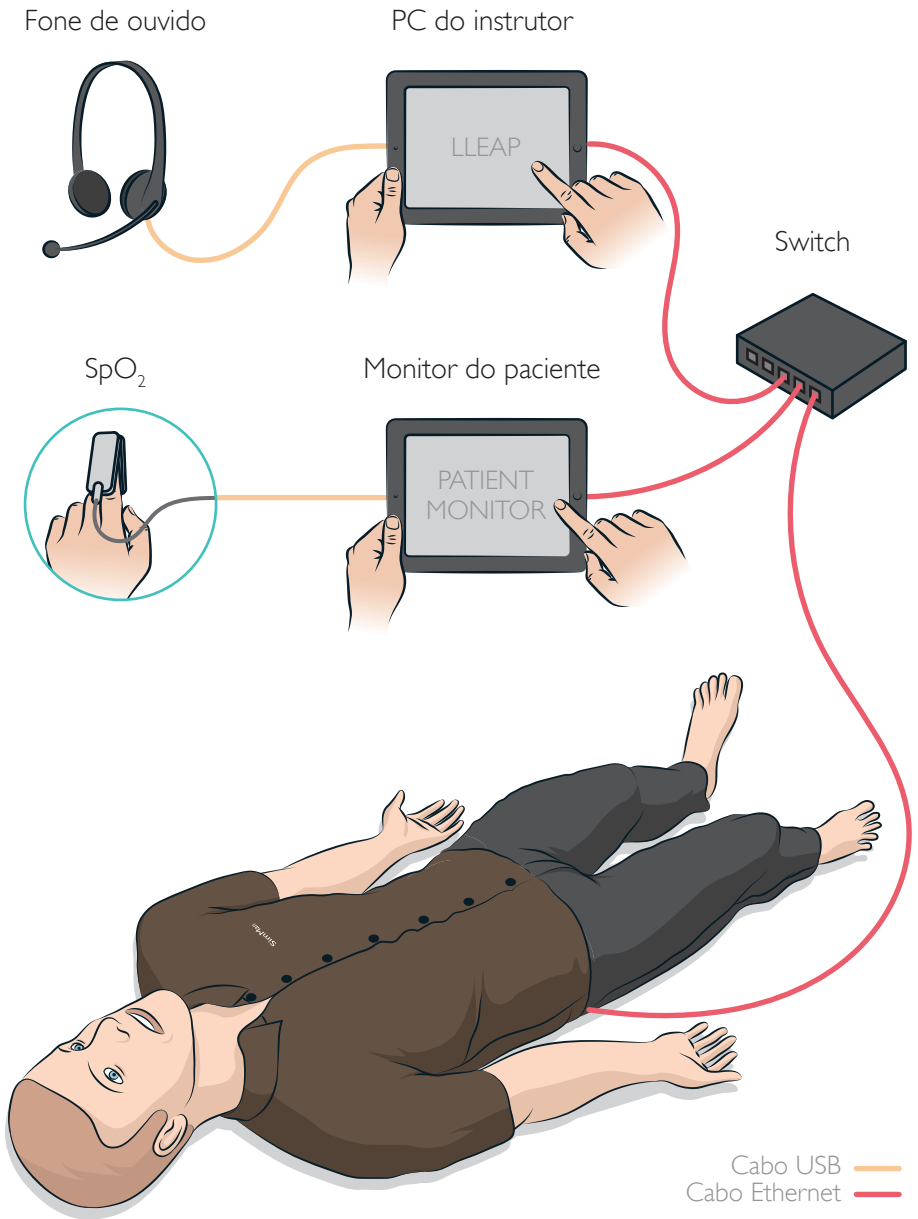

© 2023 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufacturer: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

20-08141 Rev E

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives