

# SimMan 3G Trauma

Schnellanleitung






Diese Schnellanleitung beschreibt, wie der SimMan-Patientensimulator aufgebaut und gestartet wird. Informationen über die Verwendung des SimMan-Modells finden Sie in den Dateien der LLEAP-Hilfe sowie im Benutzerhandbuch zu SimMan.

Unter [www.laerdal.com/download](http://www.laerdal.com/download) können Sie das aktuelle Benutzerhandbuch und die Software herunterladen.

# Lieferumfang und Lagerung


---

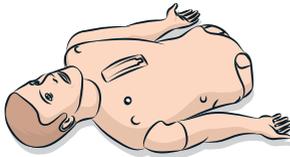


Torso



Beine

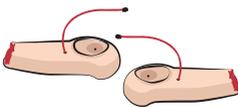

Amputationsarme

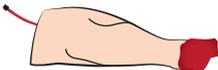


Amputationsbeinhaut rechts



Amputationsbein links



Kleidung

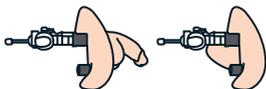

Männliche und weibliche  
Genitalien



Benutzerhandbuch &  
Wichtige Produktinformationen



Defib. EKG-Spanner



EKG-Anschlusselektrode




Rundring für Lungencompliance  
x 10



Nachfüllflaschen für  
Flüssigkeit und Blut



Wundkit

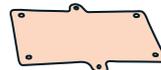

Pleura zur Thoraxdrainage  
x 6

# Lieferumfang und Lagerung


---



Blutkonzentrat



Talkumpuder

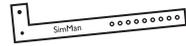

Patientenarmband



Gleitmittel für Atemwege




Schlauchklemme



SpO<sub>2</sub>-Sonde



Blutdruckmanschette

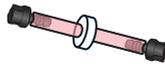

Inline-Filter, Blut  
x 2



Tools



IV-Beutel



IM-Schaumstoffpads  
für das Bein



Externes Netzgerät



Hals-/Nackenhaut  
x 3



Pneumothorax



Tibia-Pads & Knochen  
x 3



Krikothyroidband



IM-Pads



Montageteile



Sternum-IO-Pads & Knochen  
x 4




SimMan Armadapters


# Pc-Akkus Laden

---

Patientenmonitor


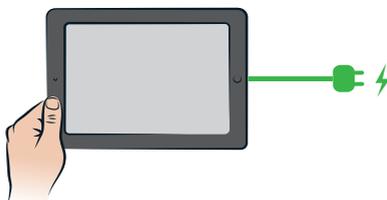


Ausbilder-PC

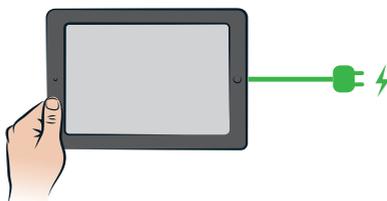




# Reißverschluss der Torsohaut Öffnen




---

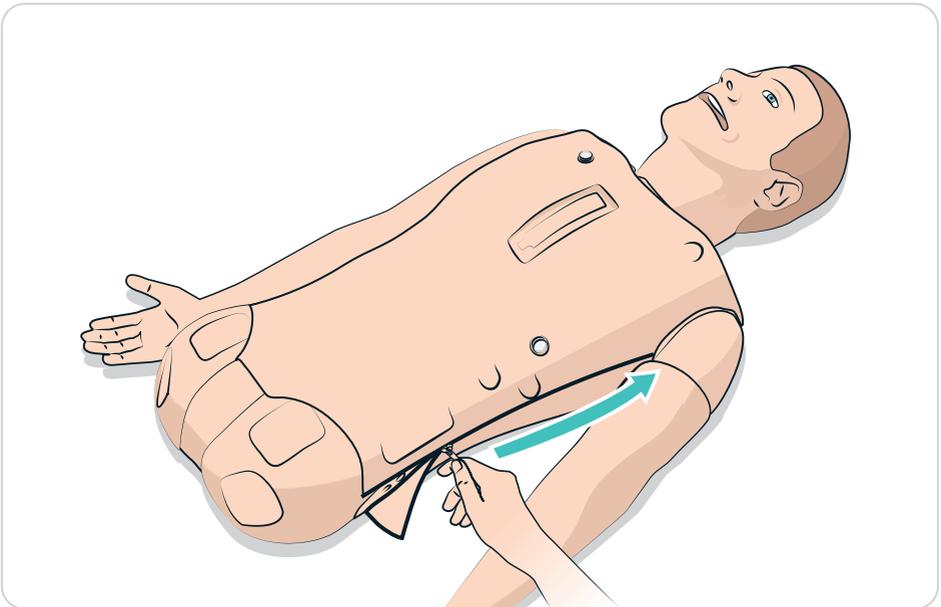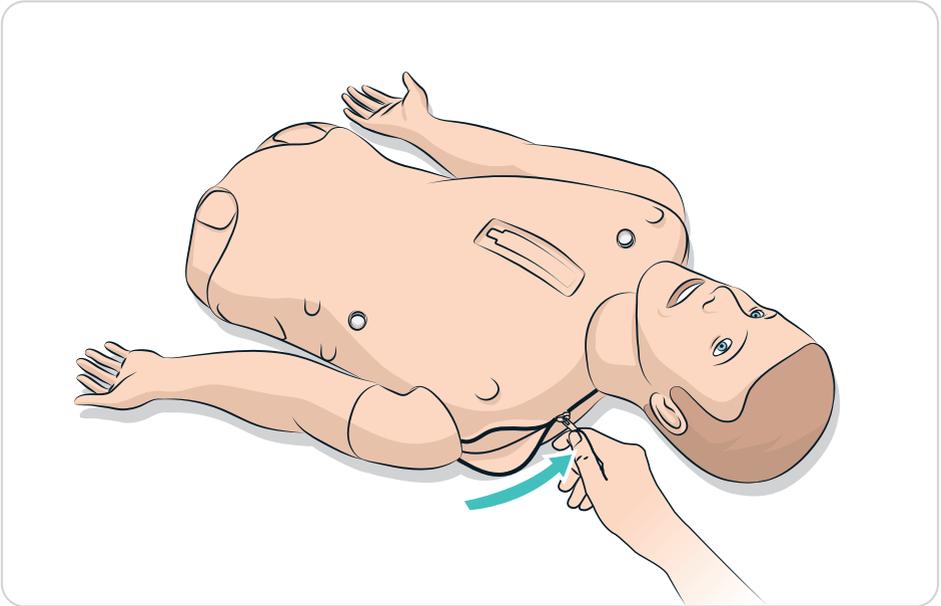

# Akku Anschließen


---

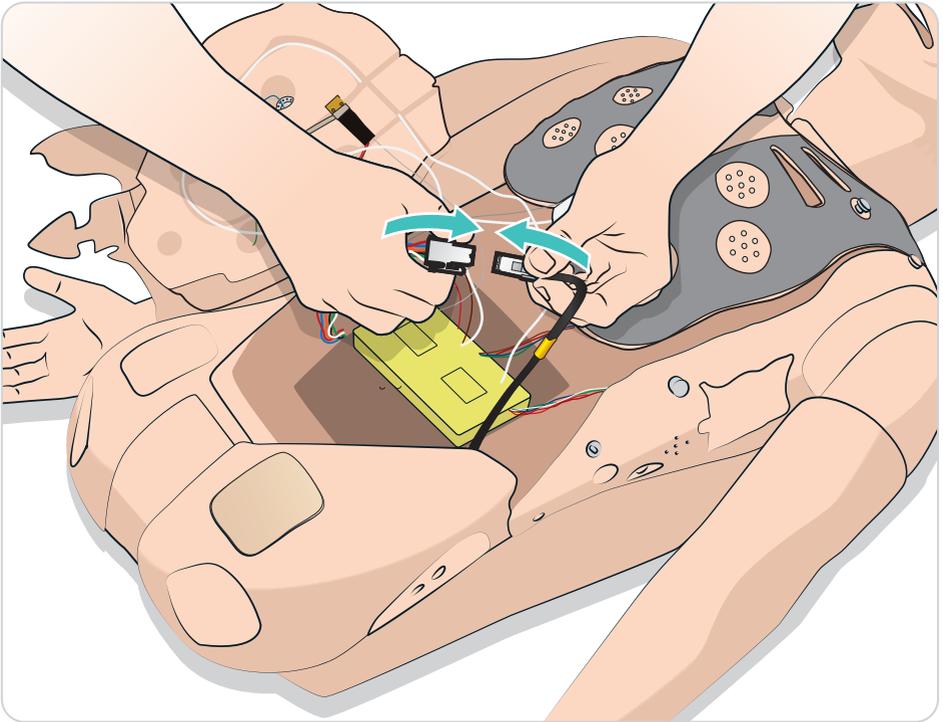
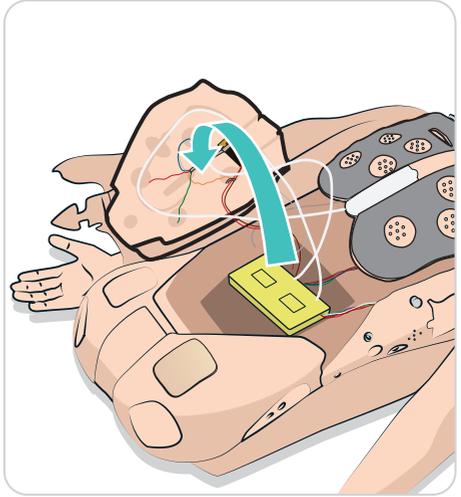
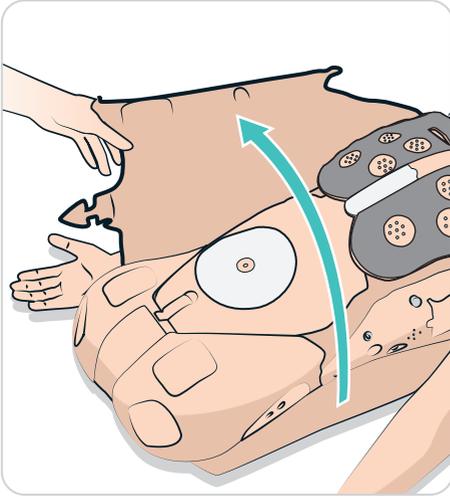


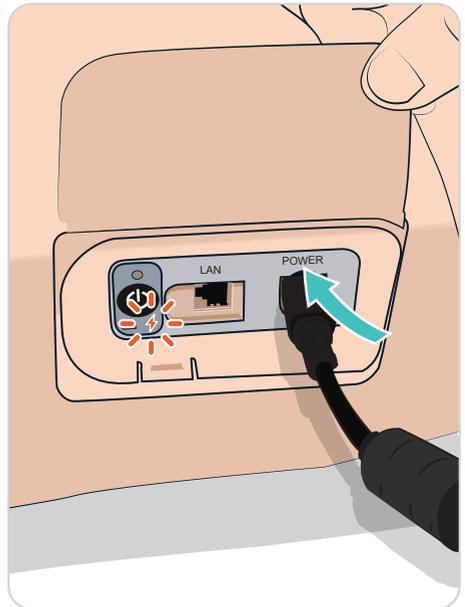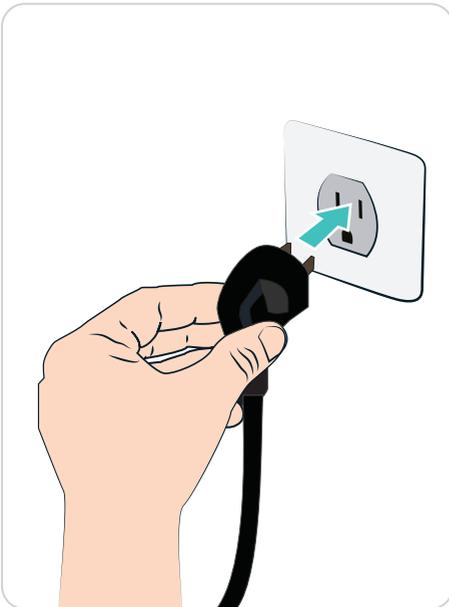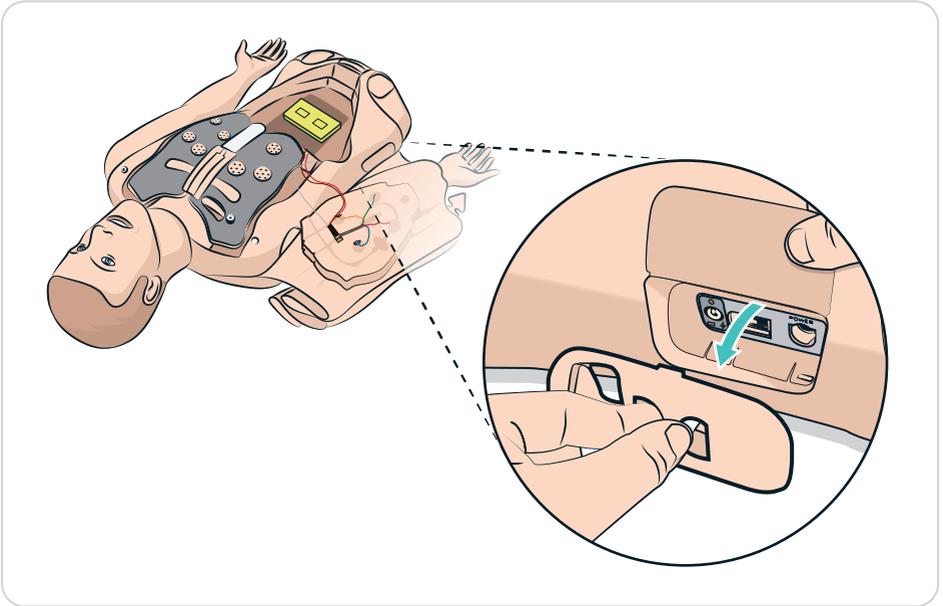

# Linkes Bein Anbringen


---

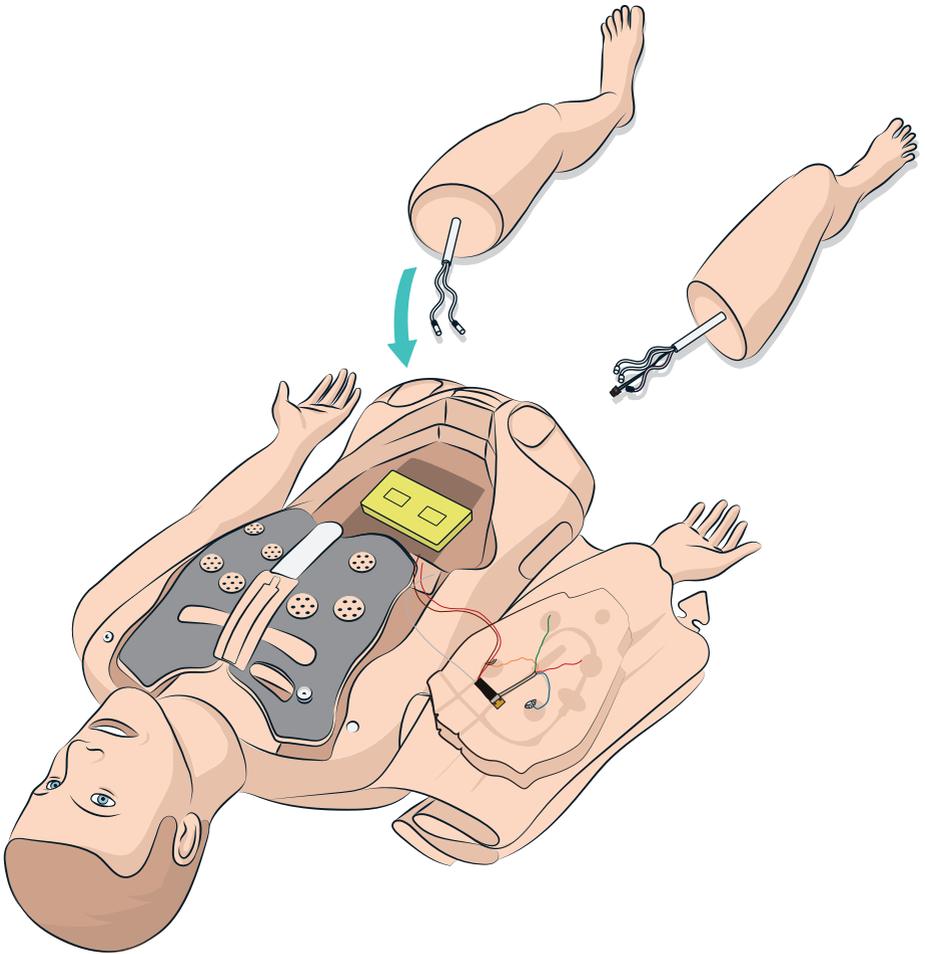

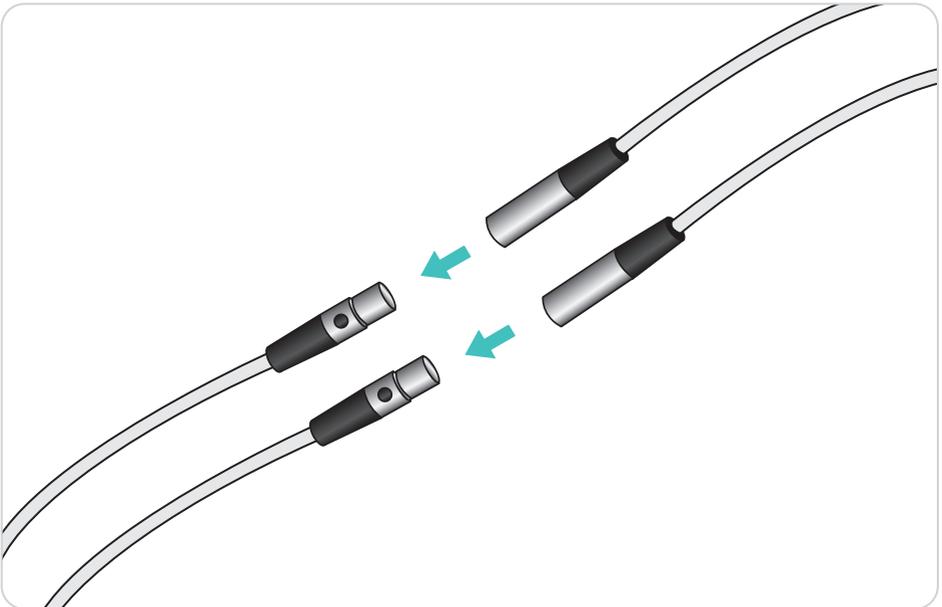
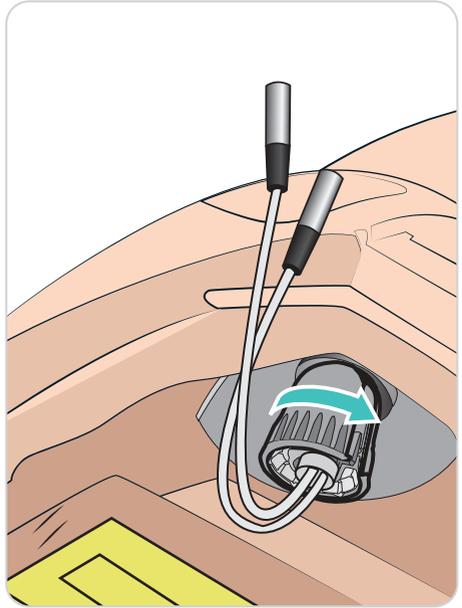
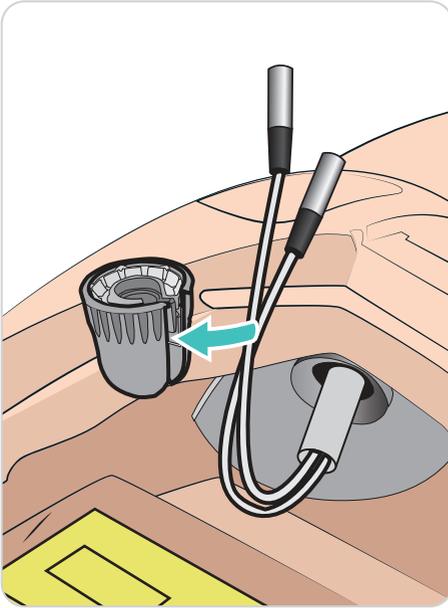


# Rechtes Bein Anbringen

---

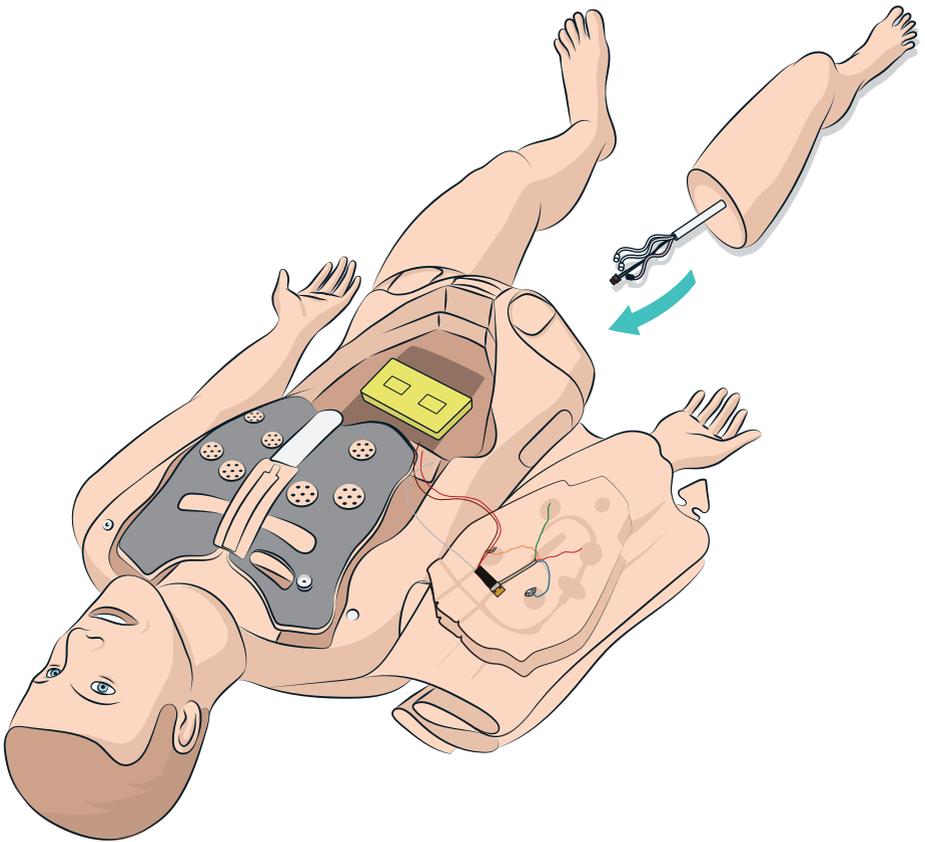

# Rechtes Bein Anbringen

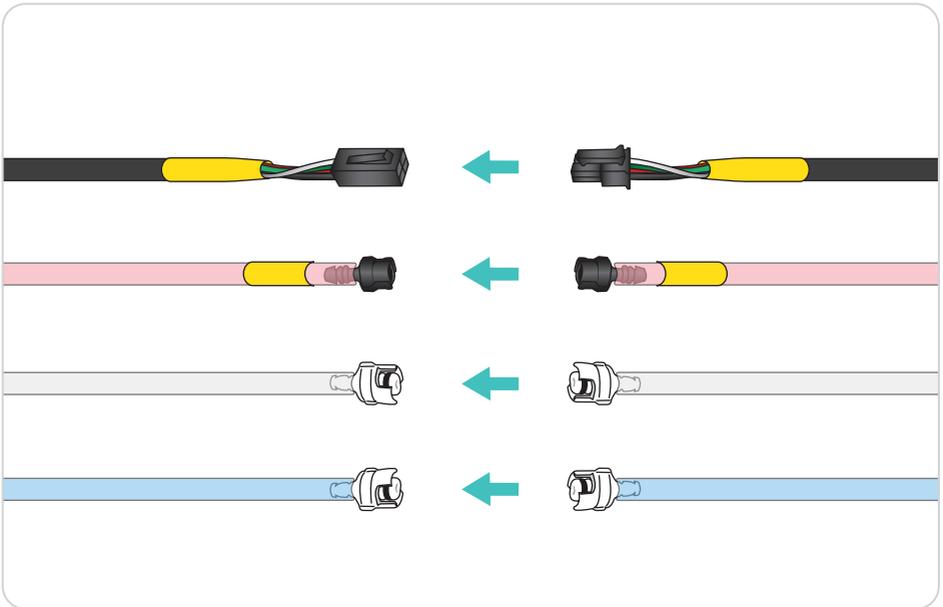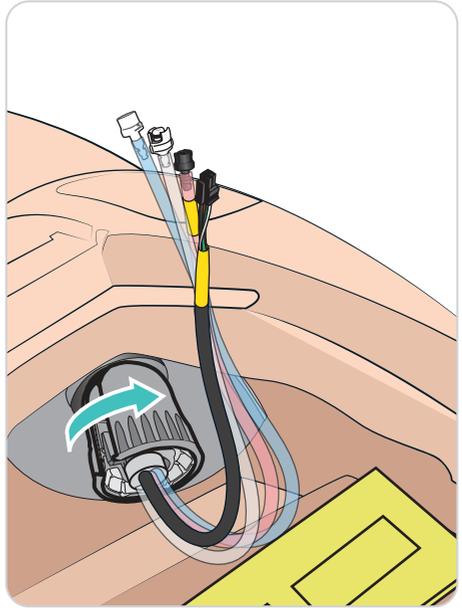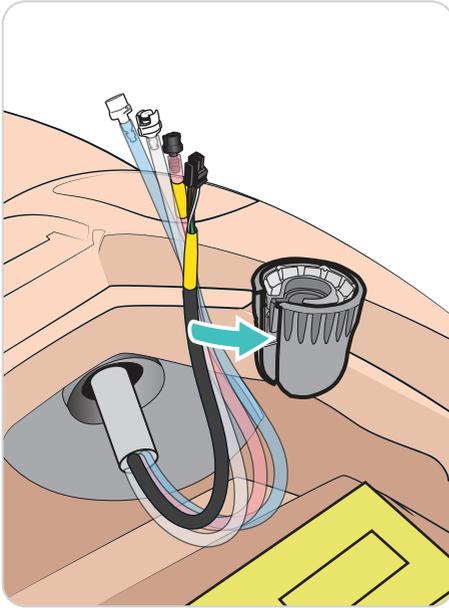

# Drahtlose Einrichtung

---

Headset




Ausbilder-PC



SpO<sub>2</sub>




Patientenmonitor

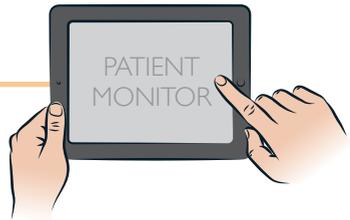

USB-Kabel 

# Drahtgebundene Einrichtung

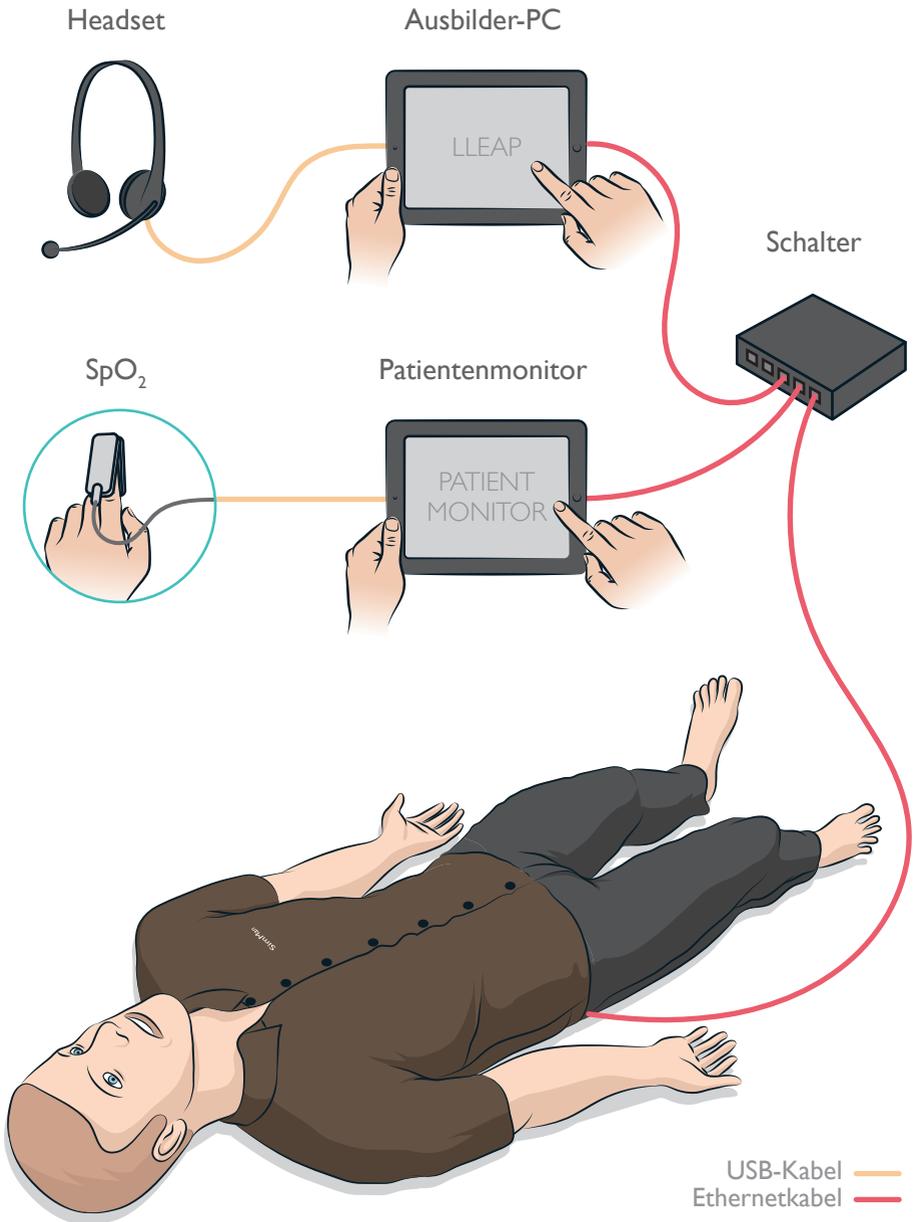

© 2023 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufacturer: Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

20-08139 Rev E

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives