


SimMan 3G Trauma


Guide de configuration rapide

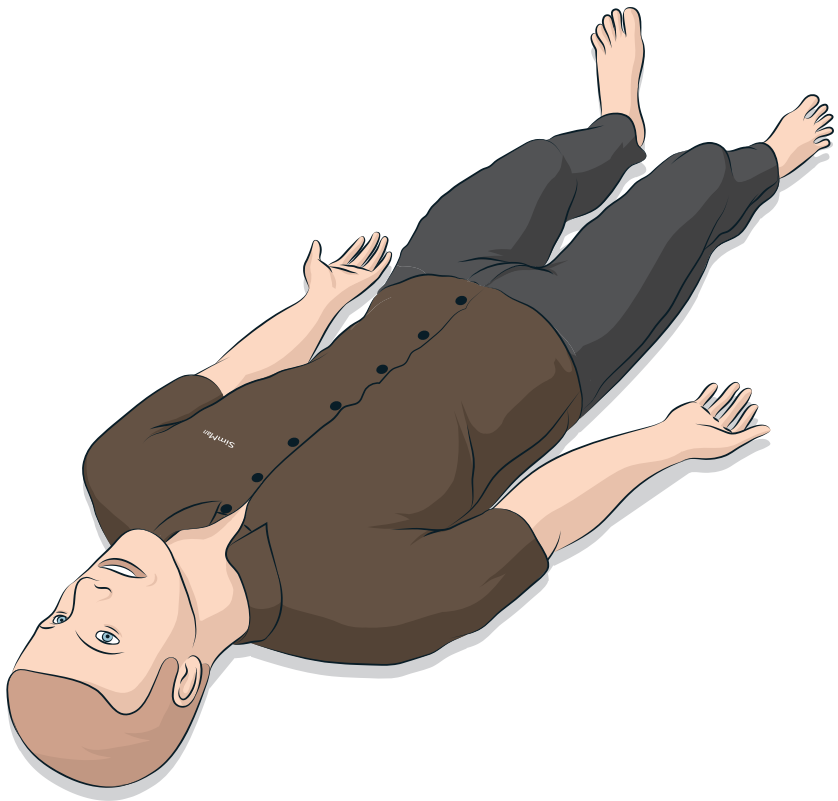


Ce guide de configuration rapide décrit l'assemblage et la configuration de votre simulateur patient SimMan. Pour plus d'informations sur le mode d'utilisation de SimMan, consultez les fichiers d'aide LLEAP et le mode d'emploi SimMan.

Consultez www.laerdal.com/download pour télécharger les dernières versions du mode d'emploi et du logiciel.


Éléments inclus

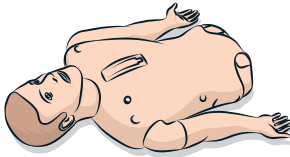


Tronc

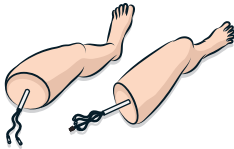


Jambes

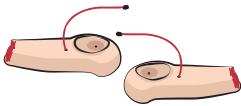


Bras amputés

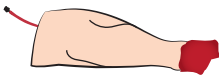


Peau de jambe droite amputée

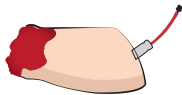

Jambe gauche amputée

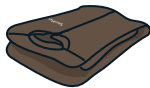

Vêtements

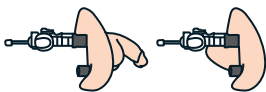

Organes génitaux masculins et féminins



Mode d'emploi et informations importantes sur le produit



Tendeur pour ECG défib.



Adaptateurs pour électrode d'ECG




Joint torique pour compliance pulmonaire x 10



Unités de recharge en liquides et sang



Module de plaies

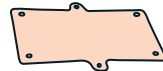

Plèvre pour module de drain thoracique x 6

Éléments inclus



Faux-sang concentré



Talc



Bracelet d'identification



Lubrifiant pour voies respiratoires




Pince



Sonde de SpO₂



Brassard de prise de tension artérielle

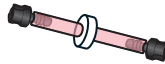

Filtre d'intraveineuse, sang x 2



Outils



Poche IV




Coussinets en mousse IM pour jambe



Alimentation externe



Peau du cou x 3

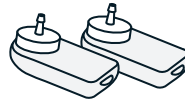

Pneumothorax




Coussinets et os du tibia x 3



Membrane thyroïdienne



Coussinets IM

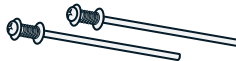

Matériel de montage




Coussinets intra-osseux et os du sternum x 4




Adaptateur de bras SimMan

Chargement Des Batteries Du Pc



Moniteur patient

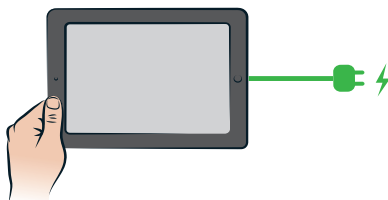




PC du formateur

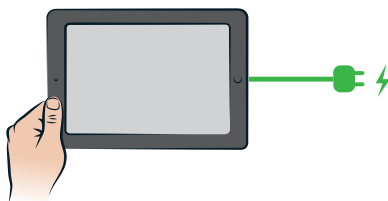




Ouverture De La Fermeture À Glissière De La Peau Du Torse

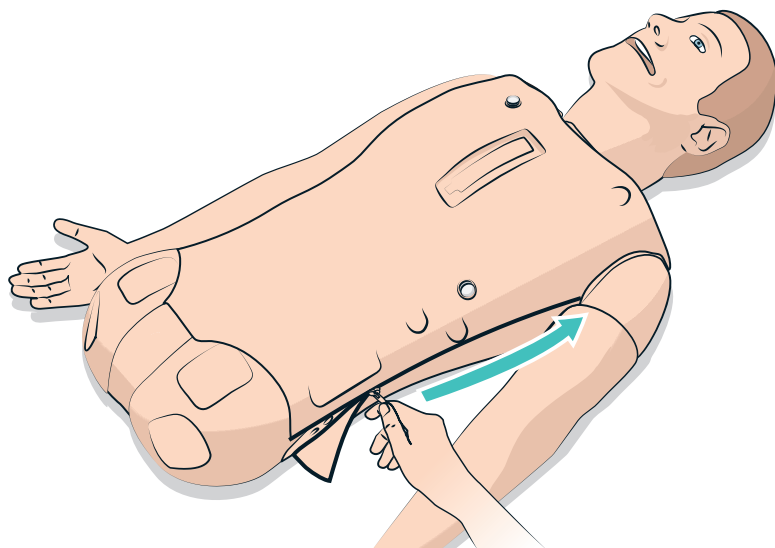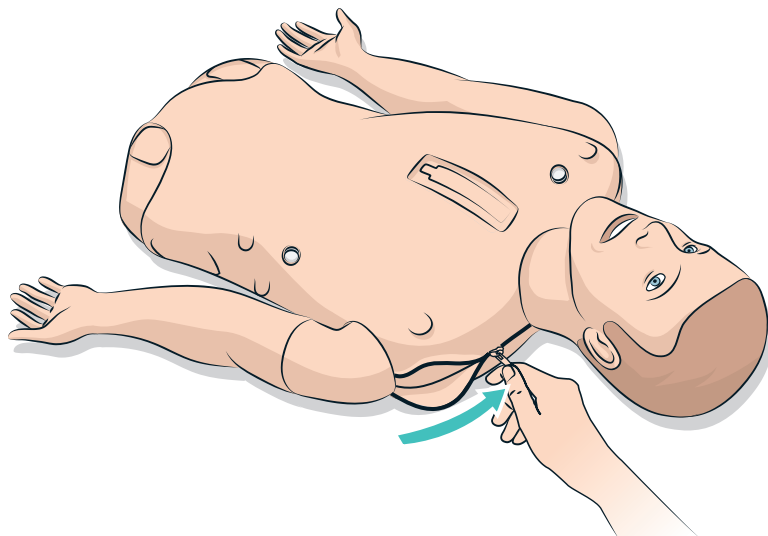


Branchement De La Batterie

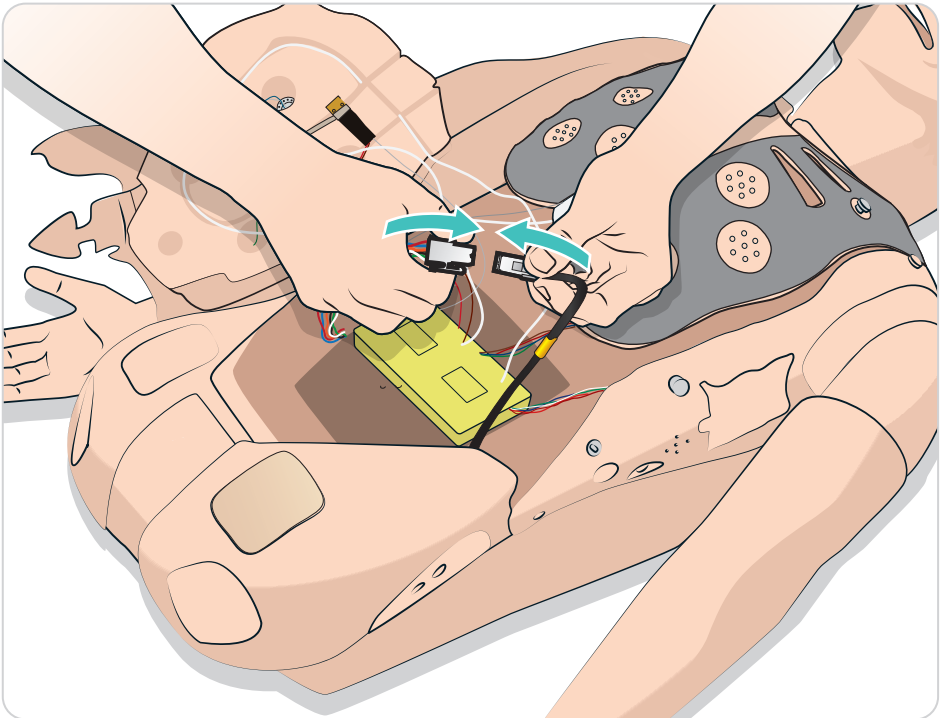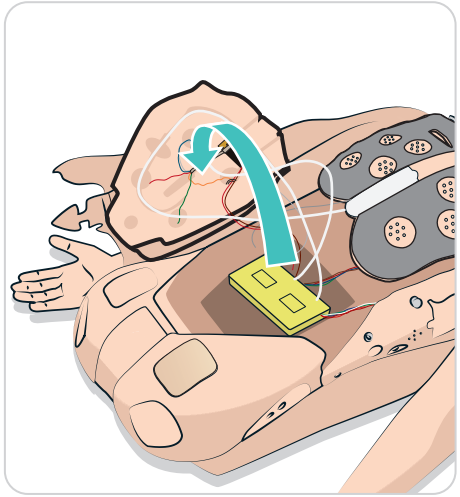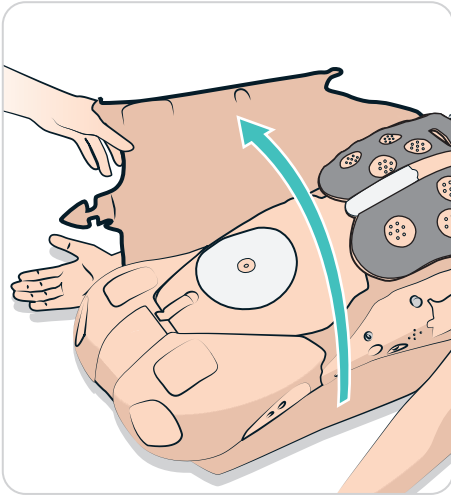




Chargement De La Batterie

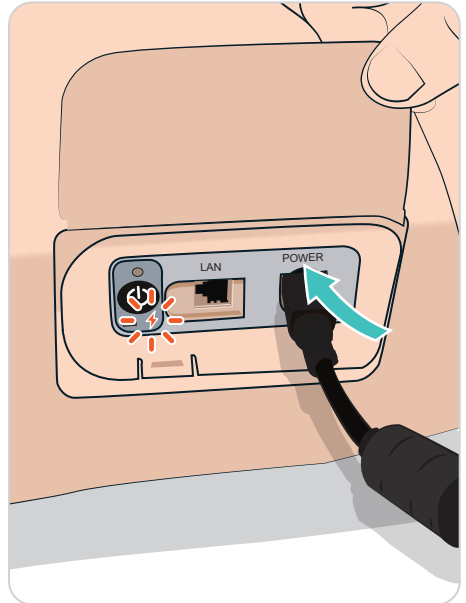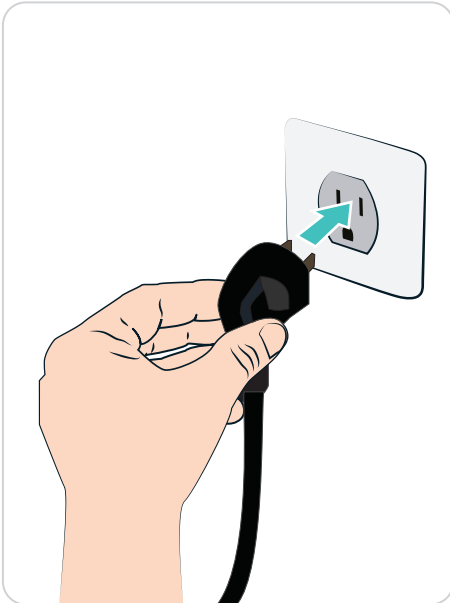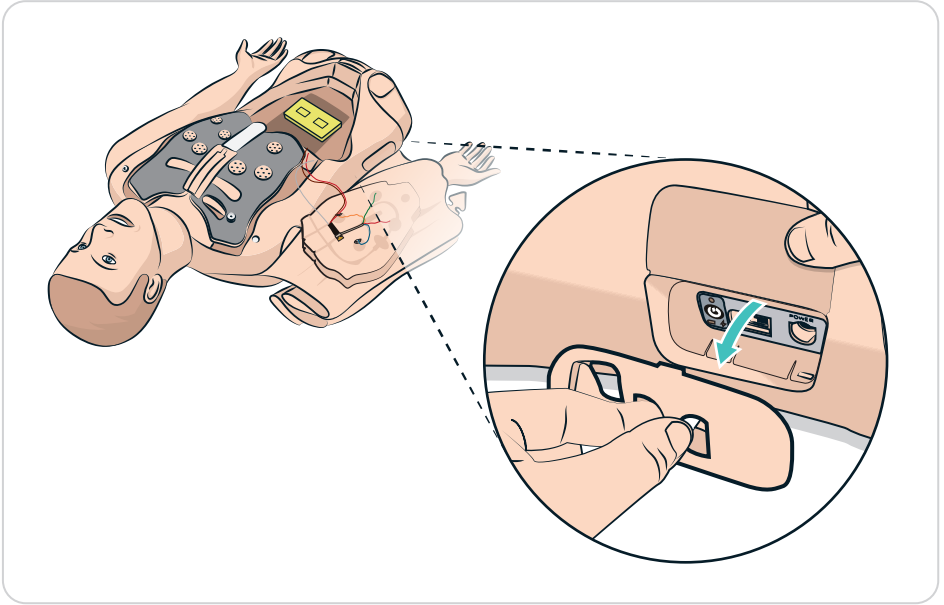


Fixation De La Jambe Gauche

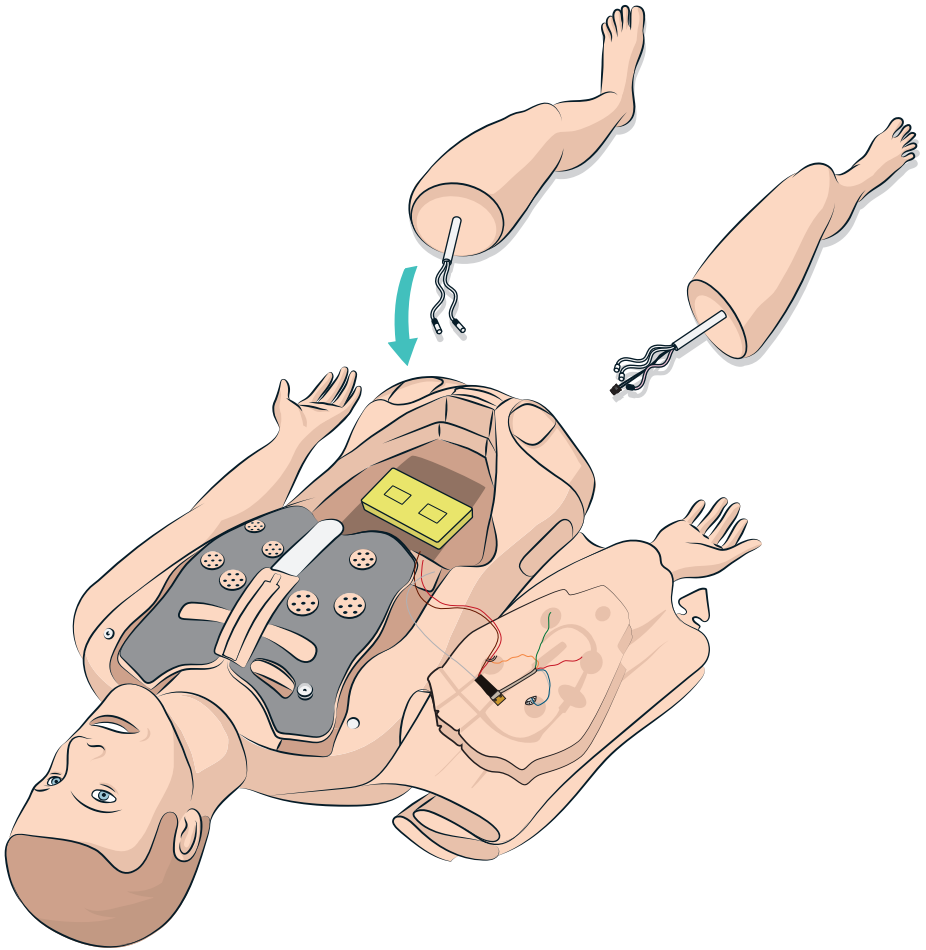




Fixation De La Jambe Gauche

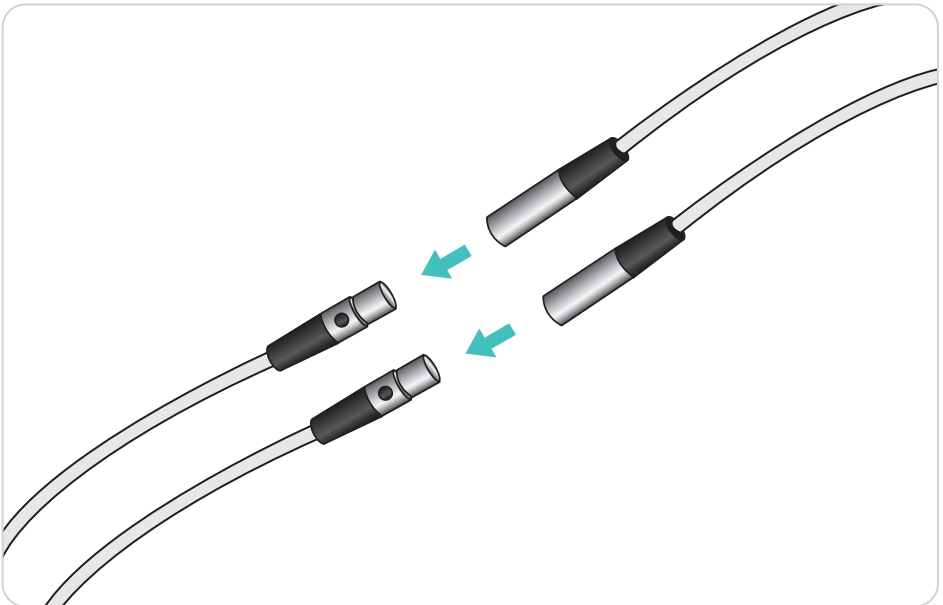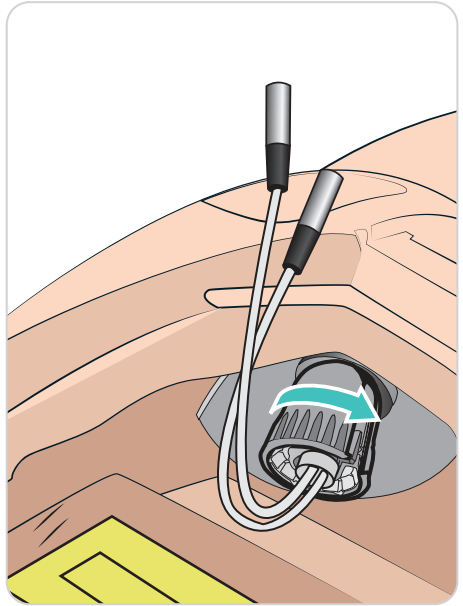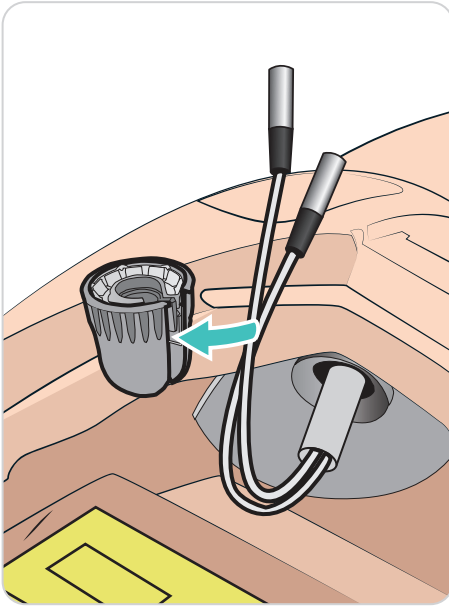

Fixation De La Jambe Droite

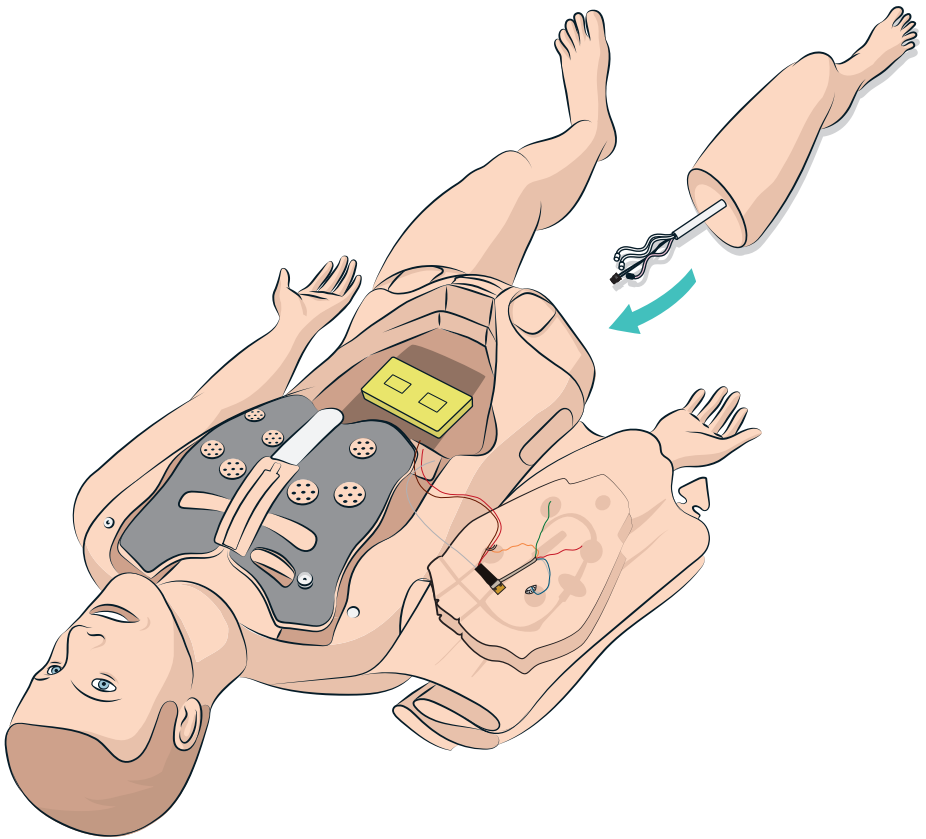

Fixation De La Jambe Droite

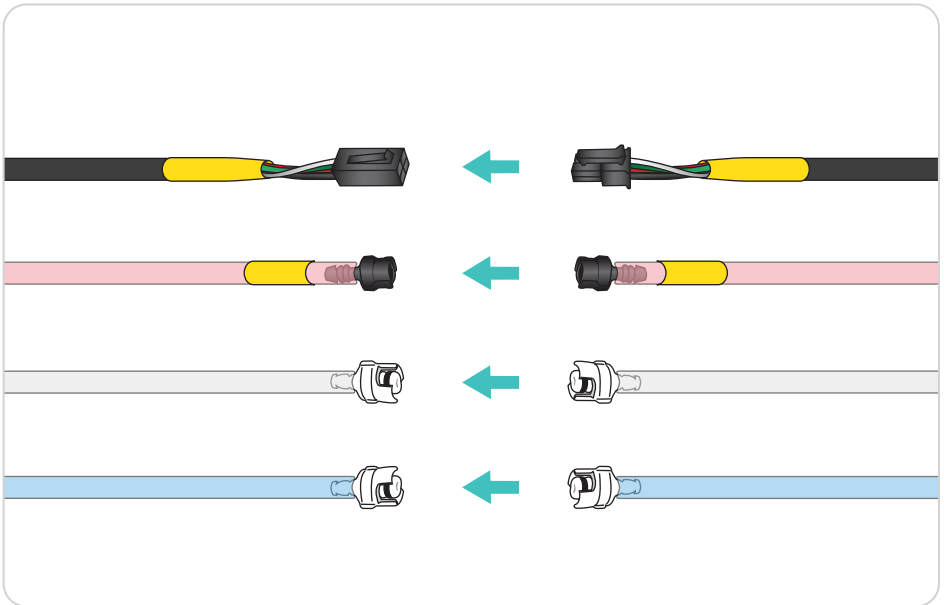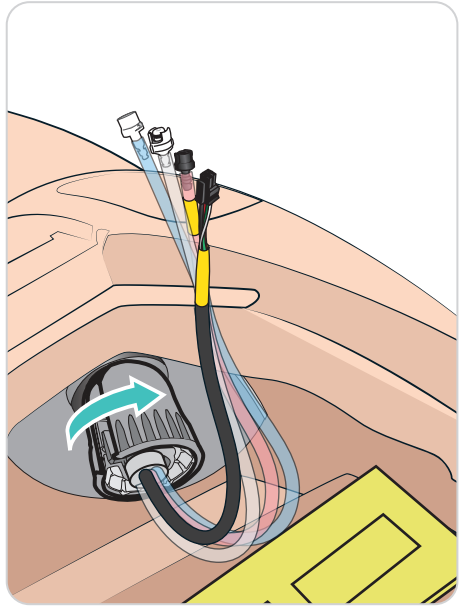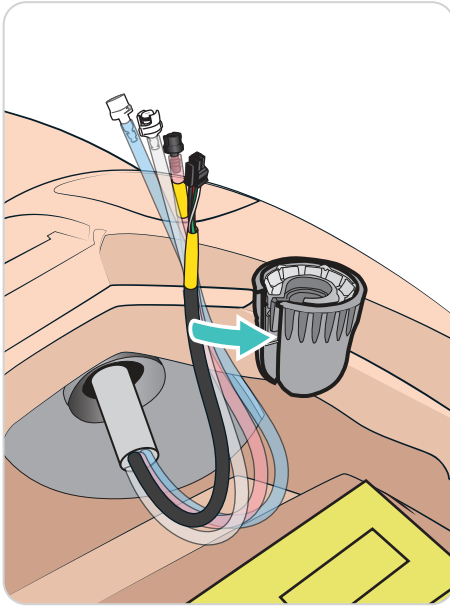


Configuration Sans Fil

Casque




PC du formateur

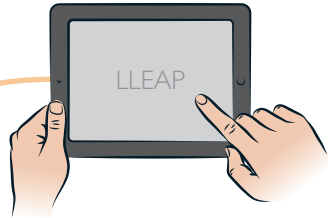

SpO₂




Moniteur patient

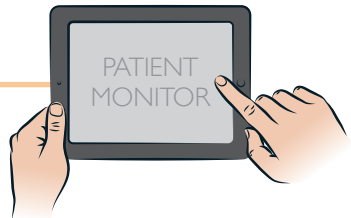

Câble USB 

Configuration Avec Câble

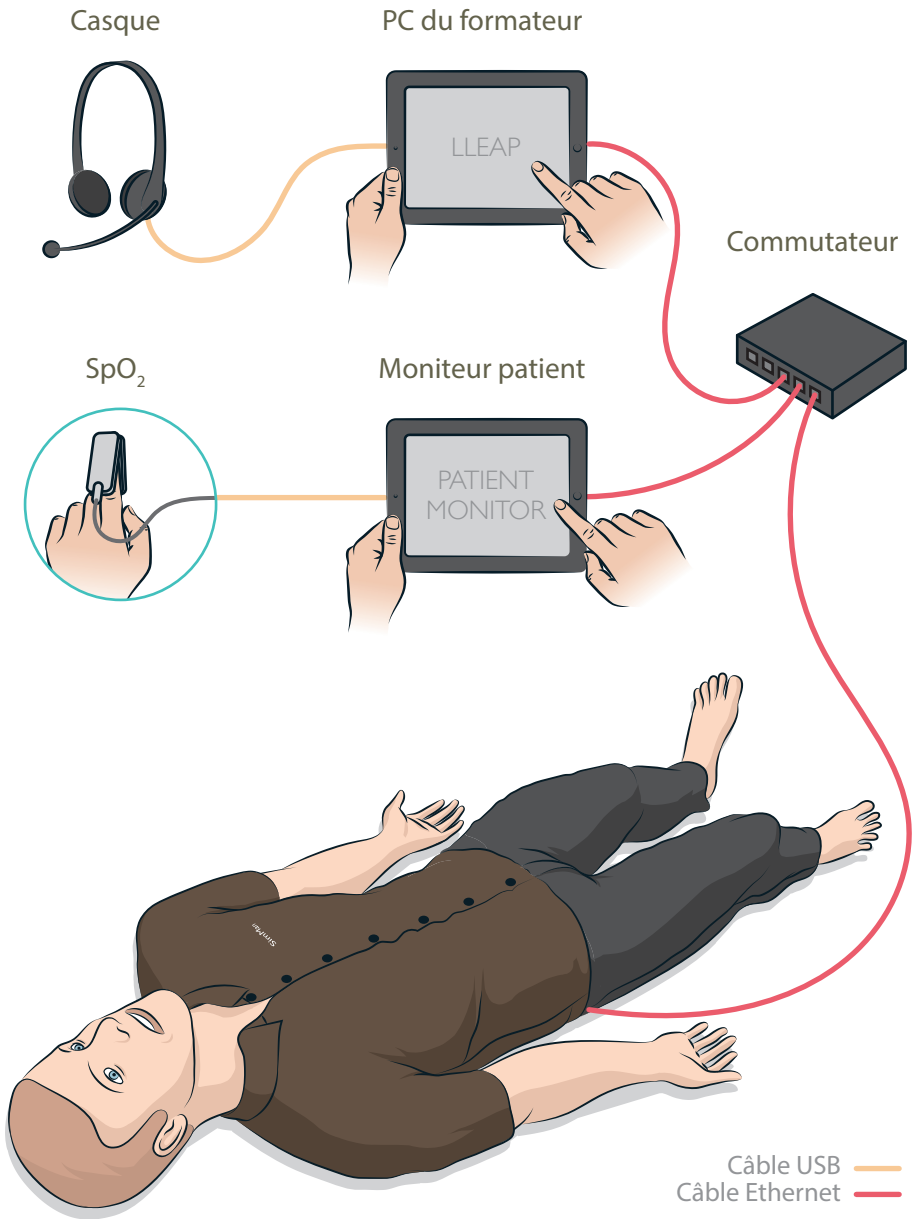

© 2023 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufacturer: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

20-08138 Rev D

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives