



**Laerdal**  
helping save lives

## シミュレータ WiFi 接続マニュアル



レールダル メディカル ジャパン株式会社


## Step 1

### PCの電源を入れる

- ① ヘッドセット、WEB カメラを PC に接続する
  - Instructor PC に ———— ヘッドセットを接続する
  - Patient Monitor PC に ———— WEB カメラ  
SpO2 プローブを接続する

### 重要

PC の電源を入れる際は事前にシミュレータ本体側の「咳・呼吸音」、「WiFi ランプ点灯」を確認する

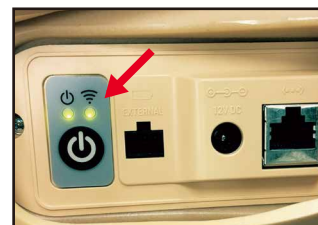

- ② Instructor PC および Patient Monitor PC の電源を入れる




※SimPad PLUS をご利用の方は、ページ③の Step 1「SimPad PLUS の起動」をご参照ください。


## Step 2

### Patient Monitor PC のソフトウェア起動

- ① [Laerdal Simulation Home] をダブルクリックする

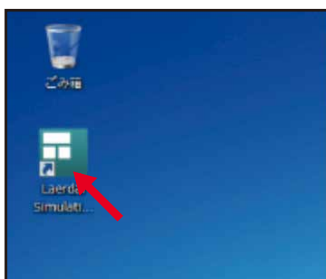

- ② 「Patient Monitor」をクリックする

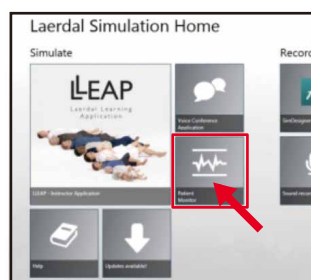

- ③ シミュレータを選択する




- ④ 「セッション開始」をクリックしてセッションを開始する



## Step 3

### Instructor PC のソフトウェア起動

- ① 「Laerdal Simulation Home」 をダブルクリックする

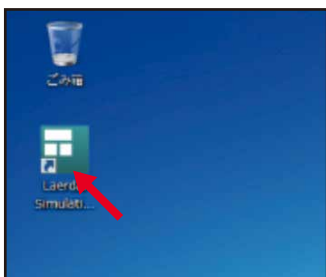

- ② 「LLEAP」 をクリックする




- ③ シミュレータを選択する




- ④ ディブリーフシステムを選択する  
※「コンピュータ側」でない方を選択




- ⑤ プロファイルを選択する  
※「国際ユーザー設定」を選択

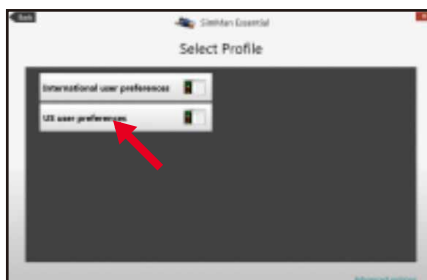

- ⑥ モードを選択する

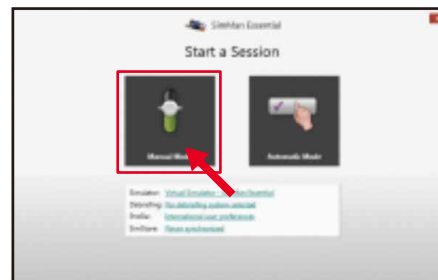

- ⑦ 「Healthy Patient」を選択する

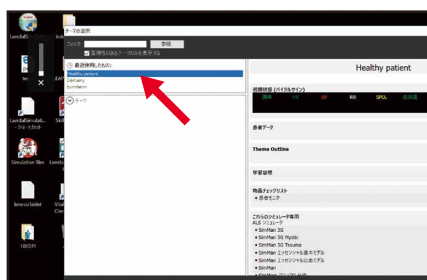

# PC 起動方法（レサシアンシミュレーターの例） — 1/2

## Step 1

### SimPad PLUS の起動

※「Windows10」かつ「LLEAPのVerが6.1以下のPC」には、別途小型USB-WIFIアダプタが必要になります。

- ① シミュレータの電源を入れる  
※しばらくして、咳を発したら準備完了



- ② SimPad PLUS の電源を入れる



- ③ 「システム設定」  
→「シミュレータ」をタッチする



- ④ 「Resusci Anne Simulator」を選択する  
※選択後、「戻る」をタッチ



- ⑤ シミュレータの電源ランプを確認する  
※点滅から点灯に変わる



- ⑥ マニュアルモードをタッチする



次ページに続く ►

# PC 起動方法（レサシアンシミュレーターの例） — 2/2


## Step 2

### Patient Monitor PC のソフトウェア起動


① 「Patient Monitor」の電源を入れる




② 「Laerdal Simulation Home」をダブルクリックする

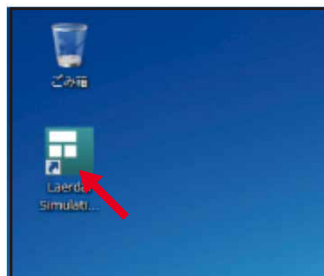

③ 「Patient Monitor」をクリックする

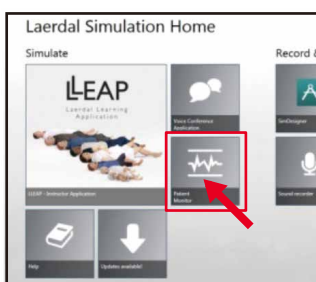

④ 「シミュレータ」を選択する

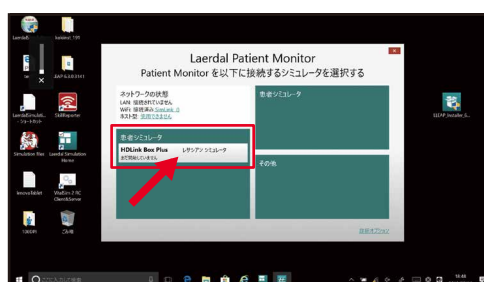


⑤ バイタル画面が表示される  
→「セッション開始」をクリックする



Auto Launch 機能を設定している場合は  
③、④は省略されます。

“接続ができませんでした” のメッセージが出た場合は  
「戻る」ボタンを押してください。

⑥ SimPad PLUSでセッション開始する

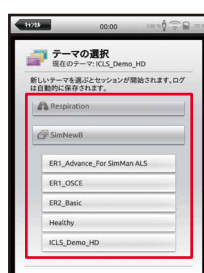

テーマを選び



「OK」をタッチし




スタートで開始

# WiFi 接続トラブルフローチャート


WiFi 接続不良の不具合があった場合は、以下のフローチャートに従ってご対応ください。

※Wi-Fiの無線干渉を防止するため、使用しないWi-Fiはできるだけ OFF にしてください。

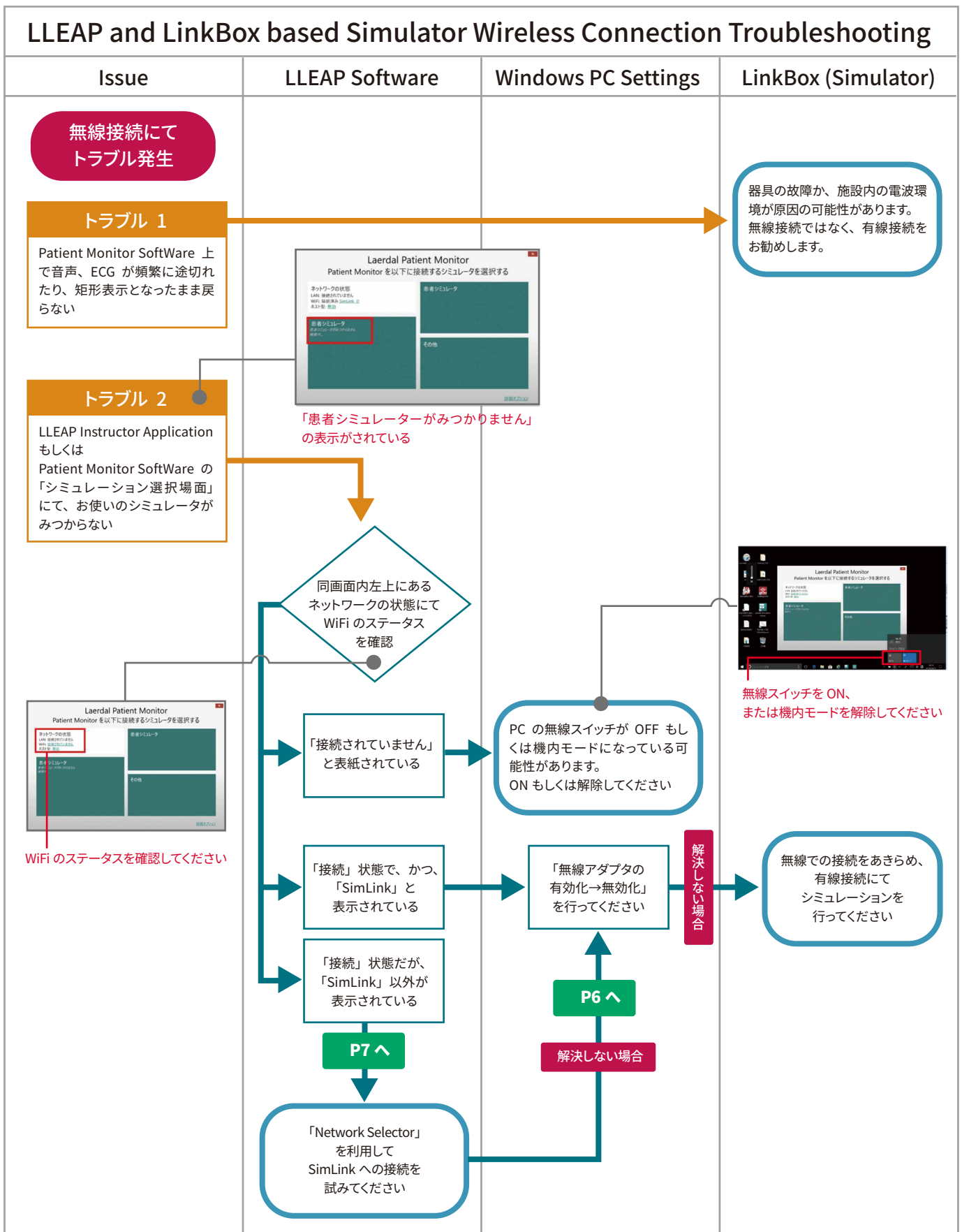


# WIFI のステータス — 「SimLink」あるいは「my-Simpad-net」と表示されている場合

- ① WIFI「接続済み」でかつ「SimLink」と表示されている

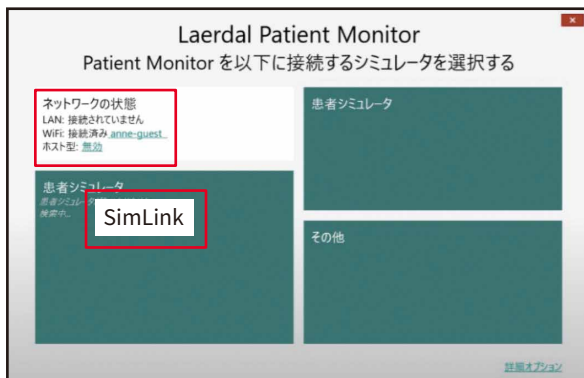


- ② 「無線アダプタの無効化」を「有効化」に設定する

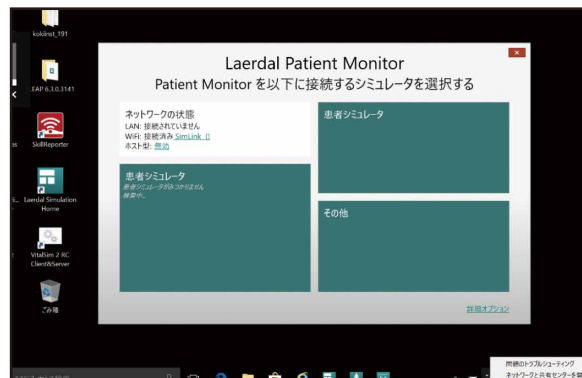


- ③ 右下の無線マークを右クリックし、「ネットワークと共有センターを開く」をクリックする



- ④ 「アダプターの設定の変更」をクリックする

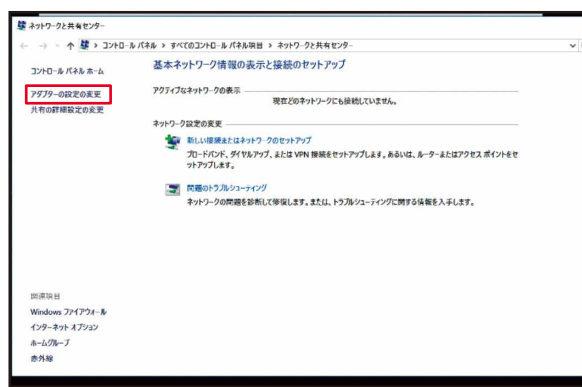

- ⑤ WIFI のアイコンを右クリックして、「無効にする」をクリックする

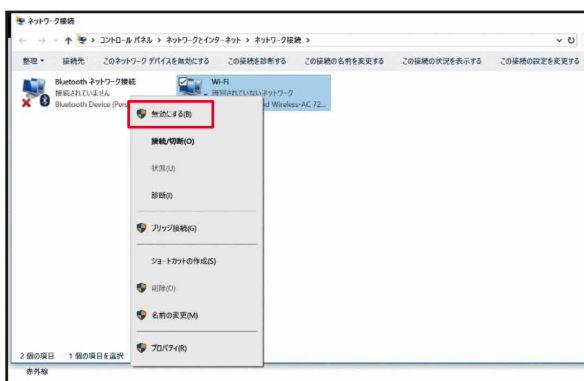


- ⑤ 同じ操作を行い、「有効にする」をクリックする




# WIFI のステータス — 「接続」状態だが「SimLink」以外が表示されている場合

1/2

- ① 「Network Selector」を利用して  
SimLink への接続を行う

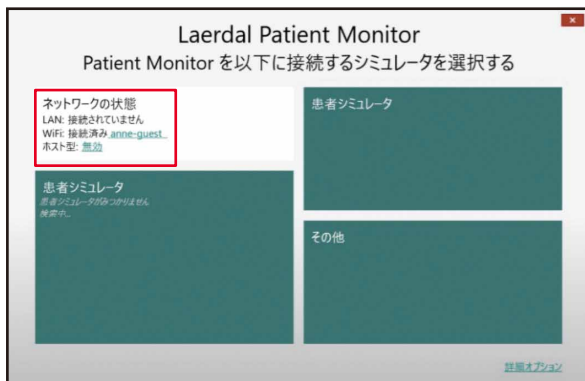

- ② 「Network Selector」をクリックする

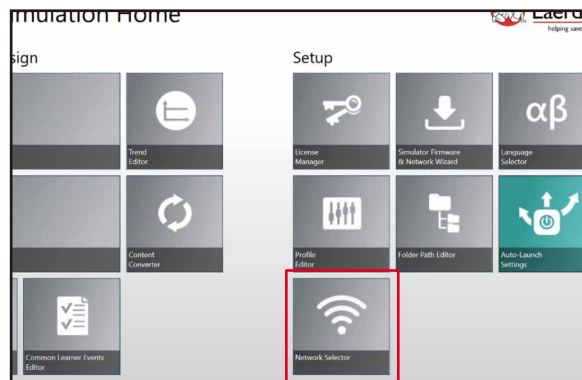

- ③ 「SimLink」を選択する  
※「SimLink」が表示されていない場合は、  
画面右下の WIFI マークを確認




WIFI マーク




- ④ 「OK」をクリックする



- ⑤ 「はい」をクリック  
Windows のユーザーアカウント制御に関する  
警告が出た場合は、「はい」をクリックする

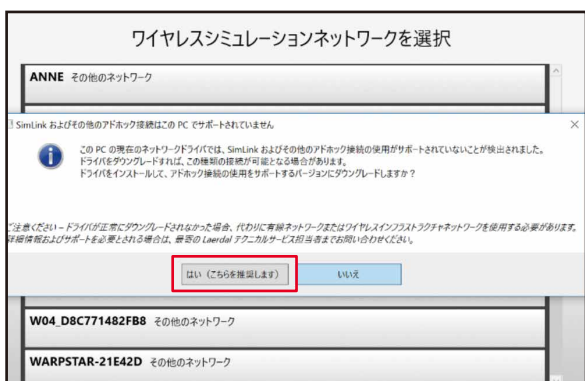

- ⑥ 画面が作動しますので  
しばらくお待ちください

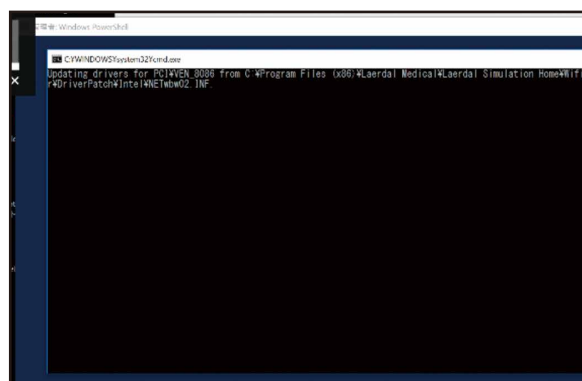

# WIFI のステータス — 「接続」状態だが「SimLink」以外が表示されている場合

2/2

- 7 「アドホックネットワーク」 SimLink “に接続してください” をクリックする



- 8 SimLink に接続完了

