


SimBaby

Traqueotomía

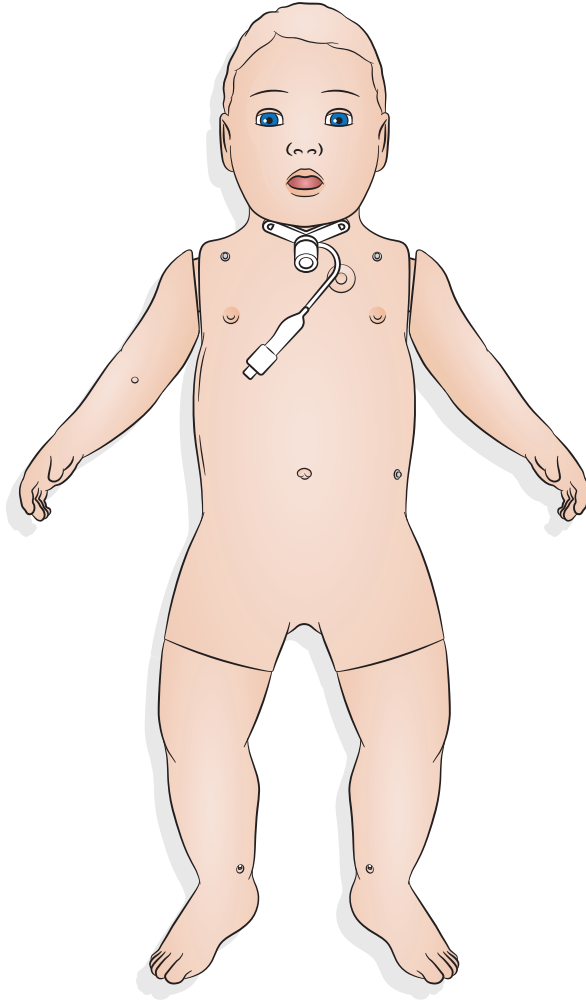

Uso - Traqueotomía

Traqueotomía

Para llevar a cabo los cuidados de traqueotomía y procedimientos de emergencia, seleccione el ajuste preferido en SimPad PLUS o LLEAP.

Ajustes disponibles:


- Abierto
- Parcial
- Cerrados
- Falsa vía / tapón mucoso
- Intubado




Notas

- *La funcionalidad de hinchazón faríngea no se encuentra disponible con SimBaby con traqueotomía.*
- *Utilice solo tubos de traqueotomía de hasta 4,0 mm sin manguitos y hasta 3,5 mm con manguitos.*
- *Recuerde volver a insertar el tapón de traqueostomía después de su uso.*

SimPad PLUS

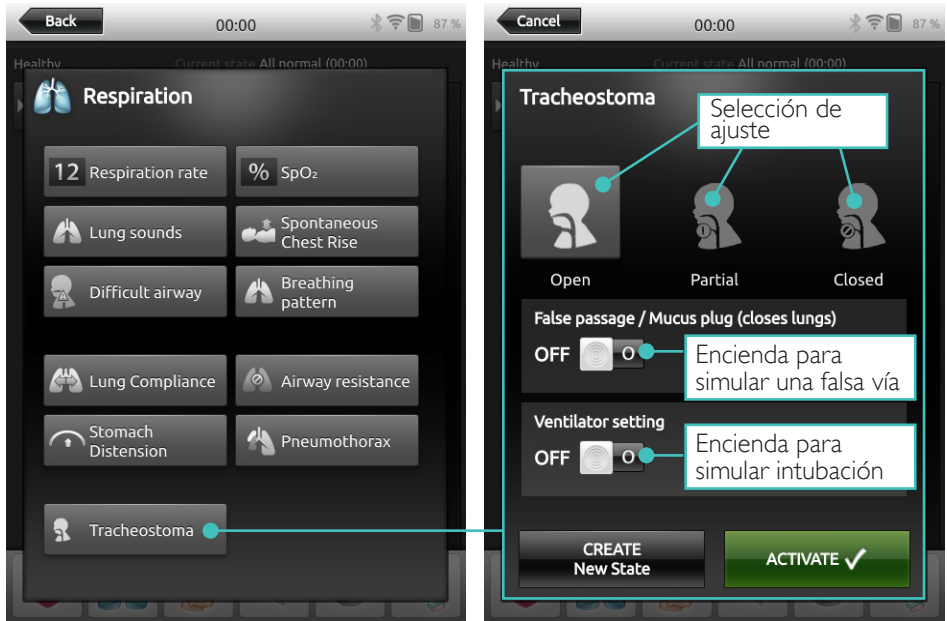

LLEAP

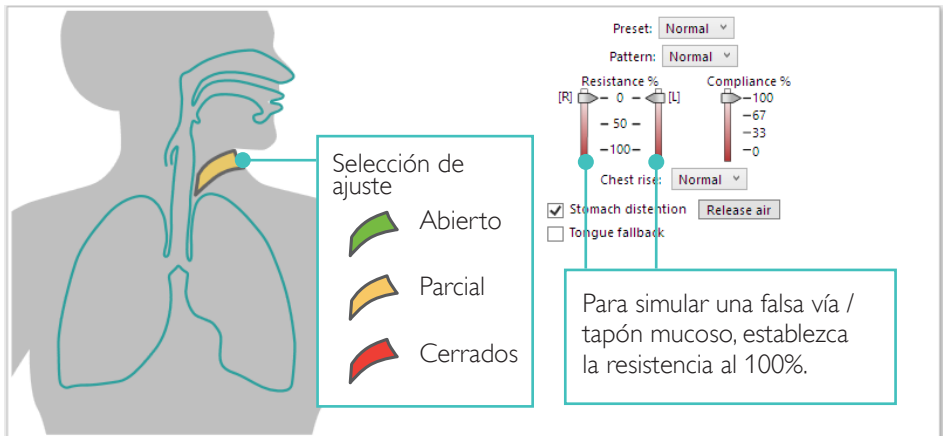

© 2020 Laerdal Medical AS. Reservados todos los derechos.

Fabricante: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Noruega
T: (+47) 51 51 17 00

Impreso en Noruega

20-16248 Rev A

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives