



Filter vervangen

Gebruikt filter verwijderen

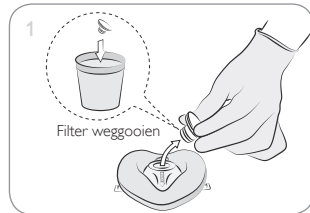

Houd het masker vast en trek het filter eruit en naar opzij, zodat het loskomt van het masker.

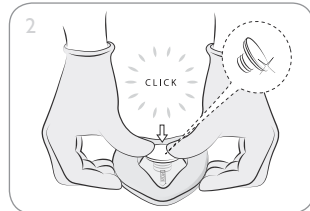

Leg het masker op een harde, vlakke ondergrond en plaats een nieuw filter. Er is stevige druk nodig om ervoor te zorgen dat het filter correct wordt bevestigd.

Opmerkingen

- Het masker kan zonder filter worden gebruikt.
- Zorg dat het masker is ingevouwen als u het filter vervangt.

Reiniging en desinfectie

⚠️ Waarschuwingen

- Het eenrichtingsventiel, de hoofdband, het filter en de handschoenen zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik bij één en dezelfde patiënt. Het reinigingsdoekje is voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken. Hergebruik geeft een verhoogd risico op kruisbesmetting, verminderde resultaten en/of verminderd functioneren van het hulpmiddel. Laerdal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van hergebruik.
- Als het Pocket Mask niet functioneert, verwijder het dan van de patiënt en ga verder met beaderning.

Het masker kan worden gereinigd en gedesinfecteerd en vervolgens opnieuw gebruikt worden na training op de oefenpop en gebruik op een patiënt.

- Schoonmaken en schrobben in warm water met zeep.
- Minimaal 1 minuut lang afspoelen in schoon water.
- Tien minuten onderdompelen in een oplossing van 0,5% natriumhypochloride.
- Drie minuten lang afspoelen onder lopend kraanwater.
- Helemaal laten drogen.

⚠️ Aandachtspunten

- Niet pasteuriseren, koken of autoclavieren. PVC heeft een lage weerstand tegen hoge temperaturen.
- Niet nogmaals verwerken met andere chemicaliën dan die hierboven vermeld staan. PVC is niet compatibel met andere oplosmiddelen.
- Controleer het Pocket Mask na hergebruik en werp het weg als het beschadigd of defect is.

Gebruik bij de patiënt

Het masker kan na reiniging en desinfectie volgens de instructies worden hergebruikt. Eenrichtingsventiel, hoofdband en filter moeten worden weggegooid na gebruik op een patiënt.

Specificaties

Temperatuurlimieten	
In bedrijf	-10 °C (14 °F) tot 40 °C (104 °F)
Opslag	-40 °C (-40 °F) tot 50 °C (122 °F)
Vochtigheid	5 - 95 %
Parameters levensduur	
Bewaartijd	5 jaar
Verwachte levensduur	20 cycli van reiniging en desinfectie
Expiratoire weerstand voor de patiënt*	
Masker en eenrichtingsventiel	≈ 3 cm H ₂ O
Masker, filter en eenrichtingsventiel	≈ 5 cm H ₂ O
Inspiratoire weerstand voor de patiënt*	
Masker en eenrichtingsventiel	≈ 3 cm H ₂ O
Masker, filter en eenrichtingsventiel	≈ 5 cm H ₂ O

Prestatiegegevens zijn uitsluitend nominale waarden.
*Volgens de standaardtestmethode

Cat. nr.	Naam	Materiaal
83xxxx	Masker	PVC
820610	Filter	PP
820410	Eenrichtingsventiel	PC, Si
830110	Hoofdband	PA6, PES, PA en elastaan
N.v.t.	Stevige opbergdoos	PP
	Zachte tas	PET, PVC
	Zuurstofinlaat	PC, Si
	Plastic zak	LDPE

Informatie over regelgeving

Verklarende symbolenlijst	
	Medisch hulpmiddel
	Opgelet: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een arts.
	Symbool enkelvoudig gebruik
	Niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex
Laerdal Pocket Mask Met eenrichtingsventiel, filter en zuurstofinlaat	
	Dit medische hulpmiddel voldoet aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen.

🗨️ Opmerking


Mocht zich enig ernstig disfunctioneren, een ongewenst incident met dan wel achteruitgang van de functionaliteit of prestaties van het hulpmiddel voordoen, neem dan onmiddellijk contact op met Laerdal. Ook de bevoegde autoriteit waar het incident heeft plaats gevonden en/of het hulpmiddel is gebruikt dient te worden geïnformeerd.

Meegeleverde onderdelen




Pocket Mask en houder*

Onderdelen voor eenmalig gebruik:

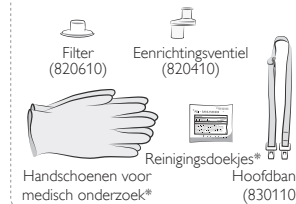

* in sommige configuraties.

Opslag

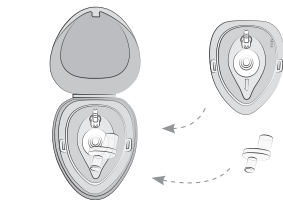

Pocket Mask is een handelsmerk van Laerdal Medical AS

© 2022 Laerdal Medical AS. Alle rechten voorbehouden.



Gefabriceerd in China voor:
Laerdal Medical AS
PO. 377, Tanke Svilandsgate 30,
4002 Stavanger, Noorwegen
T: (+47) 51511700

Gedistribueerd door:
Laerdal Pty Ltd
8 Stamford Road, Oakleigh, VIC. 3166,
AUSTRALIË


Gedrukt in China

www.laerdal.com

6325 Rev K

Pocket Mask met zuurstofinlaat

Gebruiksaanwijzing

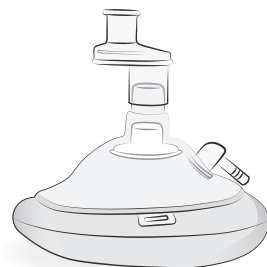

Beoogd gebruik

Het Pocket Mask met zuurstofinlaat is ontworpen voor mond-op-maskerbeademing van een niet ademende volwassene als barrière tussen hulpverlener en patiënt. Het Pocket Mask met zuurstofinlaat kan worden aangesloten op een externe zuurstofbron.

Belangrijke informatie

Het hulpmiddel mag alleen worden gebruikt door personen die de juiste training hebben gevolgd.

Lees deze gebruiksaanwijzing en zorg dat u vóór gebruik van het product bekend bent met de werking ervan. Gebruik het product alleen zoals is beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Neem alle waarschuwingen, opmerkingen en instructies in acht. Bewaar dit boekje om het in de toekomst te kunnen raadplegen.


Overige beademingsapparatuur, zoals een beademingsballon of een beademingsapparaat op zuurstof, kan op de aansluiting van 15 mm van het Laerdal Pocket Mask worden aangesloten (zonder het eenrichtingsventiel).

⚠ Waarschuwingen en aandachtspunten

Een waarschuwing geeft omstandigheden, risico's of gevaarlijk gebruik aan die ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.


Een aandachtspunt geeft omstandigheden, risico's of gevaarlijk gebruik aan die licht lichamelijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

Overzicht

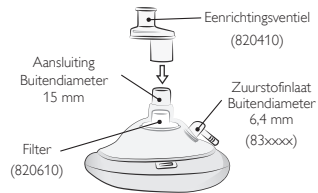


Functie


Beademing met extra zuurstof (83xxxx)

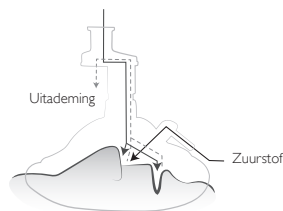

Opstelling

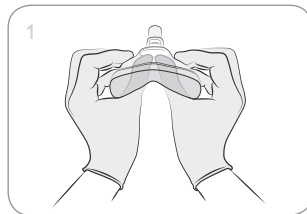

Controleer of het filter goed op zijn plek is geklikt en duw de bol naar buiten.

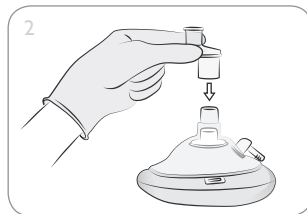


Sluit het eenrichtingsventiel aan op de maskeraansluiting.

⚠ Opgelet


Bij lagere temperaturen is de Pocket Mask moeilijker uit te vouwen.

Plaatsing van masker

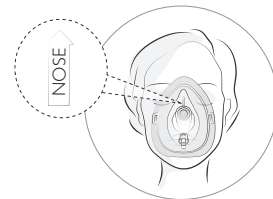

Zorg dat het positieuiteinde met de aanduiding "neus" over de neus van de patiënt komt te liggen.

Gebruik van masker

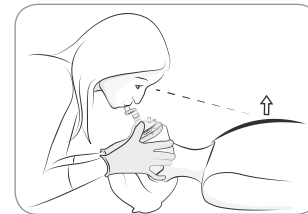

Dicht af zoals aangegeven. Blaas langzaam totdat de borst omhoog komt.


Vuil

Verwijder het masker en maak de luchtwegen van de patiënt vrij als het masker vuil blijkt. Reinig het masker door vuil uit het masker te schudden of vegen. Blaas door het ventiel om de werking te controleren. Plaats het masker terug en ga verder met beademen.

⚠ Aandachtspunten

- Als het product teveel besmet is geraakt of moeilijk vrij te maken is, ga dan door met beademing zonder masker.
- Verwijder het Pocket Mask als het niet past op het gezicht van de patiënt of als goede aansluiting niet kan worden verkregen.

Gebruik van masker met zuurstof

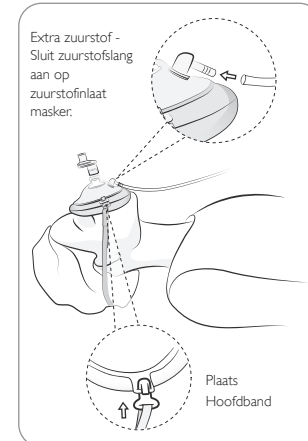


Met bandjes op het gezicht vastgezet masker maakt CPR en spontaan inhaleren van zuurstof mogelijk.

Selecteer zuurstofdebiet (zie zuurstoftabel). Geef indien nodig mond-op-maskerbeademing.

🗉 Opmerking

Zuurstofslang niet meegeleverd door Laerdal.

Afgegeven hoeveelheid zuurstof

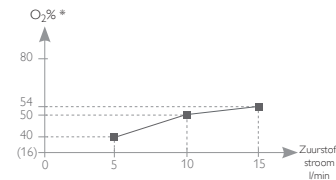

■ Beademing van niet ademende patiënt

* Fractie van ingeademde zuurstof (FiO₂) bij mond-op-mond beademing met zuurstofverrijking getest bij ademhalingsvolume van 600 ml, 15 beademingen per minuut, 1,5-2 seconden beademingstijd.