



Suodattimen vaihtaminen

Poista käytetty suodatin

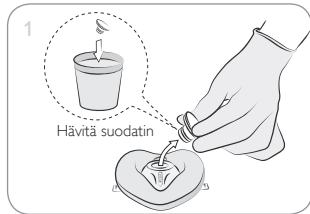

Pidä maskia paikallaan ja vedä suodatinta ulos ja sivulle niin, että se irtoaa maskista.

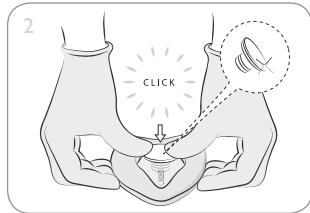

Aseta maski kovalle, tasaiselle pinnalle ja aseta siihen uusi suodatin. Suodatin tulee asettaa paikoilleen lujasti painamalla, jotta se kiinnittyy kunnolla.

Huomautukset

- Maskia voidaan käyttää ilman suodatinta.
- Varmista, että maski on painettu kasaan, suodatinta vaihtaessasi.

Puhdistus ja desinfiointi

⚠ Varoitukset

- Yksisuuntainen venttiili, suodatin ja käsiineet on tarkoitettu vain yhteen potilaskäyttöön. Pyyhe on kertakäyttöinen. Sitä ei saa käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö aiheuttaa suurentuneen ristikon-taminaation riskin, suorituskyvyn heikkenemisen ja/ tai laitteen toimintahäiriön. Laerdal ei ole vastuussa uudelleenkäytön mahdollisista seurauksista.
- Jos Pocket Mask ei toimi, poista se potilaan kasvoilta ja jatka ventilaatiolla.

Maski voidaan puhdistaa ja desinfioida ja sitä voidaan käyttää uudelleen harjoittelunukke- ja potilaskäytön jälkeen.

1. Pese ja hankaa lämpimällä saippuavedellä.
2. Huuhtele puhtaalla vedellä vähintään yhden minuutin ajan.
3. Upota 10 minuutin ajaksi 0,5-prosenttiseen natriumhypokloriittiliuokseen.
4. Huuhtele juoksevan hanaveden alla kolmen minuutin ajan.
5. Anna kuivua kokonaan.

⚠ Huomiot

- Älä pastöri, keitä tai höyryautoklavoi. PVC ei kestä korkeita lämpötiloja hyvin.
- Ei saa käsitellä uudelleen muilla kuin edellä määrättyillä kemikaaleilla. PVC ei ole yhteensopiva monien liuottimien kanssa.
- Tarkasta Pocket Mask uudelleenkäsittelyn jälkeen. Jos se on vaurioitunut tai viallinen, hävitä se.

Potilaskäyttö

Maskia voidaan käyttää uudelleen ohjeiden mukaisen puhdistamisen ja desinfiointin jälkeen. Yksisuuntainen venttiili ja suodatin tulee hävittää yhden potilaskäytön jälkeen.

Tekniset tiedot

Lämpötilarajat	
Käyttö	-10 °C (14 °F) – 40 °C (104 °F)
Säilytys	-40 °C (-40 °F) – 50 °C (122 °F)
Ilmankosteus	5–95 %
Elinkaaritiedot	
Säilyvyys	5 vuotta
Arvioitu käyttöikä	20 puhdistus- ja desinfiointisykliä

Potilaan uloshengityksen vastus*

Maski ja yksisuuntainen venttiili	≈ 3 cm H ₂ O
Maski, suodatin ja yksisuuntainen venttiili	≈ 5 cm H ₂ O

Potilaan sisäänhengityksen vastus*

Maski ja yksisuuntainen venttiili	≈ 3 cm H ₂ O
Maski, suodatin ja yksisuuntainen venttiili	≈ 5 cm H ₂ O

Suorituskyvytiedot ovat nimellisarvoja.

* Standarditestimenetelmän mukaisesti

Tuotenro	Nimi	Materiaali
82xxxx	Maski	PVC
820610	Suodatin	PP
820410	Yksisuuntainen venttiili	PC, Si
–	Kova kotelo	PP
	Pehmeä pussi	PET, PVC
	Muovipussi	LDPE

Säädöksiä koskevat tiedot

Merkkien selitykset	
MD	Lääkinnällinen laite
Rx ONLY	Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
	Kertakäyttöä koskeva symboli
LATEX	Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.
Laerdal Pocket Mask, jossa yksisuuntainen venttiili ja suodatin	
82xxxx CE	Tämä lääketieteellinen laite noudattaa lääketieteellisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 yleisiä turvallisuus- ja suorituskyvyvaatimuksia.

💬 Huomaa

Ota heti yhteyttä Laerdaliin, mikäli laitteen käytön yhteydessä ilmenee vakava toimintahäiriö tai häittätapahtuma tai mikäli laitteen toiminta tai suorituskyky heikkenee. Asiasta tulee ilmoittaa myös sen alueen toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tapahtuma sattui jaltai jossa laitetta käytettiin.

Mukana tulevat varusteet




Pocket Mask ja sen kotelo*



*Joissakin kokoonpanoissa.

Säilytys

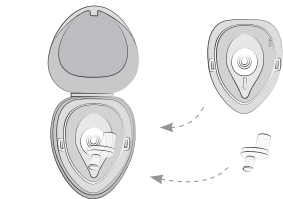

Pocket Mask on Laerdal Medical AS:n tavaramerkki

© 2021 Laerdal Medical AS. Kaikki oikeudet pidätetään.

Valmistettu Kiinassa, valmistuttaja:
Laerdal Medical AS
P.O. Box 377, Tanke Svilandsgate 30,
4002 Stavanger, Norway
Puh: (+47) 515 117 00


Maahantuojaja:
Laerdal Pty Ltd
8 Stamford Road, Oakleigh, VIC. 3166,
AUSTRALIA

Painettu Kiinassa

www.laerdal.com

Pocket Mask

Käyttöopas

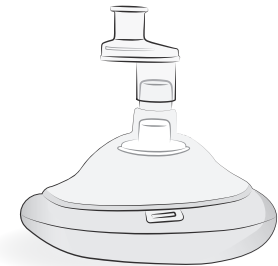

Laerdal
helping save lives

Käyttötarkoitus

Laerdal Pocket Mask on tarkoitettu hengittämättömän aikuisen, lapsen tai vauvan suusta maskiin -ventilaatioon, ja se toimii pelastajan ja potilaan välisenä suojana. Kun maskia käytetään vauvalla, sitä voidaan kääntää 180 astetta, jotta maski on tiiviimpi.

Tärkeää tietoa

Laitetta saavat käyttää vain sopivan koulutuksen saaneet henkilöt.

Lue tämä käyttöohje ja tutustu tuotteen toimintoihin ennen käyttöä. Käytä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Noudata kaikkia varoituksia, huomioita ja ohjeita. Säilytä tämä kirjanen myöhempiä käyttöä varten.


Laerdal Pocket Maskin 15 mm:n liitäntäporttiin (ilman yksisuuntaista venttiiliä) voidaan yhdistää myös muita ventilaatiovälineitä, kuten elvytyspalje tai happikäyttöinen palje.

⚠ Varoitukset ja huomiot

Varoitus tarkoittaa tilannetta, vaaraa tai vaarallista käytäntöä, josta voi aiheutua vakava loukkaantuminen tai kuolema.


Huomio tarkoittaa tilannetta, vaaraa tai vaarallista käytäntöä, josta voi aiheutua lievä loukkaantuminen tai tuotteen vaurioituminen.

Yleiskuvaus

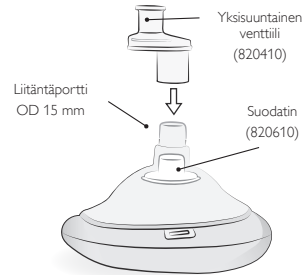


Toiminta


Suusta maskiin -ventilaatio (82xxxx)

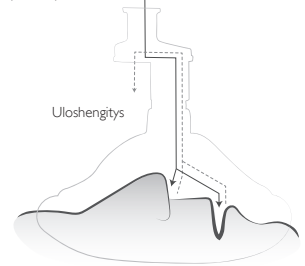

Käyttöönotto

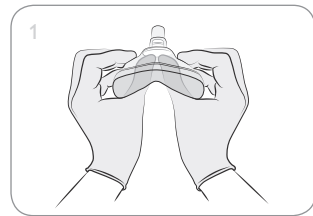

Varmista, että suodatin on tukevasti paikallaan, ja työnnä kupu ulos.

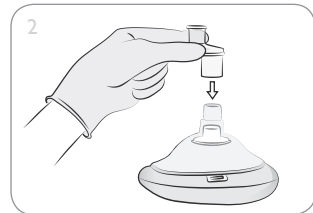


Liitä yksisuuntainen venttiili maskin porttiin.

⚠ Huomio


Alemmissä lämpötiloissa Pocket Maskin käyttömuotoon avaaminen voi olla vaikeampaa.

Maskin asettaminen

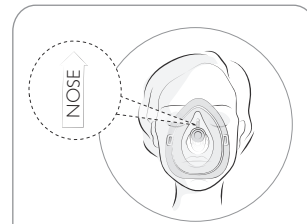

Aikuisen ja lapsi


Varmista, että "nenä"-merkinnällä varustettu pää on potilaan nenän päällä.

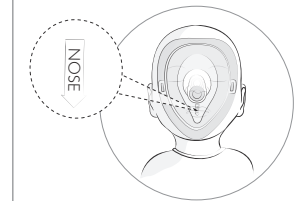

Vauva


Aseta "nenä"-merkinnällä varustettu pää vauvapotilaan leuan alle.

Maskin käyttö

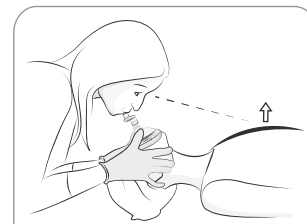

Aikuisen ja lapsi

Peitä suu tiiviisti kuvan mukaisesti. Puhalla hitaasti, kunnes rintakehä nousee.

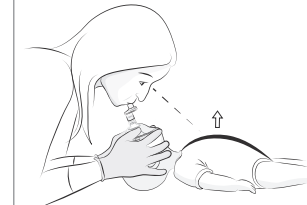

Vauva

Peitä suu tiiviisti kuvan mukaisesti. Puhalla hitaasti, kunnes rintakehä nousee.

⚠ Kontaminaatio

Jos maski on kontaminoitunut, poista se ja puhdista potilaan ilmatiet. Puhdista maski ravistamalla sitä tai pyyhkimällä vieras aine pois. Varmista toiminta puhaltamalla venttiiliin läpi. Aseta maski takaisin paikalleen ja jatka ventilaatiota.

⚠ Huomiot

- Jos tuote kontaminoituu liikaa tai sen puhdistamisesta tulee vaikeaa, jatka ventilaatiota ilman maskia.
- Poista Pocket Mask, jos se ei sovi potilaan kasvoille tai jos se ei istu riittävän tiiviisti.