

EN

FR

DE

ES

IT

BR

NL

PL

JA

ZH

KO

Nursing Anne Simulator

Quick Setup Guide





EN This Quick Setup Guide describes how to assemble and setup your Nursing Anne Simulator. For information about how to use Nursing Anne Simulator, please refer to the User Guide. Visit www.laerdal.com to download the latest User Guide, operating system software updates and for Spare Parts and Accessories. Items included may vary in appearance and are subject to change.

FR Ce guide de configuration rapide décrit l'assemblage et la configuration de votre simulateur Nursing Anne. Pour plus d'informations sur le mode d'utilisation du simulateur Nursing Anne, consultez le mode d'emploi. Sur le site www.laerdal.com, vous pourrez télécharger le dernier mode d'emploi, et les dernières mises à jour logicielles du système d'exploitation. Vous pourrez aussi accéder à la liste des pièces détachées et accessoires. Les éléments inclus peuvent avoir été modifiés et peuvent être légèrement différents de ceux qui sont présentés.

DE Diese Schnellanleitung beschreibt, wie der Nursing Anne Simulator aufgebaut und gestartet wird. Informationen zur Verwendung des Nursing Anne Simulators finden Sie im Benutzerhandbuch. Unter www.laerdal.com können Sie das aktuelle Benutzerhandbuch sowie Software-Updates für das Betriebssystem herunterladen und Ersatzteile sowie Zubehör bestellen. Bei den enthaltenen Elementen kann es zu Abweichungen im Aussehen kommen und Änderungen sind vorbehalten

ES Esta guía de configuración rápida describe cómo ensamblar y configurar su Nursing Anne Simulator. Para obtener información sobre cómo utilizar Nursing Anne Simulator, consulte el manual del usuario. Visite www.laerdal.com para descargar el último manual del usuario, actualizaciones de software del sistema operativo y para ver las piezas de repuesto y los accesorios. Los elementos que se incluyen pueden variar en apariencia y están sujetos a cambios.

IT La Guida di configurazione rapida descrive come assemblare e impostare Nursing Anne Simulator. Per informazioni sull'uso di Nursing Anne Simulator, fare riferimento alla guida per l'utente. Visitare www.laerdal.com per scaricare la più recente guida per l'utente, l'aggiornamento del software per il sistema operativo, le parti di ricambio e gli accessori. Gli articoli inclusi possono apparire diversi e sono soggetti a modifiche.

BR Este Guia de configuração rápida descreve como montar e configurar a Nursing Anne Simulator. Para obter informações sobre como usar a Nursing Anne Simulator, consulte o Guia do usuário. Visite www.laerdal.com para baixar o Guia do usuário mais recente, atualizações do software de sistema operacional e para informar-se sobre peças de reposição e acessórios. Os itens incluídos podem variar na aparência e estão sujeitos a alteração.




NL In deze installatiegids vindt u hoe de Nursing Anne Simulator wordt gemonteerd en geïnstalleerd. Raadpleeg de gebruikshandleiding voor informatie over het gebruik van de Nursing Anne Simulator. Ga naar www.laerdal.com om de recentste gebruikshandleiding en updates voor besturingssystemen te downloaden en voor een overzicht van onderdelen en accessoires. Inbegrepen onderdelen kunnen verschillen in uiterlijk en zijn onder voorbehoud

PL Niniejsza instrukcja szybkiej konfiguracji opisuje sposób montażu i konfiguracji symulatora Nursing Anne. Informacje na temat sposobu korzystania z symulatora Nursing Anne można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Najnowsze wydanie Podręcznika użytkownika, aktualizacje oprogramowania systemu operacyjnego oraz części zamienne i akcesoria można znaleźć na stronie www.laerdal.com. Artykuły mogą różnić się wyglądem i podlegać zmianom.


JA 本クイック セットアップ ガイドでは、ナーシング アン シミュレータの組み立て方法とセットアップ方法を解説しています。ナーシング アン シミュレータの使用方法に関する詳細は、取扱説明書を参照してください。最新の取扱説明書およびオペレーティングシステムのソフトウェアアップデートのダウンロード、予備のパーツおよびアクセサリについては、www.laerdal.com/jp/ をご覧ください。パッケージ内容は外観が異なる場合があります、変更されることがあります。

ZH 本《快速安装指南》说明了如何组装和设置您的安妮高仿真护理模拟人。有关如何使用安妮高仿真护理模拟人的信息，请参阅《用户指南》。访问 www.laerdal.com/cn/ 以下载最新的《用户指南》、操作系统软件更新，并了解备件和配件信息。内含物品可能在外观上有所不同，并有可能发生变化。

KO 빠른 설치 안내서에는 Nursing Anne Simulator 조립 방법 및 설치 방법이 설명되어 있습니다. Nursing Anne Simulator 사용 방법에 대한 내용은 사용설명서를 참조하십시오. 최신 사용설명서 및 작동 시스템 소프트웨어 업데이트 다운로드, 예비 부품 및 부속품 정보는 www.laerdal.com/kr/을 방문하십시오. 제공된 제품의 모양이 다를 수 있으며, 변경될 수 있습니다.

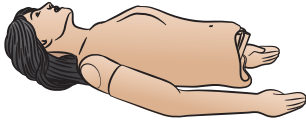

Manikin Torso

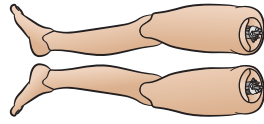


Legs




Pupil Set



Wig

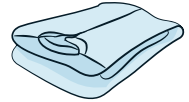

Gown

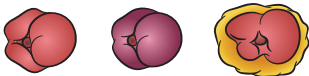


Set of Stomas
(normal, non-perfusing, infected)




Urine Syringe




Air Syringe

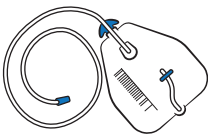

External Reservoir Bag
2000ml

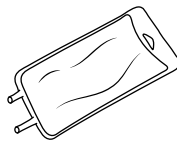

IV bag

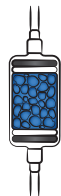

Compressor Air Filter




Airway Lubricant
45ml



Simulated Blood
Concentrate



Adult BP Cuff

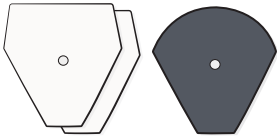

Subcutaneous Injection Pads
x 2 set



Hypafix Tape



Kind Removal Tape




Silicone Dressing Large
x 2



Silicone Dressing Medium
x 10



Silicone Dressing IV
x 10

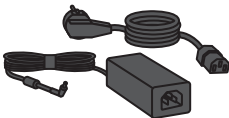

Power Cord




Ethernet Cable




Quick Setup Guide and
Important Product Information




SimPad PLUS



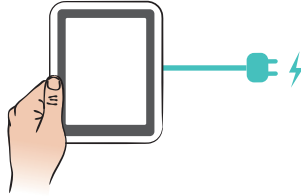


Patient Monitor

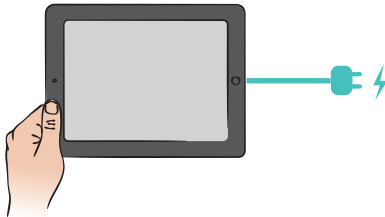


Instructor PC

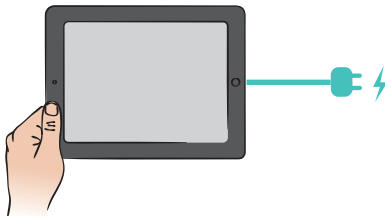

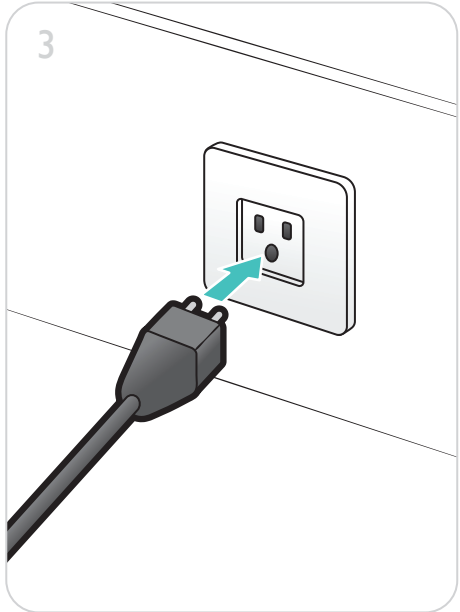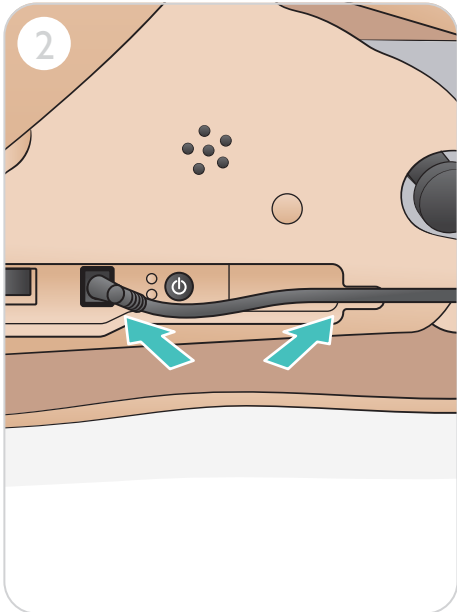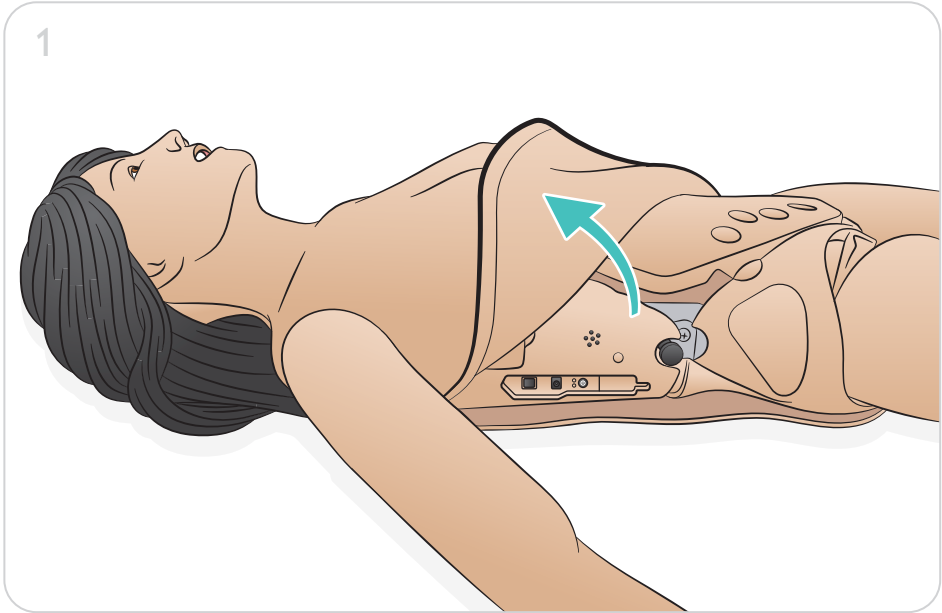







1

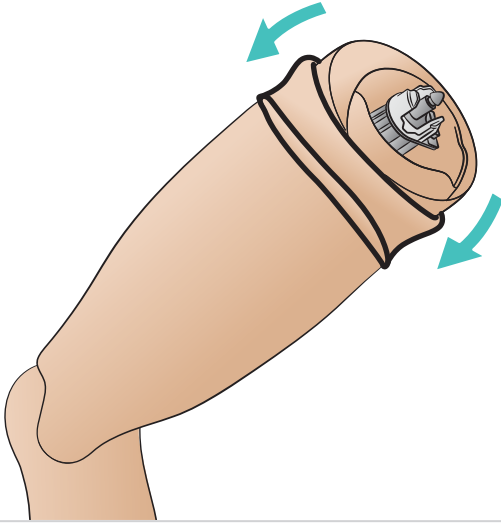


2

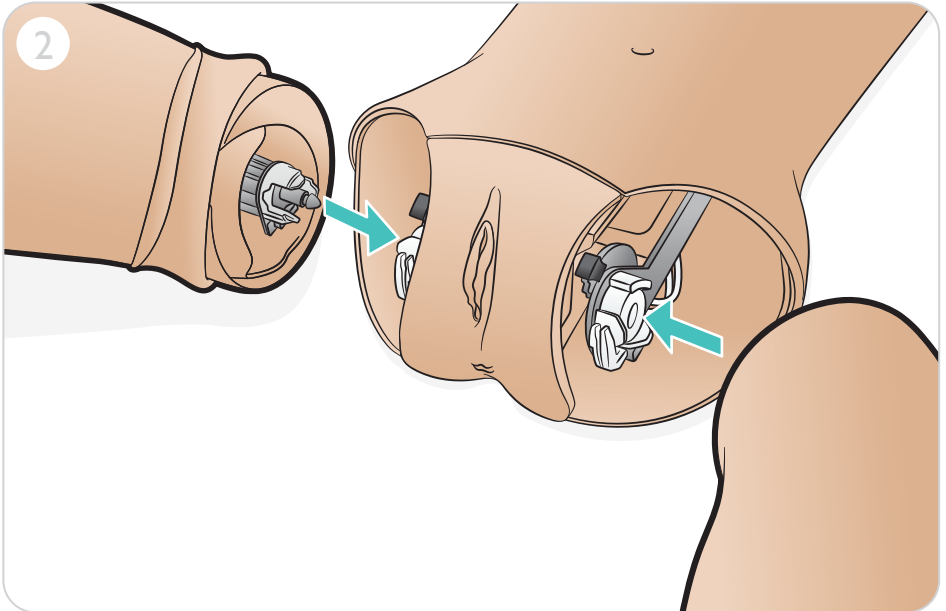


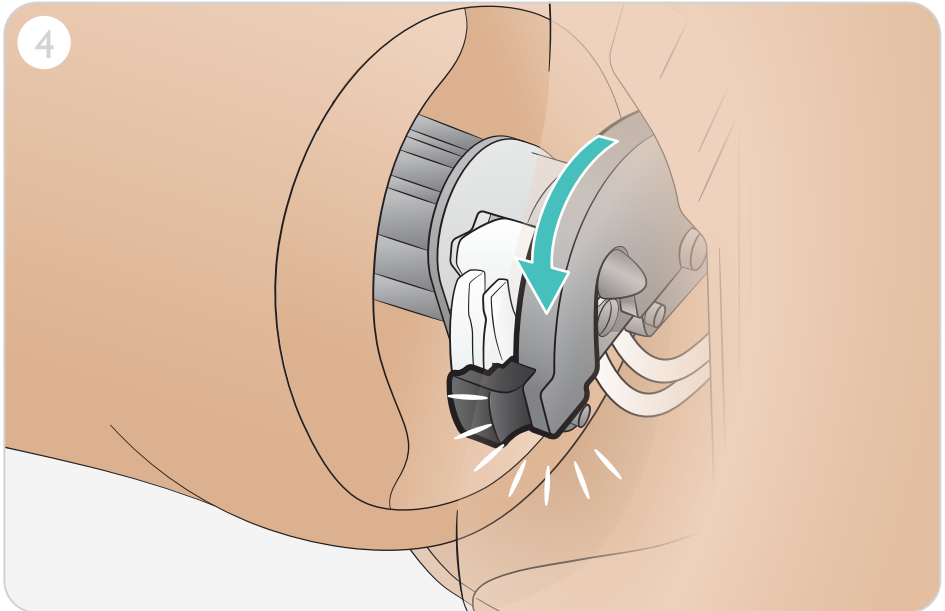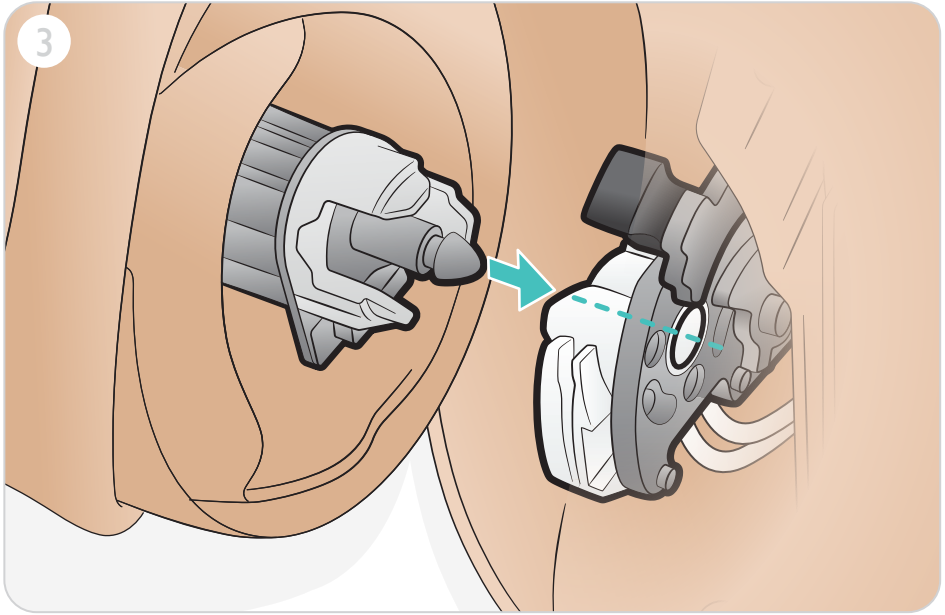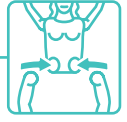




1

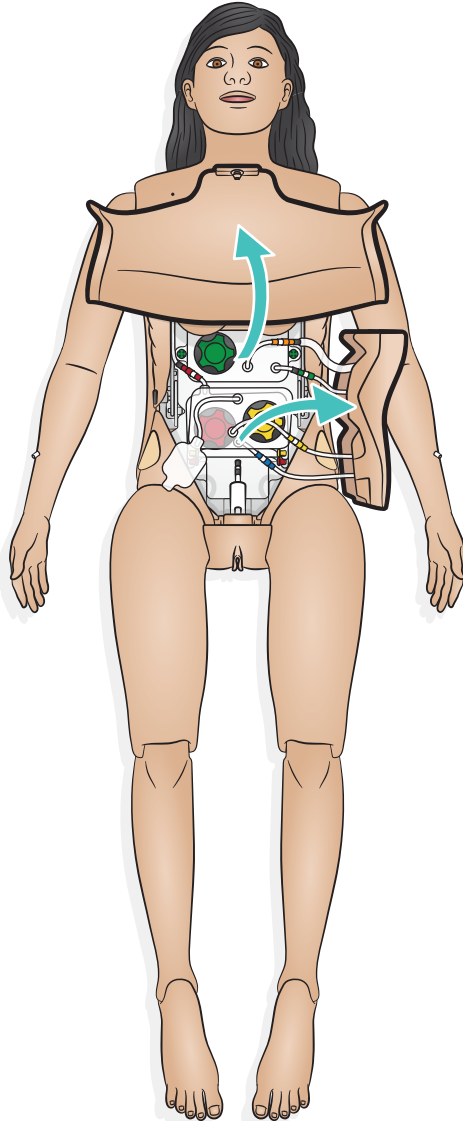


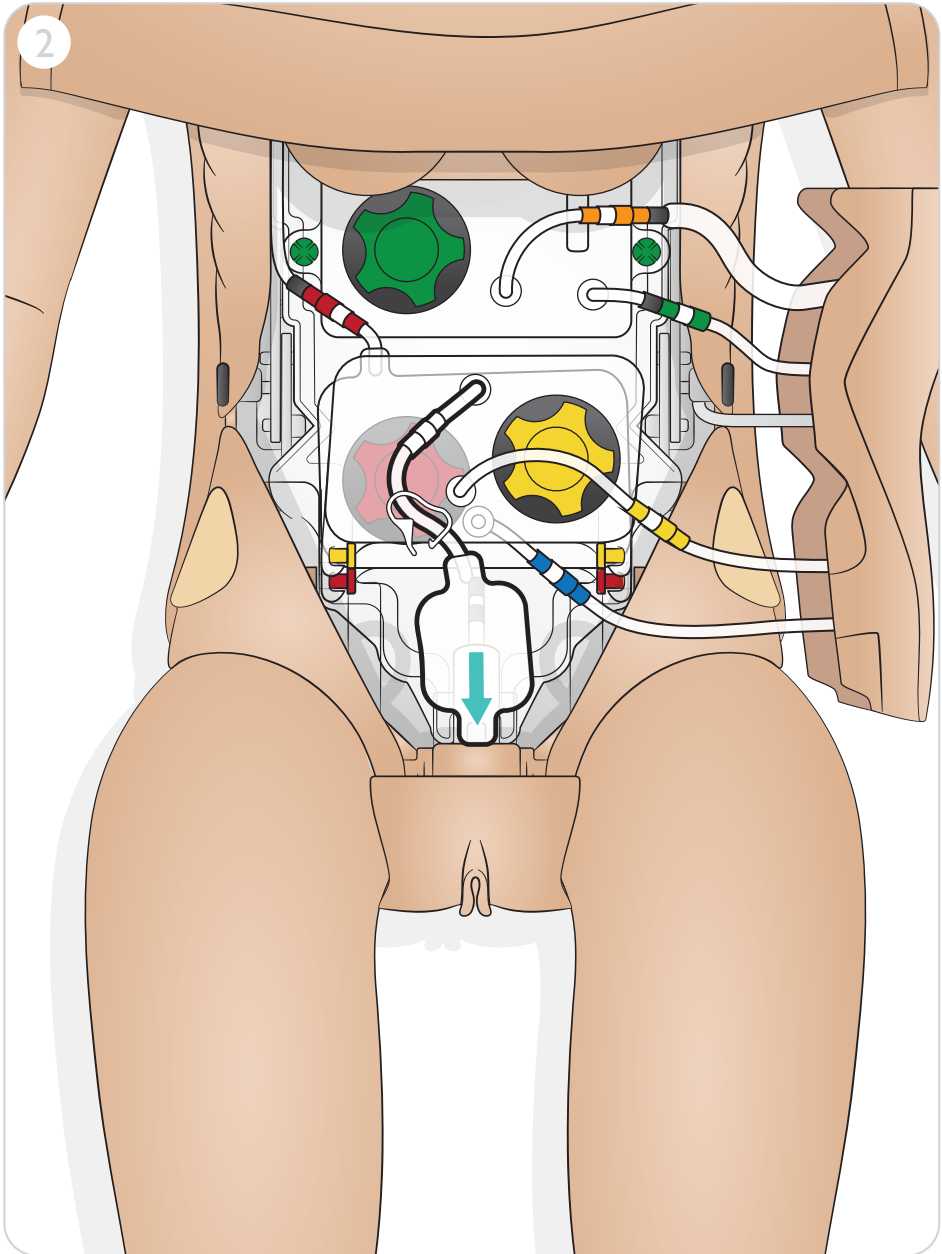

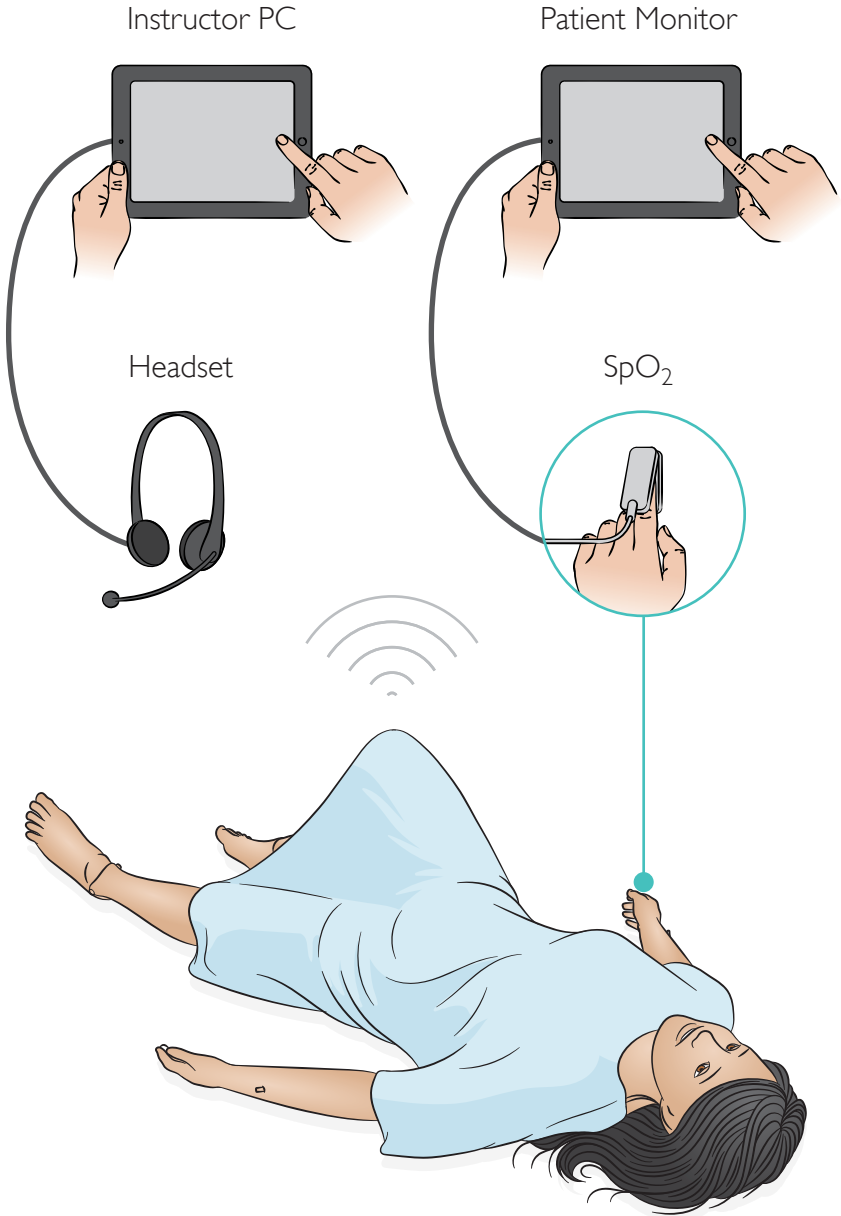




SimPad PLUS

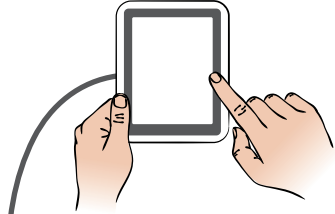


Patient Monitor

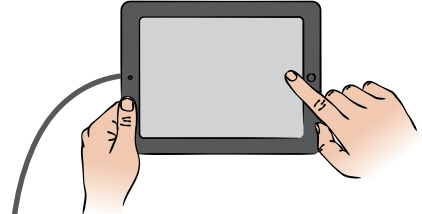

Headset



SpO₂

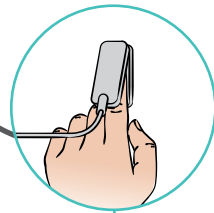

© 2019 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Printed in USA

20-12769 Rev F

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives