



Laerdal

helping save lives



Resusci Anne Wireless SkillReporter AIRWAY

Erweiterte Produktlösung für umfassendes CPR- und Airwaymanagement-Training

Die naturgetreue Anatomie der Resusci Anne Wireless SkillReporter AIRWAY ermöglicht ein realistisches und qualitativ hochwertiges CPR-Training mit Echtzeit-Feedback. Der integrierte Airwaykopf eignet sich für alle gängigen Techniken der Atemwegssicherung mit Larynxmaske, Larynx-tubus, Combitubus, Endotrachealtubus und der Beutel-Maskenbeatmung.* Die SkillReporter Software bietet Ihnen CPR-Feedback in Form einer Klassenübersicht, sodass mehrere Teilnehmer zur gleichen Zeit trainieren können. Parameter wie Beatmungsdauer und -volumen, Kompressionstiefe und -frequenz werden in einer übersichtlichen Grafik abgebildet. Das Trainingsspektrum bei diesem Modell kann durch die Ergänzung von optionalen Zusatzmodulen erweitert werden.

*Mund-zu-Mund-Beatmung bei dieser Modellvariante nicht möglich

www.laerdal.com

Produktmerkmale

Software-Features:

- Kabellose Nutzung des Modells durch Bluetooth-Technologie
- Klassenfunktion: Die Software ermöglicht eine Übersicht der CPR-Performance von bis zu sechs Teilnehmern
- Guideline-konformes CPR-Training
- Echtzeit-Feedback in Form einer Grafik gibt Auskunft über Parameter wie Beatmungsdauer und -volumen, Kompressionstiefe und -frequenz
- Direkte Rückmeldung über die richtige Positionierung der Hände
- Umfassende Debriefing-Tools verfügbar



Umfangreiche Trainingsübersicht der Kursteilnehmer


Echtzeit-Feedback

Manikin-Features:

- Anatomisch nachempfundener Airwaykopf ermöglicht alle gängigen Techniken der Atemwegssicherung mit Larynxmaske, Larynxtrachealintubation, Combitubus, Endotrachealtubus, nasale Intubation sowie Beutel-Maskenbeatmung*
 - Auskultation von Lungengeräuschen während der Beatmung
 - Bewegliche Extremitäten für Lagerungsübungen
 - Robuste und hochwertige Verarbeitung des Modells verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
 - Austauschbare Pupillen
 - Manuelle Simulation des Karotis Pulses
 - Lange Verfügbarkeit der Ersatzteile
 - Optionales Zubehör wie IV-Arm oder Traumamodule verfügbar
- *Mund-zu-Mund-Beatmung bei dieser Modellvariante nicht möglich



Debriefing der ausgeführten Maßnahmen

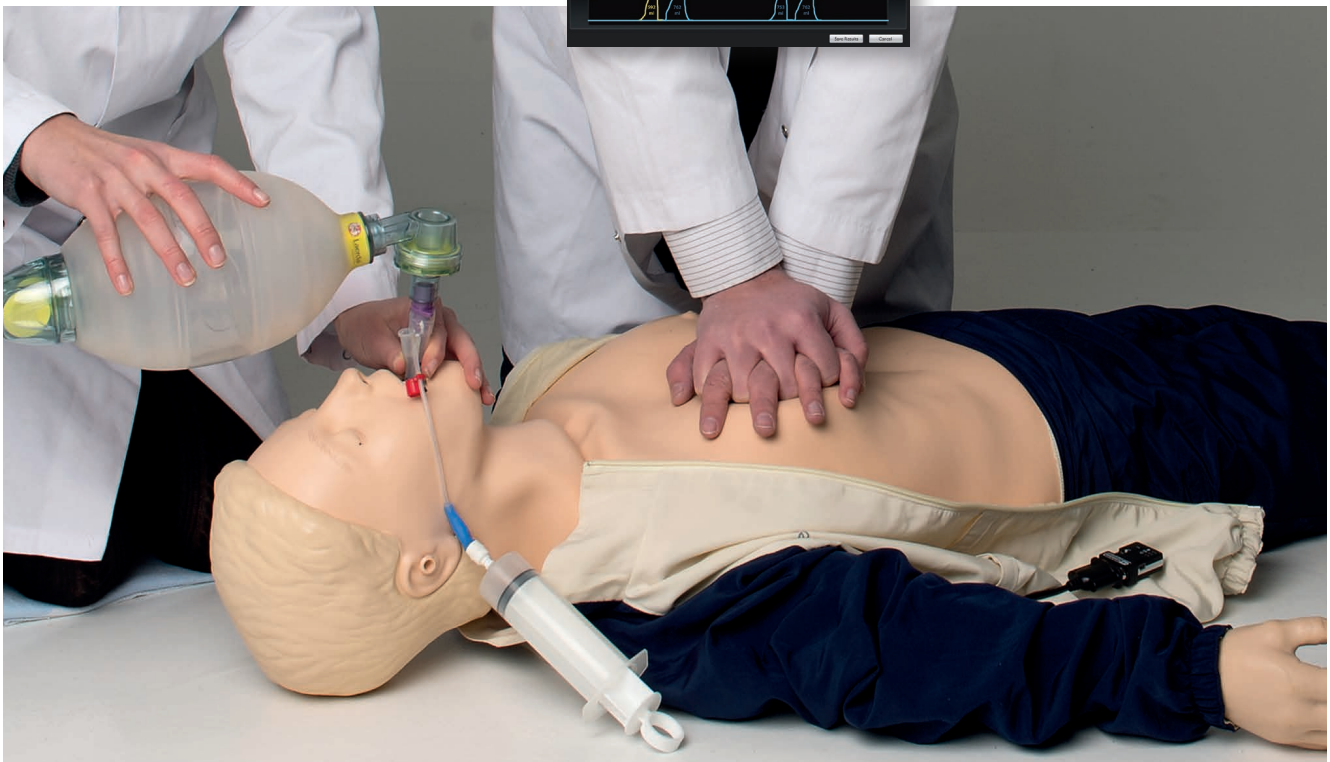

Bestellinformation:

KIT-Airwaykopf-TS
31012640 Resusci Anne SkillReporter Torso
318000 Wireless-Komplett-Set inklusive Software

KIT-Airwaykopf-GK
31015640 Resusci Anne SkillReporter Ganzkörper mit Airwaykopf
318000 Wireless-Komplett-Set inklusive Software

Im Lieferumfang enthalten:

Resusci Anne SkillReporter (Torso oder Ganzkörper) mit Airwaykopf, USB-Bluetooth-Adapter für PC mit Installationsanleitung, Software-CD, Manikin Kabel, Manikin Bluetooth Adapter und ein Koffer.