



**Laerdal**  
helping save lives



L'aspirateur de mucosités Laerdal – Désormais encore mieux

## Aspirateur de mucosités LSU

Depuis 1968, l'aspirateur de mucosités Laerdal est un support incontournable des professionnels de santé pour la libération des voies aériennes en urgence. La configuration du LSU avec les nouveaux bouches Serres est le dernier développement parmi nos solutions innovantes d'aspiration



[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)

# La solution « SERRES »

## **Economique**

La poche et le bocal Serres constituent un système particulièrement économique. Avec les composants de ce système, les budgets nécessaires sont encore plus réduits.

## **Design amélioré**

Le nouveau connecteur de vide et le support bocal ont été développés en pensant aux besoins de nos clients. Une connexion directe entre l'aspirateur et le bocal élimine le besoin d'un tuyau de vide et réduit le risque d'un assemblage incorrect. Le LSU est performant en intra-hospitalier et en extra-hospitalier. Les poches d'aspiration sont équipées d'un filtre hydrophobe pour éviter le sur-remplissage et la contamination bactérienne.

## **Stock disponible et sécurité de livraison**

Serres est le plus grand fournisseur de poches d'aspiration en Europe et le second au niveau mondial. Ses produits sont reconnus pour leurs qualités ergonomiques notamment.



# Caractéristiques du LSU

Simple à utiliser, fiable et performant. Trois des nombreuses qualités qui font du LSU un leader mondial.

L'aspirateur Laerdal LSU permet à son utilisateur de tester son bon fonctionnement.

Un test simple et rapide contrôle :


- l'éventuel bouchage,
- l'efficacité,
- la montée en puissance,
- le niveau de vide maximum
- et les fuites d'air au niveau de la pompe.

Robuste et fiable, l'aspirateur Laerdal LSU est le choix de référence pour des soins de qualité.

Avec plus de 40 ans d'expérience sur les aspirateurs de mucosités, Laerdal propose le LSU : un dispositif parfaitement adapté aux environnements calmes ou chaotiques.



*\*sauf batterie, système de bocal, câble d'alimentation et les consommables.*

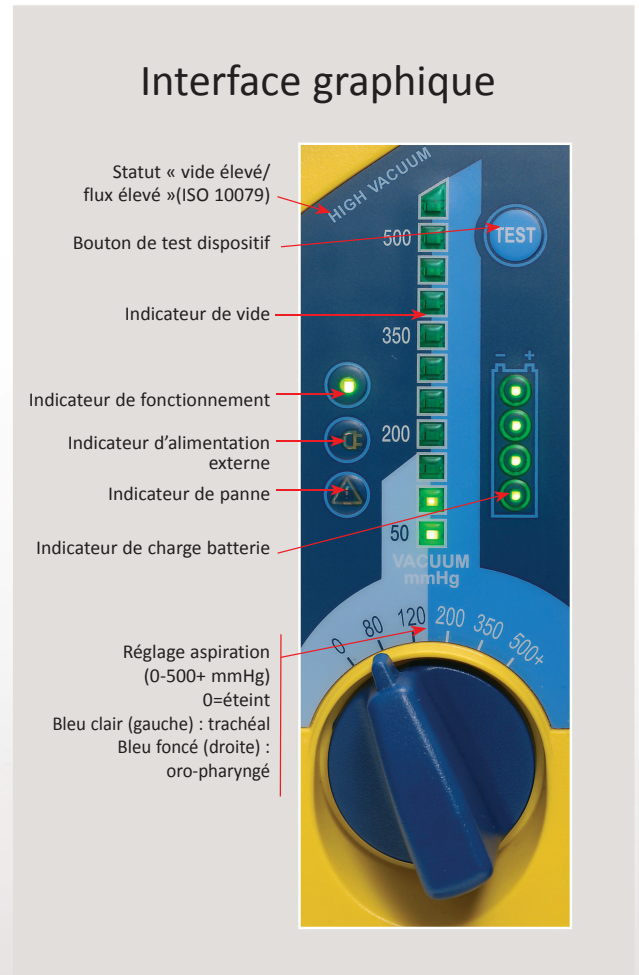

Un bocal totalement réutilisable est aussi disponible.



Simple à utiliser : changement de batterie sans aucun outil, chargeur intégré et possibilités d'alimentation multiples.



Une molette unique et large, facile à manipuler avec précision, même avec des gants épais.



Le LSU est facile à déloger de son support mural, même avec des gants.



L'élimination du tube de vide réduit le risque de mauvaise connexion.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids (Batterie incluse)	4.0 kg
Taille	H315 X W330 X D160mm
Capacité bocal	1000ml
Tube d'aspiration patient (non stérile)	réutilisable 8mm ø interne longueur 150cm      Serres 5,8 mm ø interne longueur 180cm

## CLASSIFICATION

Aspirateur alimenté électriquement pour le terrain et le transport selon norme ISO 10079-1 : 1999	Classe II type BF, selon IEC 60601-12ème édition (2000).
Vide élevé/flux élevé	Protection : IP34D selon IEC 60529 (2000)
Ne pas utiliser en présence de liquide ou de gaz inflammable.	Conforme à EN 1789 :1999

## FONCTIONNEMENT

Flux d'air maximum à différents réglages

80 mmHg	120 mmHg	200 mmHg	350 mmHg	500+ mmHg
12 l/min	16 l/min	20 l/min	23 l/min	25 l/min

Temps de fonctionnement batterie à différents réglages

80 mmHg	120 mmHg	200 mmHg	350 mmHg	500+ mmHg
3h 20 min	2h 20 min	1h 30 min	1 h	45 min

Niveau sonore approximatif à différents réglages

80 mmHg	120 mmHg	200 mmHg	350 mmHg	500+ mmHg
46 dbA	48 dbA	51 dbA	53 dbA	56 dbA

## SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Fonctionnement/recharge	100-240 VAC ou 12-28 VDC
Batterie : Plomb-acide rechargeable	12 VDC 2.0Ah

## REFERENCES/DESCRIPTIONS

780000	LSU avec bocal réutilisable	782000	Sac de transport (total)
780030	LSU avec système de poche d'aspiration Serres	782600	Support mural avec cordon alimentation DC
		782610	Support mural avec cordon alimentation US
Consommables :		782620	Support mural avec cordon alimentation EU
781200	Filtre aérosol pour le bocal réutilisable	782630	Support mural avec cordon alimentation UK
57151	Poche d'aspiration Serres 1000 ml	782640	Support mural sans cordon d'alimentation
5833181	Tube d'aspiration Serres 180 cm	780440	Kit chargeur externe
781206	Connecteur de vide Serres		
780412	Tube patient à usage unique 180cm		
573000	Bocal Serres (1000ml, Transparent)		
57301	Bocal Serres (1000ml bleu)		
780451	Porte-bocal Serres		
Accessoires :			



Produit conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42EEC ; Directive des dispositifs médicaux telle qu'amendée par 2007/47/EC.



Support mural LSU

Pour plus d'informations : [www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives