


# SimBaby

Traqueostomia

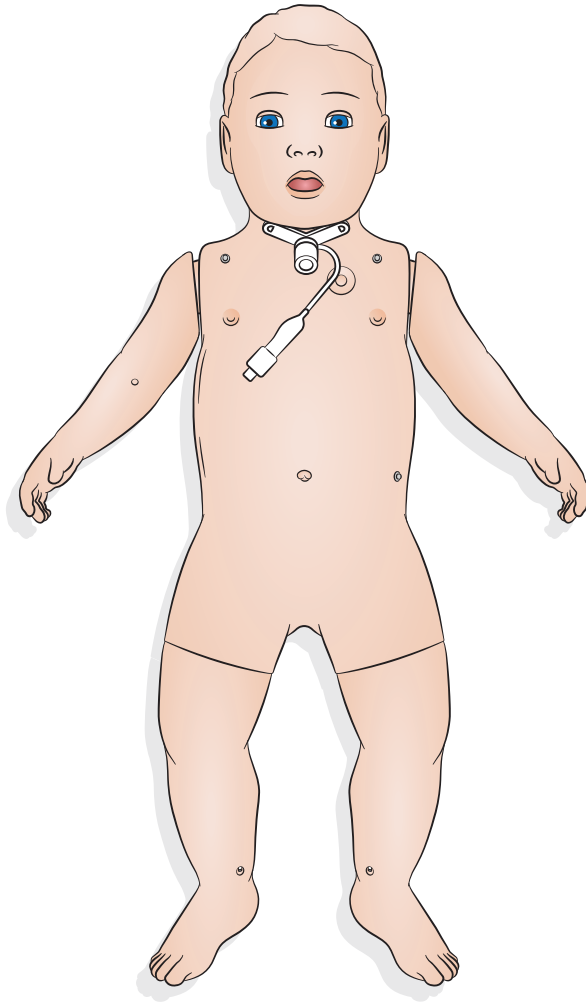

# Uso - Traqueostomia

---

## Traqueostomia

Para realizar procedimentos de emergência e cuidados de traqueostomia, selecione as configurações preferenciais no SimPad PLUS ou no LLEAP.

Configurações disponíveis:


- Aberto
- Parcial
- Fechado
- Falso trajeto/tampão de muco
- Intubado




### Notas

- *A funcionalidade de obstrução da faringe não está disponível no SimBaby com traqueostomia.*
- *Somente use tubos de traqueostomia de até 4,0 mm sem manguito e de até 3,5 mm com manguito.*
- *Lembre-se de reinserir o tampão de traqueostomia após o uso.*

SimPad PLUS

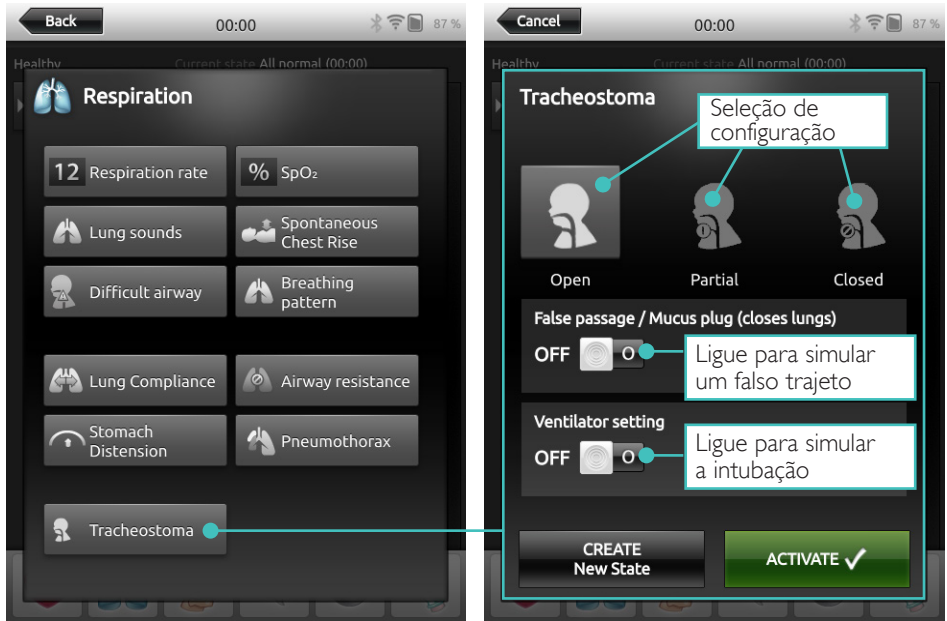

LLEAP

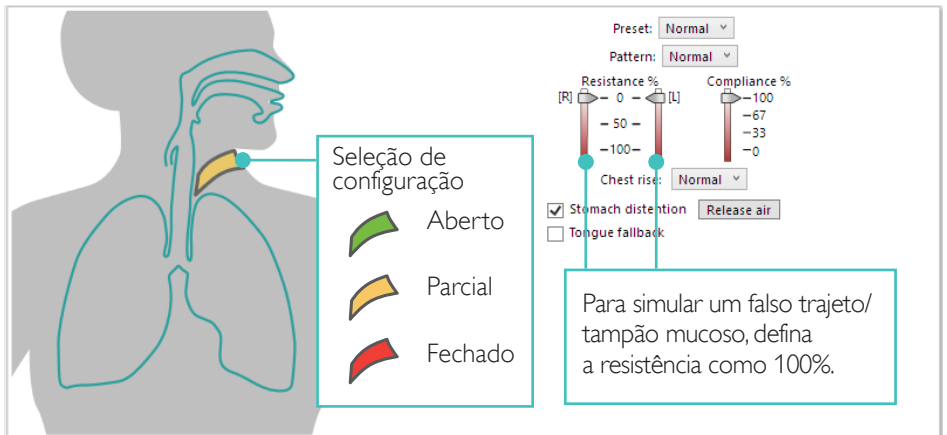

© 2020 Laerdal Medical AS. Todos os direitos reservados.

Fabricante: Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

Impresso na Noruega

20-16250 Rev A

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives