



ママナタリー構成

ママナタリー 本体

- 胎盤 臍帯付
- 擬似血液
- スポイト吸引器 (ペンギンサクシオン)
- 手袋×2組 (標準サイズ・ロングサイズ)
- トラウベ (胎児用聴診器)
- トレイ
- 排液シート・床シート
- 尿道カテーテル
- 20mlシリンジ
- ネオナタリー用 頭部
- 収納バッグ
- 取扱説明書

ネオナタリー

- スクイーカー 一式 (泣き声、自発呼吸による胸郭上下、臍帯拍動の再現用)
- 臍帯、および臍帯結紮用糸
- シート
- 帽子
- 収納ポーチ
- 取扱説明書



ママナタリーは全てひとつのバッグに収納できます  
(※バッグのデザイン・色は写真と異なることがあります)

| 品番        | 品名     |
|-----------|--------|
| 340-01333 | ママナタリー |

Buy One  
Gift One

ミラ (20歳) : 十分な訓練を受けたスタッフによる処置で、出産時の深刻な合併症を乗り越えて無事に女兒を出産。



世界では35万人の母親、そして約200万人の新生児が産後まもなく死亡しています。そしてこの99%は発展途上国で発生しています。

レールダールは、ご購入頂いた分と同数のママナタリーを発展途上国に寄贈し、周産期における母子の防ぎうる死を減らす活動に貢献します。



リアルで使いやすい出産時ケア教育ツール

MamaNatalie ママナタリー



# ママナタリー

シンプルでありながらリアルな構造をもち、ファシリテータ、もしくは受講者が産婦役となってロールプレイを行う方式のため、双方に効果的なトレーニングを行うことができます。

## コミュニケーションスキルを強化

産婦との良好なコミュニケーションは、お産の状態把握・説明、また適切な処置を行う上で必要不可欠です。ファシリテータ、もしくは受講者がママナタリーを抱えて産婦役になることで、実際の出産時における会話を含めたコミュニケーションスキルの練習に役立ちます。

## 持ち運び簡単、低価格でしかも使いやすい

ママナタリーは、わずか数分間のイントロダクションを行った後すぐに使用できます。電気を必要とせず、どのような場所でもすぐに準備して使用することができるので、様々な「実際の現場」でシミュレーショントレーニングを行えます。


## 分娩後出血の管理のための現実的なトレーニング

出産時母体死亡の主要な原因は分娩後出血です。ママナタリーは、シンプルな仕組みで最大1,500mlの出血をシミュレーションすることができます。また産後の子宮収縮の良否もコントロール可能です。



ママナタリーは、出産時コミュニケーショントレーニングや分娩後出血の管理トレーニングに適したユニークな特徴を備えています。

付属の新生児NeoNatalie「ネオナタリー」は、新生児の身長・体重をリアルに再現しています。体にぬるま湯を入れることにより、実際の新生児の体重を再現だけでなく、本当に新生児に接しているようなリアルな感覚、感触を体験できます。

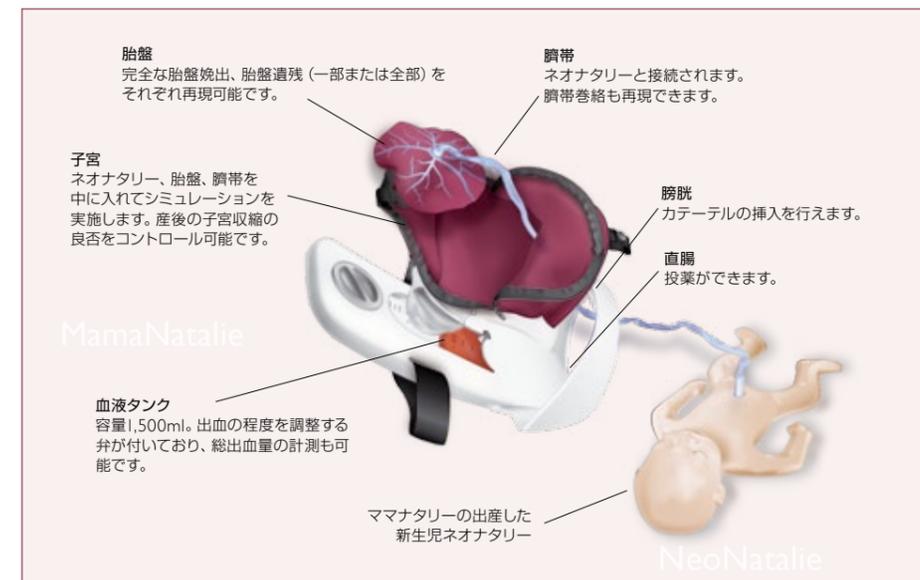

ママナタリーは前向きに抱えて使用し、全て手でシミュレーションが行えます。

- 胎児心音
- 胎盤の娩出や胎盤遺残
- 産道での胎児の位置
- 子宮の硬さ（子宮収縮の状態）
- 出血の程度と量



胎児心拍の確認



尿道カテーテルの挿入



骨盤位分娩



吸引分娩



オキシシンの投与



コントロール下の臍帯牽引



胎盤遺残