



Laerdal®

helping save lives



抜管のリスクを軽減します

トーマス チューブホルダー 〈一般医療機器〉

トーマス チューブホルダーは、ETチューブ、ラリゲルマスク、コンビチューブ、ラリゲルチューブなど様々な気管内チューブの固定に効果的です。

すばやく簡単に固定でき、テープに比べはるかに信頼性の高い固定が得られます。人間工学に基づいて設計されたトーマス チューブホルダーは、幅広い医療従事者のニーズに応えるため、成人用・小児用の2サイズをご用意しています。

ヘッドストラップ


不快感の少ない付け心地で、濡れても伸び縮みしません。成人用と小児用が区別しやすいように小児用にはピンク色のストラップを採用しました。

大きなアクセス開口部

吸引や口内視認がより容易になりました。

スライドスティック

患者の頭部を動かすことなく、首の下を通し、マウスピースの反対側のスリットに通すことで、すばやく装着可能です。

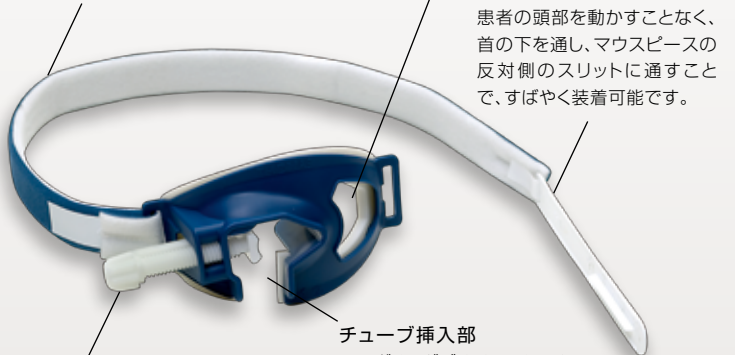

スクリュー&クランプ

気管内チューブを所定の位置ですばやく、容易に固定します。

チューブ挿入部

シングル/ダブルルーメンチューブ等、多様な気管内チューブに対応。トーマス チューブホルダーの装着、調節、取り外しの際も換気の継続が可能です。

www.laerdal.com

特徴	利点
使いやすい	ー装着が容易。気管内チューブをテープや紐で固定する必要がありません。
大きなアクセス開口部	ーETチューブ、ラリゲルマスク、コンビチューブ、ラリゲルチューブやシングル/ダブルルーメンチューブ等、多様な気管内チューブに対応可能です。 ー装着・調節・取り外しの際にも換気の継続が可能です。
マウスピース	ー義歯をはずした患者、顔面外傷患者にも装着できます。
チューブ挿入部	ー大きな開口部で患者の口内や唇色を視認可能です。 ー吸引およびその他口腔内のケア、必要箇所へのアクセスが容易になりました。
幅広のヘッドストラップ	ー確実に不快感の少ないフィット感は、濡れても伸び縮みしません。 ー小児用のトーマス チューブホルダーはストラップがピンク色なので、緊急時にもひと目で識別が可能です。
柔軟性のあるバイトブロック	ー独自の構造で、患者がチューブを噛み潰すことによるエアの流れの阻害を防止すると同時に、柔軟性のある素材で歯と歯茎を保護します。
幅広い適応	ー小児用と成人用サイズで、外径4.0mmから21.0mmまでの気管内チューブの固定に対応します。
手軽で経済的	ートーマス チューブホルダーはディスポーザブル製品です。 ー面倒な洗浄と汚染除去が不要です。 ーラテックスフリーです。



カタログ番号	商品名
600-30005	トーマス チューブホルダー 成人用(オリーブグリーン)
600-10005	トーマス チューブホルダー 成人用
600-20005	トーマス チューブホルダー 小児用

一般医療機器
製造販売届出番号:13B1X00175000005
JMDNコード:43223000



Laerdal[®]
helping save lives

製造販売元
レールダル メディカル ジャパン株式会社

TEL:03-3222-8090 FAX:03-3222-8091

カスタマーサービス

☎ 0120-309-060 www.laerdal.com

※当カタログの記載内容(製品仕様等)は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

※お問い合わせは弊社製品取扱い代理店または本社カスタマーサービスでお受け致します。