



Laerdal

helping save lives



Resusci Anne QCPR

Doskonalenie umiejętności RKO

Od 1960 roku, Resusci Anne jest preferowanym przez pracowników ochrony zdrowia fantomem do szkoleń z zakresu RKO. W szkoleniach z udziałem fantomów z rodziny Resusci uczestniczyło już ponad 500 milionów ludzi, dzięki czemu uratowano około 2,5 miliona osób.

Fantomy z serii Resusci® QCPR® wyznaczają nowe standardy w szkoleniu z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Oferują nowe możliwości uzyskania informacji zwrotnej o jakości wykonywanych ćwiczeń. Rozszerzony pomiar głębokości uciśnień i objętości oddechów pozwala na szczegółową ocenę tych czynności. Dokładne dane sprawiają, że szkolenie RKO jest efektywniejsze niż kiedykolwiek.

Informacja zwrotna QCPR




SimPad PLUS z aplikacją SkillReporter

Najczęściej wybierana przez ochronę zdrowia. Zawiera szczegółowe informacje zwrotne dot. parametrów RKO oraz harmonogram zdarzeń występujących podczas ćwiczeń symulacyjnych.



SkillGuide

Małe, przenośne i lekkie urządzenie, które służy do bezpośredniego i natychmiastowego przekazywania informacji zwrotnej w celu pomiaru, śledzenia i doskonalenia umiejętności RKO.

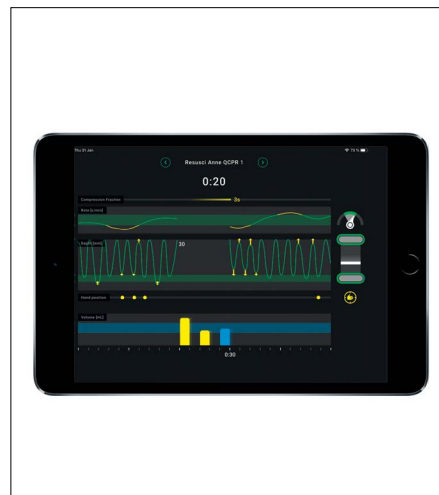

Aplikacja SkillReporter App

Darmowa aplikacja na tablety. Łączy się bezprzewodowo z manekinami z rodziny Resusci QCPR i ukazuje wszystkie kluczowe parametry RKO.



Wszystkie opcje informacji zwrotnej mierzą:

- głębokość i tempo kompresji,
- relaksację,
- frakcję uciśnień,
- tempo i objętość wentylacji.



Kompatybilny z technologią LINK

Technologia LINK wskazuje prawidłowe umieszczenie elektrod oraz pozwala na przeprowadzanie szkoleń z użyciem prawdziwego defibrylatora.

Cechy :

- Naturalna budowa anatomiczna uwzględniająca odchylaną głowę, wysuwającą się żuchwę, unoszącą się podczas wentylacji klatkę piersiową i jej realistyczny opór klatki podczas kompresji
- Symulowane tętno szyjne
- Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej
- Jednokierunkowe drogi oddechowe nadające się do użycia przez wielu ćwiczących i łatwe do wymiany po zajęciach
- Wymienne skóry twarzy wielokrotnego użytku umożliwiają wyposażenie każdego ćwiczącego wentylację usta-usta we własny egzemplarz, zapewniając higienę i bezpieczeństwo
- Proste czyszczenie skóry twarzy manekina w trakcie i po zajęciach
- Może być używany z urządzeniem do kompresji klatki piersiowej (np. Lucas i Autopulse)
- Szkół przy użyciu prawdziwego defibrylatora (tylko z ShockLink)
- Różnorodne opcje uzyskania informacji zwrotnej
 - SkillGuide
 - SimPad SkillReporter
 - QCPR Apps
- Zgodne z wytycznymi RKO ERC, AHA i SRFAC
- Wyposażenie dodatkowe
 - ShockLink
 - Skóra z funkcją LINK
 - Szkolenie z elektrodami CPR-D
 - Kończyny do pierwszej pomocy
 - Głowa do płytkej intubacji (intubacja niedotchawiczna np. maską krtaniową)

Resusci Anne QCPR - konfiguracje:

171-00160	Resusci Anne QCPR - Tors
171-01260	Resusci Anne QCPR - Pełna postać
172-00160	Resusci Anne QCPR - Tors z głową do płytkej intubacji
172-01260	Resusci Anne QCPR - Pełna postać z głową do płytkej intubacji
173-00160	Resusci Anne QCPR - Tors z funkcją LINK
173-01260	Resusci Anne QCPR - Pełna postać z funkcją LINK
174-00160	Resusci Anne QCPR - Tors z funkcją LINK i głową do płytkej intubacji
174-01260	Resusci Anne QCPR - Pełna postać z funkcją LINK i głową do płytkej intubacji

Aksesoria:

206-30001	SimPad PLUS with SkillReporter
170-30050	SkillGuide
185-10050	ShockLink System



Laerdal
helping save lives