


その1秒が左右するとき…

トーマス セレクト チューブホルダー

素早く、簡単に装着できるトーマス セレクト チューブホルダー は
さまざまなタイプの気道管理デバイスに対応しています。
開口部が広く、push-screw 機能を搭載したことにより、
声門上気道デバイス(SGAs)やラリングルマスク(LMAs)、
気管内チューブを素早く効果的に固定できます。




販売名：トーマス セレクト チューブホルダー
製造販売届出番号：13B1X00175000010

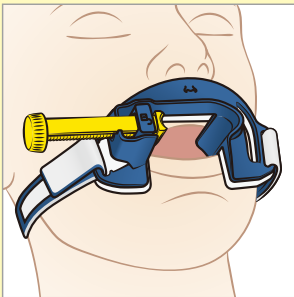


1. より広くなった開口部

入れ歯を装着していない状態の患者や、顔面に外傷のある患者にも使用できます。

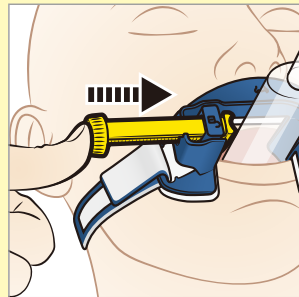


2. push-screw 機能

簡単に素早く取り付けられるよう、留め具部分にpush-screw(プッシュスクリュー)を採用しています。

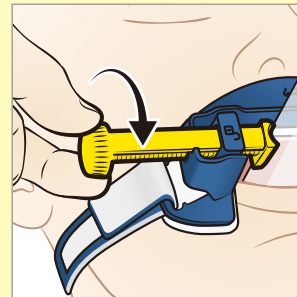

3. ネジを締める

チューブの固定は、これまでどおりネジを締めて固定します。

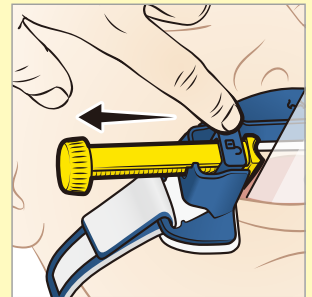

4. 簡単解除

解除ボタンを押せば簡単にチューブの固定を解除できます。

製品の情報

声門上気道デバイスサイズ：3-6

気管チューブ サイズ：内径 \geq 6.5mm

- 単一患者に1回の使用とし、再利用しないこと。

- ラテックスフリー

- 8歳未満の小児には使用しないこと。

カタログ番号	品名	価格(税込み)
600-40005	トーマス セレクト チューブホルダー 成人用	¥1,760

LMJ-MC-0079 | Rev.01-2404

※当カタログの記載内容(製品仕様等)は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。



Laerdal[®]

helping save lives

製造販売元

レールダール メディカル ジャパン株式会社

〒102-0075 東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル

価格、納期、修理についてのお問い合わせ

カスタマーサービス 050-3733-2698

customerservice.jp@laerdal.com

製品の操作方法、トラブル、技術的なお問い合わせ

ヘルプデスク

HelpDesk.jp@laerdal.com