

メガコード ケリー + SimPad PLUS

メガコード ケリー と SimPad PLUS を組み合わせて使用し、高度な気道管理シナリオから静注療法まで、高度な救命スキルに重点を置いた二次救命処置をトレーニングできます。

メガコード ケリー

① 救命関連の様々な処置に対応

マネキンは成人男性を想定しており、救命に関連する様々な処置を行うことができます。

トレーニング可能な処置：

- ・経口/経鼻挿管、各種エアウェイの使用
- ・舌浮腫時の気管挿管
- ・ジェットベンチレーション
- ・輪状工場靱帯切開・穿孔
- ・緊張性気胸の脱気
- ・バッグバルブマスク換気、胸骨圧迫
- ・静脈路確保および輸液トレーニング
- ・筋注：左右三角筋、大腿、臀部
- ・フィジカルアセスメント
- 頸動脈拍の確認（マニュアル操作）
- 各種バイタルサインの確認（モニタを使用）
- 心音/呼吸音/腹部音（正常・異常）の聴取
- 発語（プリセットおよびマイク経由）の確認
- ・除細動



SimPad PLUS




メガコード ケリー

② あらゆる患者状態を再現

SimPad PLUSを使い、様々なバイタルサインの変化を自在に再現。また呼吸音・心音のシミュレートや発声も可能です。

SimPad PLUSと患者モニタの組み合わせで再現可能な項目：

- ・心電図(3誘導および12誘導)、心拍数
- ・SpO2および脈波、脈拍数
- ・血圧（観血および非観血）
- ・呼吸数
- ・体温

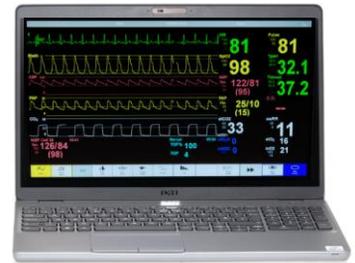

モニタ端末（オプション）

SimPad PLUS

① シミュレーションを簡単に

タッチパネルで直観的に操作。わかりやすいアイコンやメニューにより、どなたでも簡単にお使いいただけます。

② 評価を手軽に

マネキンの操作をしながら、トレーニング内容も記録できる機能を搭載。客観的な評価記録により教育効果が高まります。

③ 簡単便利なバイタル設定

症例ごとのバイタル値を事前に登録できるため、トレーニングを行うたびにバイタル設定を行う手間が省けます。



製品情報

カタログ番号	商品名
200-05050	メガコード ケリー 構成品：マネキン本体、潤滑剤、ジャケット/パンツ、取扱説明書
204-00033	SimPad PLUSシステム 構成品：SimPad PLUS本体、リンクボックスPLUS、シミュレータ装着用ストラップ、リチウムイオンバッテリー、シミュレータ接続ケーブル、ACアダプタ(2個)、USBケーブル、取扱説明書
204-50150	LLEAP for SimPad PLUS ライセンス SimPad PLUSシステムを使用するためには、ライセンスが必要となります。
204-30001PP	SimPad PLUS ワイド保証 落下や水没などによってSimPad PLUS本体が使用不能になってしまった場合でも、無償で交換させて頂く追加保証プログラムです。 ※ご購入と同時にご加入頂く必要があります。2年間または3回までの交換に対応します。期間更新はありません。またリファビッシュ器との交換になります。なお紛失・盗難は保証に含まれません。
400-09201	操作・モニタ端末(タブレット型) SimPad PLUSと組み合わせて動作する患者モニタです。シミュレーションの幅が広がります。
210-91050	カスタマイズSAAS 1日コース シミュレータ、SimPad、SimDesignerなどお客様のご要望にあわせた教育コース

消耗品

カタログ番号	商品名
250-21050	潤滑剤(45ml)
312029	交換用静脈&スキンIVアーム男性
200-00250	修復テープ (1ロール)
212-15250	脛骨IOパッド (10個)
200-00350	ソフトケース (全身)

製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせ：

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com

LMJ-MC-0067 | Rev.03-2602



Laerdal

helping save lives

※当カタログの記載内容（製品仕様等）は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。